

Table of Contents

EN - English	34
Documentation and Notice.....	34
Overview	34
Specifications	34
Product Information	37
Warnings and Limitations of Use	38
Location of Safety and Compliance Labels	38
Voltage Warning	39
Laser Warning	40
Temperature Warning	41
Compliance	41
Serial Number, Configuration, Date Code, and Modification Codes	41
ESD Caution.....	42
Potential for Radio Frequency Interference on Imager Operation.....	42
Potential for Radio and Television Interference	42
Guidance Regarding Electromagnetic Emissions and Immunity	43
Safety Precautions	45
Location Precautions.....	46
Cleaning Precautions.....	47
Media	47
Codonics Paper/White Film Media	48
File Transfer via FTP and LPR	48
Color Management	48
Image Scaling	48
Hardware Variations	48
Disposal Requirements	48
European Disposal Requirements.....	48
Indications for Use	49
User Manual Warnings and Cautions	50
Codonics Horizon User’s Manual Addendum GS/G2/G1 (150C)	52
Summary	52
What Is Covered in This Addendum.....	52
Updating Safety Labeling	52
Media Supported	53
Opening the Top Cover	53
Media ID.....	54
Receive Tray	54

Print Head Positions	55
Changing the Print Head Position	55
Cleaning the Print Head	56
Cleaning the Platen	56
Calibrating Film	56
Choosing Not to Calibrate a Media Cassette	57
Replacing the Pick Tires	57
Clearing a Sheet Jam	58
Troubleshooting	58
Manufacturing Locations	58
Technical Support	58

MT - Malti.....	513
Dokumentazzjoni u Avviż.....	513
Ħarsa ġenerali.....	513
Speċifikazzjonijiet.....	513
Prodott Informazzjoni.....	516
Twissijiet u Limitazzjonijiet ta ' Uża.....	517
Post ta ' Sigurtà u Konformità Tikketti.....	517
vultaġġ Twissija.....	518
Laser Twissija.....	519

Temperatura Twissija.....	520
Konformità	520
Serjali Numru, Konfigurazzjoni, Data Kodiċi, u Modifika Kodiċijiet	520
ESD Attenzjoni.....	521
Potenzjal għal Radju Frekwenza Interferenza fuq Immaġinatur Operazzjoni	521
Potenzjal għal Radju u Televiżjoni Interferenza	521
Gwida Rigward Elettromanjetiku Emissjonijiet u Immunità	522
Sigurtà Prekawzjonijiet	524
Post Prekawzjonijiet.....	525
Tindif Prekawzjonijiet.....	526
Midja	526
Codonics Karta / Abjad Film Midja.....	527
Fajl Trasferiment permezz FTP u LPR.....	527
Kultur Ġestjoni.....	527
Immaġni Skalar.....	527
Hardwer Varjazzjonijiet.....	527
Rimi Rekwiziti	528
Ewropew Rimi Rekwiziti.....	528
Indikazzjonijiet għal Uża.....	528
Utent Manwal Twissijiet u Prekawzjonijiet.....	529
Codonics Horizon Tal-Utent Manwal Addendum GS / G2 / G1 (150C).....	531
Sommarju.....	531
Xiex Huwa Kopert fi Dan Addendum	531
Aġġornament Sigurtà Tikkettar.....	532
Midja Appoġġjat.....	532
Ftuħ il Fuq Għatti	532
Midja ID.....	533
Ircievi Trej.....	534
Stampa Kap Pożizzjonijiet	534
Jinbidlu il Stampa Kap Pożizzjoni	534
Tindif il Stampa Kap	535
Tindif il Platen	535
Kalibrazzjoni Film	535
Għażla Mhux għal Ikkalibra a Midja Cassette	536
Sostituzzjoni il Aghżel Tajers	537
Clearing a Folja Ġamm	537
Issolvi l-problemi.....	537
Manifattura Lokalitajiet	537
Tekniku Appoġġ.....	538

Horizon® GS

Multi-media Imager

EN - English

Documentation and Notice

Codonics Products are Class I products intended for use by Healthcare Professionals. Products packaging and labeling, including Graphic User Interface (GUI) for operation are offered in English and meet MDR, Annex I, Chapter III, 23.4, taking account the training and the knowledge of the potential user.

*Web information, Key Specifications, Intended Use, User manual Appendix, Quick Start Guide & Setup IFU are available in simple translation Member State Languages; primary IFU are available in English.

Overview

The Horizon GS combines diagnostic film and grayscale paper printing in a versatile grayscale imager. Horizon's multiple media options help to immediately cut your costs, build referring physician loyalty and attract new business. Featuring low-cost, room light viewable grayscale paper and a compact, counter-top design, Horizon obsoletes film-only imagers. High speed image processing, networking and spooling are all standard.

Specifications

Print Technology: Direct thermal (dry, daylight safe operation)

Spatial Resolution: 320 DPI (12.6 pixels/mm)

Throughput: Up to 100 films per hour

Time to Operate: 5 minutes (ready to print from "off")

Grayscale Contrast Resolution: 12 bits (4096)

Media Inputs: Three supply slots for 80-100 sheet cassettes

Media Outputs: One receive tray, 50-sheet capacity

Media Sizes: 8" x 10", 14" x 17" (blue and clear), 11" x 14" (blue) DirectVista® Film A, A4, 14" x 17"

DirectVista Grayscale Paper

Dmax: >3.0 with DirectVista Film

Archival: >20 years with DirectVista Film, under ANSI extended-term storage conditions

Media Supply: All media is pre-packaged and factory sealed

Interfaces: Standard: 10/100/1,000 Base-T Ethernet (RJ-45), Serial Console

Network Protocols: Standard: 24 DICOM connections, FTP, LPR

Optional: Windows network printing

Image Formats: Standard: DICOM, TIFF, GIF, PCX, BMP, PGM, PNG, PPM, XWD, JPEG, SGI (RGB),

Sun Raster, Targa

Optional: PostScript™ compatibility

Image Quality: Manual calibration

Image Control: Gamma, Contrast, Polarity, Rotation, Scaling, Antialiasing

Sheet Control: Density Adjustment (Dmax), Look-Up Tables (LUT), Image Warnings, Captions, Sheet Coverage, Border Fill, Crop Anchor
Sheet Formatting: 1:1 - 1:81; Variable Multi-Formatting (VMF™), Fixed Multi-Formatting (FMF™)
Control Panel: Large, backlit LCD display, Status lights include Online, Alert, Fault, Active Power and Menu navigation buttons
Processor: Intel
Memory: 2 GB
Hard Disk: SSD, 32 GB (24 GB available for spooling)
Removable Storage: USB for software upgrades
Smart Card: 72 KB for storing configuration data
Power: Universal Input: 100-120/230V~ 50/60 Hz, 400W printing, 45W idle
Heat Emission: Maximum 400W, 1,366 BTUs/hr. printing, 45W, 153 BTUs/hr. idle
Weight: 66 lbs. (30 kg.)
Engine Dimensions: 14.5" (37 cm) H, 20.5" (52 cm) W, 24" (61 cm) L
Environment: Operating Temperature: 15-30C, Storage: -22 - 50 C, Operating Humidity: 10-70% R.H. (non-condensing)
Regulatory: Full medical device compliance including Class 2 FDA and Class I MDR 2017/745/EU (CE), GMP/QSR, ISO 13485:2016/NS-EN
ISO 13485:2016, Electrical Safety IEC 60601-1 Ed. 3.1 and EMC/EMI:
FCC Class A and IEC 60601-1-2: Ed. 4 for Professional Healthcare Facilities

Conventions Used in the User Manual


Bulleted Lists

Bullets are used to display a list of nonprocedural items. For example:


The control panel contains:

- A display panel
- Keys
- Indicators


Numbered Steps

The  icon indicates the beginning of a procedure. The steps in a procedure are numbered. For example:

1. Press the **MENU** key.

The Main Menu displays on the control panel. The selector arrow () automatically points to the first menu option.

2. To scroll through the menu options, press the up and down keys.

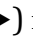The selector arrow () moves up and down through the list. The bottom portion of the control panel display shows a message associated with the currently selected menu option.

Control Panel Navigation

Menu paths are used in some procedures instead of documenting every step needed to navigate to a specific menu option. For example:

From the Main Menu, select the following options:

Default Media

Grayscale

DV Film Blue

Control Panel Keys

Control panel keys are shown in small black ovals to resemble the actual keys, for example, “Press the ENTER key.”

Control Panel Menu Options

Control panel menu options are shown in bold type, for example, “Select the **Gamma** menu option.”

Notes and Tips

Notes contain additional information related to a topic or procedure. For example:

NOTE: If your network is managed by a network administrator or an information technology (IT) department, it would be considered a complex network. You should have the responsible person perform any network-related administrative tasks.

Tips provide additional insights about a topic or procedure (such as, why you may want to do something or a faster way to perform an operation). For example:

***TIP:** Specifying print settings in a multi-user environment*

If the Horizon imager is accessed by multiple users, it is typically better for individual users to enter print values through the DICOM application interface rather than change the default settings through the control panel.

Cautions and Warnings

Cautions alert you to actions or situations that could cause harm to equipment or data. For example:

CAUTION Any changes you make to the imager default settings will also affect prints made by other users. Use caution when changing default settings.

Warnings alert you to actions or situations that could result in personal injury. For example:

WARNING With the imager cover open, touch only those internal components that are colored green.

Text Files and Displayed Text

Monospaced type is used for the contents of an ASCII file or machine text displayed in a terminal command window.

User Data

Bold monospaced type is used to indicate specific characters or words that you enter at a host workstation when performing advanced imager operations. *If the type is also italicized*, it indicates variable text. For example:

1. From your workstation, open a UNIX or MS-DOS command window.
2. Enter the command **telnet hostname** or **telnet IP Address** (using either the Horizon imager hostname or IP Address).
3. At the login prompt, enter the command **status**.

Important Information and Filenames

Bold type is used for emphasis, command names, and paths or filenames. For example:

- The Horizon imager default settings can be changed both at the control panel and using text files.
- The hostname and IP Address must be added to the **/etc/hosts** file.

New Terms

Italic type is used when a term is introduced and defined. For example:

- The Horizon imager has a complete set of *default settings* that contain preconfigured values for every aspect of a printed sheet.

Purpose and Scope

Refer to this user manual for procedures on how to perform the most common imager operations, including:

- Setting up the imager
- Loading media
- Sending print jobs from DICOM Print Service Classcompliant applications running on imaging devices or image viewing workstation
- Sending print jobs from workstations via PostScript
- Sending print jobs using FTP and LPR
- Changing the imager's default image and sheet settings
- Adjusting the appearance of printed images for user preference
- Performing preventive maintenance
- Performing film calibration
- Troubleshooting common problems

NOTE: Some features and functions described here may not apply to older versions of the software.

This User's Manual is intended to be as simple and straightforward as possible for the everyday user. If you need more detailed or more technical information on a feature or topic, or wish to perform more advanced operations, refer to the *Horizon Imager Technical Manual* (Catalog no. HORIZON MNL T). The Technical Manual serves as a companion document to this manual

Product Information

For technical assistance with the Horizon, call Codonics Technical Support at the following number:

Phone: +1.440.243.1198

Toll Free: 800.444.1198 (USA only)

Technical Support is available anytime. Technical Support is also available online via email and the Codonics web site:

Email: support@codonics.com

Web Site: www.codonics.com

General product information can also be requested by sending email to:


Email: info@codonics.com

Please include your postal mailing address and telephone number in the email message. Basic product information is returned via email unless otherwise requested.

Warnings and Limitations of Use

Location of Safety and Compliance Labels

The following figure shows the locations of the imager's safety and compliance labels.

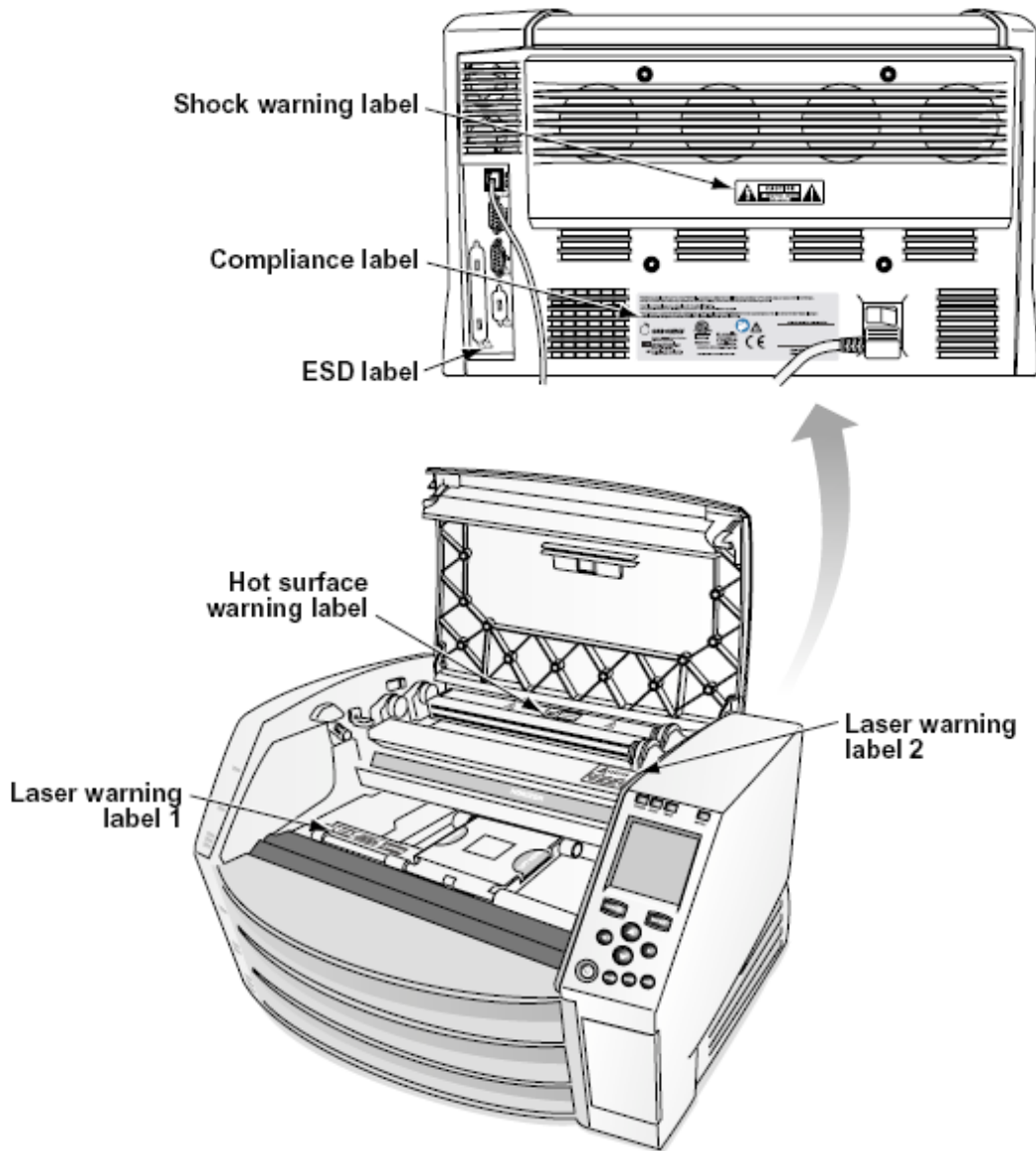

Voltage Warning

The exclamation point within an equilateral triangle and person reading a manual symbol are intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying this device.



NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL. REMOVAL OF LABELS, COVERS, OR ENCASMENT FASTENERS VOIDS THE WARRANTY.

THIS APPARATUS MUST BE ELECTRICALLY GROUNDED.

TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS IMAGER TO RAIN OR MOISTURE.

EQUIPMENT IS NOT TO BE USED AS A COMPONENT OF A LIFE SUPPORT SYSTEM. Life support devices or systems are devices or systems that support or sustain life, and whose failure to perform can be reasonably expected to result in a significant injury or death to a person. A critical component is any component of a life support device or system whose failure to perform can be reasonably expected to cause the failure of the life support device or system, or to affect its safety or effectiveness.

WARNING Grounding reliability can be achieved only when the Horizon is connected to a receptacle marked "Hospital Only" (that is, "Hospital Grade").

WARNING The power cord connected to the Horizon is the main disconnect for the system.

WARNING To disconnect overall power to the Horizon prior to servicing it, power of the system (refer to "Powering Off the Imager").

WARNING Do not modify this equipment without authorization of the manufacturer

WARNING External equipment intended for connection to signal input, signal output, or other connectors, shall comply with relevant IEC standard (e.g., IEC 60950 for IT equipment and the IEC 60601 series for medical equipment). In addition, all such combinations - systems - shall comply with the IEC 60601-1 standard for Medical Electrical Equipment Systems. Equipment not complying to IEC 60601 shall be kept outside the patient environment, as defined in the standard. Any person who connects external equipment to signal input, signal output, or other connectors has formed a system and is therefore responsible for the system to comply with the requirements of IEC 60601-1-1. If in doubt, contact a qualified technician or Codonics Technical Support for approved configurations.

WARNING Do not touch a patient while also accessing the internal components that are under the top cover or receive trays.


Laser Warning

The Horizon imager uses a laser to read barcode information on the media cassettes. The laser module is a 650 – 670nm device of 1.26 mW or less. As such it has been found to comply with the 21 CFR 1040.10 and 1040.11 and IEC 60825 laser standards as a low power Class 1 device.


For safety reasons, the laser is turned on only for a short time when a cassette is inserted. Still, one should use caution and never stare at the laser beam, should avoid exposure to the laser, and should never override any of the interlocks and safety mechanisms. These measures are taken for your protection.

WARNING Use of controls or adjustments to the performance of procedures other than those specified in this manual may result in hazardous radiation exposure.

The laser apertures are marked with a single label, shown below. There are three apertures that correspond to the three cassette locations, one for each, on the same side of the Horizon imager as this label.

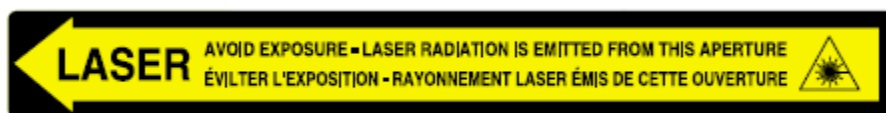

Safety interlocks are marked by the following label. They are located on the same side of the Horizon imager as this label.

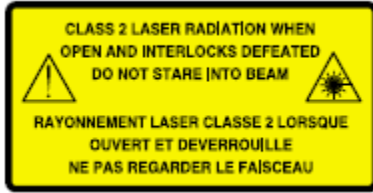

Temperature Warning


Because the Horizon imager is a thermal print device, the surface of the thermal print head heat sink gets hot. Avoid directly touching any components not colored green when accessing the interior of the imager if the imager has been printing. (During some preventative maintenance tasks, you will be touching internal components with cleaning pads or swabs.)

The temperature warning label is shown below.

Compliance

Codonics is in compliance with various regulations.

The Compliance label, which is affixed at the back of the imager, is shown below.

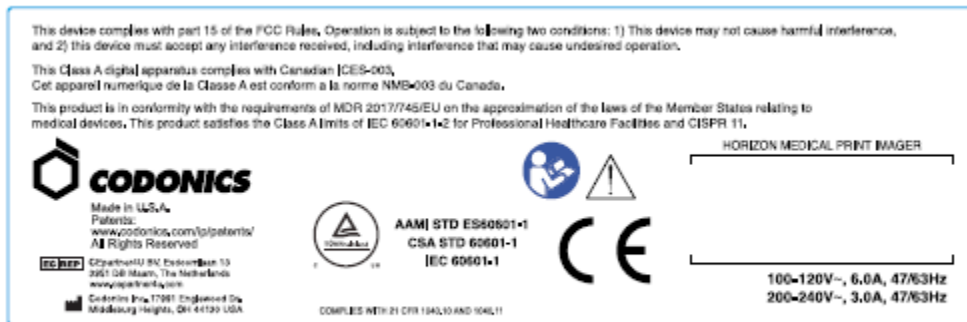


Compliance label

Serial Number, Configuration, Date Code, and Modification Codes


The Serial number label is placed onto the Compliance label. It includes the following information.

- The serial number (SN), which uniquely identifies the unit.
- The Configuration number (CNFG), which details the build configuration.
- The modifications codes, which are to the right of the CNFG number and are a series of 20 numbers. When any of these numbers are blocked out, that identifies a modification that was made to the unit.
- The date code in YYYY-MM format below the factory date code symbol.

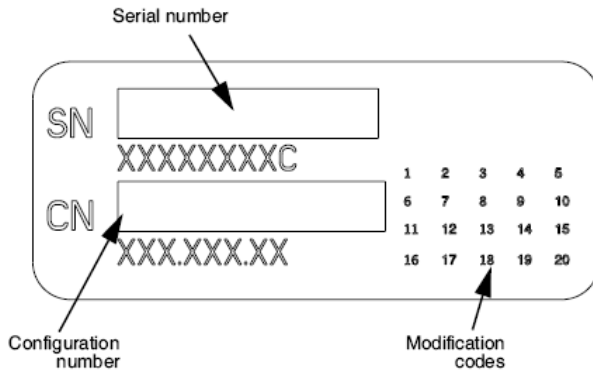

ESD Caution

Connections to other pieces of equipment are made at the rear of the Horizon imager. These connectors are marked with a precautionary ESD warning symbol, as shown below. Do not touch any of the pins of these connectors. When making connections to the imager, it is best done while the imager is plugged in but not powered on. ESD may cause erratic behavior of the imager when powered on. Should this occur, power to the imager may have to be cycled. It is recommended that all staff involved in making connections to the imager be aware of these ESD precautions.

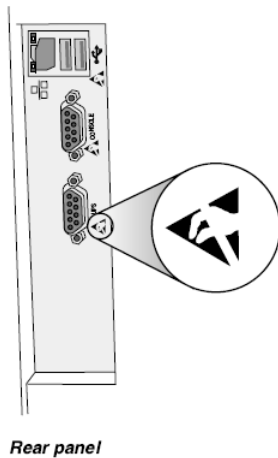

Potential for Radio Frequency Interference on Imager Operation

Both portable and mobile RF communications equipment can affect medical electrical equipment, including the Horizon imager. Keep such RF communications equipment out of the immediate area.

Potential for Radio and Television Interference

The Horizon imager generates and uses radio frequency energy, and if not installed and used properly, that is, in strict accordance with the manufacturer's instructions, may cause interference to radio and television reception. It has been type tested and found to comply with Class B emission limits for a computing device in accordance with the specifications in Subpart J of Part 15 of FCC Rules, which are designed to provide reasonable protection against such interference when operating in a commercial environment. Operation of the equipment in a residential area is likely to cause interference, in which case the user, at his own expense, will be required to take whatever measures may be appropriate to correct the interference. If your imager does cause interference to radio or television reception, you are encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna
- Relocate the imager with respect to the receiver

If necessary, you should consult Codonics technical support or an experienced radio/television technician for additional suggestions. You may find the following booklet prepared by the Federal Communications Commission helpful: *How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems*. This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 20402, Stock No. 004-000-00345-4.

This product is in conformity with the requirements of EC Council directive MDR 2017/745/EU (CE) on the approximation of the laws of the Member States relating to medical devices. This product satisfies the Class A limits of IEC60601-1-2 and CISPR 11. A declaration of conformity with the requirements of the Directive has been signed by the Director of Operations. Horizon is approved for export via FDA Certificates to Foreign Government and registered as a medical device for import. A current list of countries is available on request.

Guidance Regarding Electromagnetic Emissions and Immunity

Suitable Environments:

- Horizon is intended for use in professional healthcare facility environments, including hospitals and medical clinics.
- Horizon has not been evaluated for use near HF surgical equipment. If use near HF surgical equipment is desired, the user is responsible for verifying proper operation of the Horizon. If Horizon does not perform correctly in this environment, move the Horizon farther from the source of the electromagnetic disturbance.
- Horizon has not been evaluated for use in emergency medical vehicles.

As a support device, Horizon does not provide essential performance.

WARNING Use of this equipment adjacent to or stacked with other equipment should be avoided because it could result in improper operation. If such use is necessary, this equipment and the other equipment should be observed to verify that they are operating normally.

WARNING Use of accessories, transducers and cables other than those specified or provided by the manufacturer of this equipment could result in increased electromagnetic emissions or decreased electromagnetic immunity of this equipment and result in improper operation.

WARNING Portable RF communications equipment (including peripherals such as antenna cables and external antennas) should be used no closer than 30 cm (12 inches) to any part of the Horizon, its cables, or accessories. Otherwise, degradation of the performance of this equipment could result.

Electromagnetic Emissions Standards and Test Levels:

Test / Standard	Compliance Level
RF Emissions CISPR 11	Group 1, Class A
RF Emissions FCC Part 15	Class A
Conducted Emissions CISPR 11	Group 1, Class A
Harmonic Distortion IEC 61000-3-2	Class A
Voltage Fluctuations and Flicker IEC 61000-3-3	Complies

Electromagnetic Immunity Standards and Test Levels:

Test / Standard	Compliance Level
Electrostatic Discharge IEC 61000-4-2	±8kV contact ±2kV, ±4kV, ±8kV, ±15kV air

Electromagnetic Immunity Standards and Test Levels: (Continued)

Test / Standard	Compliance Level
Radiated RF Immunity	3 V/m
IEC 61000-4-3	80 MHz - 2.7 GHz 80 % AM at 1 kHz
Proximity fields from RF wireless equipment	Complies
IEC 61000-4-3	
Electrical Fast Transient / Burst	AC Port: ± 2 kV, 100 kHz repetition frequency
IEC 61000-4-4	SIP/SOP Ports: ± 1 kV, 100 kHz repetition frequency
Surge	Line-to-Line: ± 0.5 kV, ± 1.0 kV
IEC 61000-4-5	Line-to-Ground: ± 0.5 kV, ± 1.0 kV, ± 2.0 kV
Conducted Immunity	AC Port and SIP/SOPs:
IEC 61000-4-6	3V, 0.15 MHz - 80 MHz 6V, in ISM bands between 0.15 MHz and 80 MHz 80 % AM at 1 kHz
Magnetic Field Immunity	30 A/m, 50 Hz or 60 Hz
IEC 61000-4-8	
Voltage Dips	0% U_T , 0.5 cycle at 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° and 315°
IEC 61000-4-11	0% U_T , 1 cycle AND 70% U_T , 25/30 cycles, Single phase: at 0°
Voltage Interruptions	0% U_T , 250/300 cycle
IEC 61000-4-11	

Safety Precautions

- Never connect this imager to any outlet or power supply that has a voltage or frequency different than that specified on the rear of the imager.
- When servicing the imager, always power it off using the (power) key at the control panel, then turn the rocker switch in the back to the 0 (off) position, then unplug the imager.

- Damage to the power cord may cause fire or shock hazard. When unplugging the power cord, hold it by the plug only and remove the plug carefully.
- If the power cord needs to be replaced, replace it only with another Codonics power cord manufactured specifically for your imager's power configuration.
- If the imager is smoking or making unusual sounds, power off and unplug the imager immediately.
- Do not insert foreign objects of any kind into the imager; doing so can constitute a safety hazard and cause extensive damage.
- Do not place any liquid containers on the imager. If, for some reason, liquid seeps into the imager, power off the imager and unplug the power cord from the source outlet. If used without corrective measures, the imager may be damaged.
- Do not use the imager near flammable gases.
- With the imager top cover open or the receive trays removed, touch only those internal components that are colored green (shown in the following figure). Remove rings, ties, jewelry, and other items, and tie back hair, so that they do not fall into or get caught in the imager.



Internal Components That Are Colored Green (called out in the illustration) Are Safe to Touch

Location Precautions

- The imager's operating ambient temperature range is 15–30°C (59–86°F), with a relative humidity of 10%–80%.
- If the imager is moved quickly from an extremely cold place to a warmer one, condensation is likely to form. Do not use the imager if condensation has formed. Wait until the condensation has evaporated. You can speed up the evaporation time by moving the imager to a dryer location.
- Ventilation slots and holes are provided on the sides and rear of the imager. Place the imager on a hard level surface and locate it at least 10 cm (4 in.) from walls to ensure proper ventilation

CAUTION Adequate ventilation is required for proper operation of the imager

CAUTION When positioning the Horizon Imager, ensure there is adequate space to access the rear power switch.

- Do not place imager in a high humidity or high dust area. Airborne dirt particles can cause image quality problems. Avoid placing the imager in areas where ventilation ducts, open doors, or frequent passers-by might expose the imager and media to high levels of debris.
- Do not locate the imager in hot-springs areas where hydrogen sulfide and acidic ions are likely to be generated.
- Do not locate the imager where there are oily fumes and vapors.
- Do not locate the imager in direct sunlight.
- Do not locate imager near sources of high RF energy.
- Do not locate the imager where it might be subject to jarring or vibrations, such as a table or desk in a high-traffic area. Jarring and vibrations can affect the print quality of images.
- Horizon satisfies the electrical safety limits of IEC60601-1 and CISPR 11 and is suitable for patient care area location. Check with local ordinances and installation guidelines to confirm approved location requirements.

Cleaning Precautions

- Many plastic components are used in the imager's construction. Coat flecking and deformation is likely to occur if the imager is wiped with chemical dusters, benzene, thinners, insecticides, or other solvents. Rubber and PVC materials left in contact with the imager for extended times will cause damage. Never use petroleum-based solutions or abrasive cleaners.
- To clean the imager cover, first power off the imager using the (power) key at the control panel, then turn the rocker switch in the back to the 0 (off) position, then unplug the imager. Clean the cover with a soft cloth slightly moistened with a mild soap and water solution. Allow the cover to completely dry before operating the imager again.

Media

For **ChromaVista**® color prints, the consumed ribbon contains facsimiles of any patient images printed to **ChromaVista** color sheets. Therefore, you must properly dispose of or destroy consumed ribbon to ensure the confidentiality of patient images.

The optical density of reflective and transmissive prints have a nominal range of: D_{min} = 0.10 OD (reflective), 0.11 OD (transmissive) to D_{max} = 2.10 OD (reflective), 3.1 OD (transmissive). Actual optical densities may vary based on media variations and on the instrument being used to measure density. For example, **DirectVista**® Clear film may have a lower D_{min} and D_{max} than **DirectVista** Blue film.

- The Horizon imager includes a built-in densitometer. The built-in densitometer is designed to produce consistent prints by compensating for variation from one film cassette to another and one imager to another. For applications that require absolute control of the maximum density, the results should be checked against a bench-top commercial densitometer. The internal densitometer can be calibrated to a desktop unit. See the *Horizon Imager Technical Manual* for more information.
- **DirectVista** media is optimized for grayscale prints, while **ChromaVista** is optimized for color prints. If **ChromaVista** is not giving you satisfactory results with grayscale images, you may want to consider using **DirectVista** media for those applications.
- Media variations between different production lots may produce subtle differences in image quality and color. These variations most often occur in color ribbons and are characterized as a slight color hue in grayscale images.
- Codonics film media is designed to be viewed using a light box suitable for viewing medical diagnostic images.
- Codonics paper/white film media is designed to be viewed under coolwhite, fluorescent light. Spectral differences and intensity variations in the viewing light sources can change the apparent color of images printed on paper/white film.

- Printed images that are subject to prolonged exposure to sunlight, ultraviolet light, or extreme heat may degrade in image quality. (For example, printed sheets should not be stored in an automobile on a sunny day.) Precautions should be used to avoid prolonged direct exposure.

Codronics Paper/White Film Media

The terms “white paper” and “white film” are synonymous references and used interchangeably in this manual.

File Transfer via FTP and LPR

- Different users who share a user name when transferring files to the imager may cause unpredictable and erroneous printed output. The imager associates information with the user name. Each user should have a unique user name when connecting to the imager via FTP and LPR.

Color Management

- Image settings—including gamma, contrast, Dmax, saturation, and MCM™ (Medical Color Matching™)—are intended to compensate for differences that may occur between image acquisition and image printing. These filters allow you to accurately render the final printed image. You should use care when applying these filters to avoid overcompensation.
- The Default User Settings set at the control panel will potentially affect prints made by all users. Use caution when changing the default settings.

Image Scaling

- Scaling an image will filter the original image data and add or remove information, which may affect the accuracy of the final printed image. The amount of information added or removed will also vary with the magnitude of the scale factor applied. This can also affect the accuracy of the final printed image. You should be aware of the properties and limitations of each scaling algorithm and select the appropriate algorithm for the task.

Hardware Variations

- Components used in the imager may vary, causing differences in image quality. The thermal process of producing a print utilizes many components that are calibrated to provide consistency between imagers. There are subtle differences between imagers that can cause print variations. These differences usually apply to thermal print head calibration. Other factors such as age, usage, heat, mechanical wear, and shipping can affect image color and quality.
- The type of media used to install software updates and to backup imager configuration settings depends on hardware variations. If the imager has a built-in Zip drive, installations and backups are performed using 100-MB Zip disks. If the imager does not have a built-in Zip drive, USB flash drives are used with the USB ports on the rear panel. Throughout this manual, Zip disks and USB flash drives are referred to as *installation media* or *backup media*, depending on the operation being performed.

NOTE: If the imager has both a Zip drive and a USB port, always use the Zip disk to install software and save configuration settings.

Disposal Requirements

Disposal of this product and consumables shall be in accordance with all applicable laws and regulations in effect at the locality at the time of disposal.

European Disposal Requirements

Codonics imagers and electronic accessory devices are not to be discarded or recycled; rather they are to be returned to the manufacturer. Contact Codonics directly or by the link provided for the latest information concerning:

- Identification of the country-specific Importer/Distributor/Producer
- Product return and treatment of our electronic products

Manufacturer: Codonics Inc.

17991 Englewood Drive

Middleburg Heights, OH 44130 USA

Phone: +1.440.243.1198

Fax: +1.440.243.1334

E-mail: WEEE@codonics.com

www.codonics.com

Codonics electronic products and accessories bearing the following symbol are subject to European Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) 2002/96/EC, amended by Directive 2003/108/EC. The EN 50419 symbol indicates separate collection and return required.



EN 50419 symbol

Indications for Use

CAUTION Approved FDA Class 2 device - Federal law restricts this device to be sold for use by or on the order of a physician.

The intended use of the Horizon Series Imagers is high-resolution hardcopy imaging of digital image source material and through the conversion of electronic signals from a wide variety of direct/indirect medical imaging modality outputs. The hardcopy output includes, however is not limited to, digital radiography, nuclear medicine, ultrasound, CT, MRI, CR, and Radiation Therapy planning. Images are suitable for medical image diagnosis use and referral. The system is intended for use by medical radiologists, imaging modality specialists, and communications to referring physicians.

The Horizon Series Imagers are dry, thermal, grayscale (G, GS,GSs,GS-Rad, G1, and G2 models) and grayscale/color (Ci, Ci-s, CiRAD, and SF models) direct thermal printer/imagers.

The Horizon XL is a special model adding 14 x 36in. and 14 x 51in. true size "long" media that permits digital direct orthopedic application hardcopy, including diagnosis and analysis of scoliosis, weight bearing spine/hip/knee, and long bone/hip prosthetic and orthopedic appliances work-up and surgical planning. Horizon XL is applicable to true-size hardcopy of whole body CT, MRI, and Angiographic and Venous flow imaging procedures.

Horizon Imagers are 510(k) cleared to market as FDA Class 2 devices, Regulation number 892.2040, Classification Product Code LMC: Horizon Series Medical Multimedia Dry Imagers K021054 and Horizon XL Medical Long Film Imager Hardcopy Multimedia K060440.

CAUTION Approved FDA Class 2 device - Federal law restricts this device to be sold for use by or on the order of a physician.

CAUTION Make sure that the table can support the weight of the imager [approximately 66.7 kg (147 lbs) with receive trays and three full supply cassettes installed].

WARNING The imager is heavy. To avoid injury, use two people to unpack and position the imager.

CAUTION Do not scratch or nick the sheet metal. Scratches and nicks in the basement will damage the printed side of ChromaVista sheets.

CAUTION Make sure that the imager is powered off before connecting the Ethernet cable. For information about powering the imager on and off, refer to “Powering the Imager On and Off”.

CAUTION Do not touch any of the connector pins.

CAUTION If the thermal print head is not parked, power on the imager, then repeat steps 2 and 3 to properly power off the imager so that it does park.

CAUTION Push the ribbon carriage down slowly. Forcing it down too quickly may damage the carriage.

CAUTION If the imager is powered off using the POWER key, unprinted queued jobs are saved and will finish printing once the imager is powered on again (you can purge all jobs). However, if the imager is powered off using the rocker switch in the back or power is interrupted (for example, an unexpected power failure), queued jobs may be lost.

WARNING When servicing the imager, always power it off using the POWER key, turn the rocker switch in the back to the 0 (off) position, then unplug the imager.

CAUTION Use only Codonics media. Do not use plain paper, office transparencies, or other unapproved media as damage, improper operation, or malfunction may result. For information about the approved Codonics media types and sizes, and how to order cassettes, refer to “Ordering Media”.

CAUTION Do not refill a cassette. Do not tamper with or remove the barcode label. The cassette’s barcode information is essential for ensuring diagnostic image quality. Compromising the cassette in any way jeopardizes the quality and reliability of the imager.

CAUTION Do not remove or insert a cassette while a sheet is being printed, or you could affect the image quality of the printed sheet or cause a jam. Always pause the imager first.

CAUTION Do not remove the printed cassette cover; it protects the media from dust and other contaminants. Always hold and store the cassette with the open side up to prevent the sheets from falling out.

WARNING With the imager cover open, touch only those internal components that are colored green. Remove rings, ties, jewelry, and other items, and tie back hair, so that they do not fall into or get caught in the imager.

CAUTION Used ribbon retains the negative of the color images that were printed using that ribbon. If you are required to ensure patient confidentiality and privacy, the ribbon should be destroyed.

CAUTION Use caution when changing the imager default settings. Changes could affect prints made by other users.

CAUTION Changing the default settings will affect prints made by other users. Use caution when changing default settings. Typically, it is better to specify sheet and image parameter settings from the DICOM application or a PostScript printer’s settings, or use a Job Settings file that contains the values you need. For information about Job Settings files, refer to the *Horizon Imager Technical Manual*.

CAUTION If the imager’s settings were changed from the factory defaults prior to being shipped (for example, to accommodate a special OEM configuration), resetting to the factory defaults will not restore the “as shipped” settings. Instead, they will be reset to the standard factory default values.

CAUTION Resetting to the factory defaults will affect prints made by other users. Use caution when changing default settings. Typically, it is better to specify sheet and image parameter settings from the DICOM application or a PostScript printer's settings, or use a Job Settings file that contains the values you need. For information about Job Settings files, refer to the *Horizon Imager Technical Manual*.

CAUTION Changing the imager's Default Media and Default User Settings could affect subsequent prints made by other users. Use caution when changing default settings.

CAUTION Changing the imager's Default Media and Default User Settings could affect subsequent prints made by other users. Use caution when changing default settings.

WARNING With the imager cover open, touch only those internal components that are colored green. Remove rings, ties, jewelry, and other items, and tie back hair, so that they do not fall into or get caught in the imager.

WARNING The thermal print head may be hot.

WARNING When cleaning the print head, avoid the extreme ends of the print head, which are sharp.

CAUTION Use only the print head cleaning wipe when cleaning the thermal print head. Also, do not touch the glass surface of the thermal print head with your fingers; it could damage the print head. To avoid touching the glass surface, you may want to wear gloves when cleaning the thermal print head.

CAUTION The thermal print head must be completely dry before attempting to use the imager.

Allowing the thermal print head to heat up again while still wet will damage the thermal print head.

WARNING With the imager cover open, touch only those internal components that are colored green. Remove rings, ties, jewelry, and other items, and tie back hair, so that they do not fall into or get caught in the imager.

CAUTION Use only the platen roller cleaning wipe when cleaning the platen. The platen roller could be damaged if you use the print head cleaning wipe.

WARNING With the receive trays removed, touch only those internal components that are colored green. Remove rings, ties, jewelry, and other items, and tie back hair, so that they do not fall into or get caught in the imager.

CAUTION Use only the platen roller cleaning wipe when cleaning the pick tires. The tires could be damaged if you use the print head cleaning wipe.

CAUTION Do not touch the pick tires (which may be white or green); body oils from your fingers are hard to remove and could eventually damage the tires.

WARNING With the receive trays removed, touch only those internal components that are colored green. Remove rings, ties, jewelry, and other items, and tie back hair, so that they do not fall into or get caught in the imager.

CAUTION Use only cleaning swabs from a Barcode Reader Cleaning Kit.

CAUTION Do not scratch or nick the sheet metal. Scratches and nicks in the basement will damage the printed side of ChromaVista sheets.

CAUTION Federal law restricts this device to be sold for use by or on the order of a physician.

WARNING With the top cover open, touch only those internal components that are colored green. Remove rings, ties, jewelry, and other items, and tie back hair, so that they do not fall into or get caught in the imager.

CAUTION Do not touch the pick tires (which may be white or green); body oils from your fingers are hard to remove and could eventually damage the tires.

CAUTION To avoid damaging internal components, use care when removing a sheet from the media path in the upper part of the imager.

CAUTION Never put a sheet back in the cassette. Dust or oil from your finger will affect the image quality.

WARNING With the top cover open, touch only those internal components that are colored green. Remove rings, ties, jewelry, and other items, and tie back hair, so that they do not fall into or get caught in the imager.

CAUTION Be careful not to scratch the polished sheet metal or damage the sensor near the upper guide notch.

CAUTION Make sure you do not overrotate the media guide, as shown below.

CAUTION Federal law restricts this device to be sold for use by or on the order of a physician.

CAUTION Use care when running the Purge Print Jobs function. This function will purge other users' print jobs as well as yours.

CAUTION All files uploaded using anonymous FTP are readable by other FTP users. DO NOT upload sensitive or classified information.

Codonics Horizon User's Manual Addendum GS/G2/G1 (150C)

Summary

The latest versions of Horizon® GS/G2/G1 Imager utilize hardware and software that is not compatible with previous versions. New software Version 4.0.0 is required to support those changes.

The latest versions are identified by the imager serial number prefix **150C**. Please contact your Codonics representative for further information.

NOTE: Horizon Imagers with serial number prefix 150C cannot be downgraded to any previous software version. Imagers with a serial number prefix other than 150C cannot have their software upgraded to 4.0.0.

What Is Covered in This Addendum

The operator instructions for the Horizon Imager are provided in the *Horizon Imager User's Manual*. This addendum covers functionality that is unique to the latest versions of the imager that run Version 4.0.0 software and replaces those sections in the existing manual. Unless specified in this addendum, to operate the imager you can follow the instructions in the *Horizon Imager User's Manual*.

Updating Safety Labeling

The latest versions of the imager have the following updated safety labeling:

- A new temperature warning label, shown below.



- Pinch-point labels along the top of the thermal print head assembly, shown below.



- Because the latest versions of the imager no longer include a barcode reader, laser safety labels are not required.

The following figure shows the locations of the safety labels in the latest versions of the imager.

Pinch point
warning label

Temperature
warning label



WARNING: Keep hands out of the print head lift mechanism indicated by the pinch point warning labels. Failure to do so could result in personal injury.

Media Supported

The latest versions of the imager do not support **ChromaVista** color media. Only **DirectVista** grayscale media is supported.

Opening the Top Cover

The latest versions of the imager do not automatically open the top cover when using the **Open Top Cover** menu option on the Main Menu at the front panel. It must be opened manually. However, before manually opening the top cover, you should still select the **Open Top Cover** menu option to ensure that the print head is retracted. Then press one of the two green releases shown in the following figure to open the top cover.



Top cover releases

NOTE: The top cover is spring-loaded. Place your hand lightly on the top cover before pressing one of the releases to prevent it from opening too quickly.



WARNING: Do not attempt to manually defeat the top cover closed sensor that is on the right inside wall of the imager, shown in the following figure. Doing so could result in personal injury.

Top cover closed sensor



Media ID

- The latest versions of the imager support only the Media ID media authentication system. They do not support reading IDs from barcode labels on the media cassette to authenticate media.
- Unlike with previous imagers that required an external device to be attached to the imager, the Media ID reader is internal to the imager. The Media ID is detected when you insert a media cassette. If the media cassette is successfully authenticated, a confirmation message displays on the front panel.
- Once the Media ID is read, the media cassette can only be used with that imager. You cannot use the cassette with another imager.

NOTE: If the imager does not recognize the Media ID on a cassette, contact Codonics Technical Support. In the latest versions of the imager, media cassette barcodes cannot be entered manually at the front panel.

Receive Tray

The latest versions of the imager include only one receive tray. Media pulled from any of the supply slots will be placed in this receive tray.

To remove the receive tray:

1. Open the top cover. Refer to “Opening the Top Cover.”
2. Lift the front of the receive tray up.
3. Pull the receive tray out away from the imager.



Print Head Positions


The latest versions of the imager have two print head positions:

- Shipping position, in which the print head is closer to the back of the imager. This should be used prior to shipping the imager to prevent damage to the print head or platen bearings. It should also be used when cleaning the print head or platen, as the position provides more room between these components to make cleaning easier.
- Printing position, in which the print head is positioned closer to the platen, ready for printing.

Changing the Print Head Position

To change the print head position:

1. If imager power is on, select the **Open Top Cover** menu option to ensure that the print head is retracted and move on to the next step. If imager power is off, move on to the next step.
2. Open the top cover by pressing one of two green releases as shown under “Opening the Top Cover”.
3. Pull up on the two release handles, shown in the following figure, and use the handles to push the print head back to the shipping position or forward to the printing position.

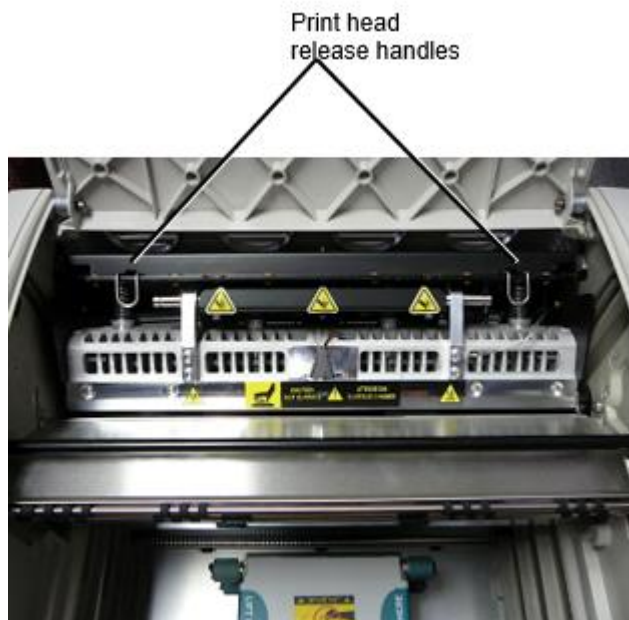



CAUTION: Position the print head with care. Do not drop the print head into the printing position. Doing so could cause damage.

4. Lower the release handles to lock the print head into the new position.

Cleaning the Print Head

Before cleaning the print head, you must manually move it to the shipping position. Refer to the procedure above under “Changing the Print Head Position.”

Otherwise, you can follow the procedure as described in “Cleaning the Print Head and Nosepiece” in the *Horizon Imager User’s Manual*.

The alcohol concentration of the Print Head cleaning pad is 99% IPA.

Cleaning the Platen

Before cleaning the platen, you must manually move the print head to the shipping position. Refer to the procedure above under “Changing the Print Head Position.”

Also, the latest versions of the imager do not support jogging the platen from the front panel. When cleaning the platen, you have to use your fingers to manually jog the platen so that you can clean its entire surface. Make sure that you clean the areas where you have touched the platen to remove any oil from your fingers.

Otherwise, you can follow the procedure as described in “Cleaning the Platen and Donor Guide Bar” in the *Horizon Imager User’s Manual*.

The alcohol concentration of the Platen cleaning pad is 70% IPA.

Calibrating Film

The latest versions of the imager do not support internal film calibration. To calibrate film, you have to print a calibration film, use an external densitometer, and enter a calibration adjustment value.

To calibrate the film for a media cassette:

1. Insert the media cassette.

If the Auto Film Calibrate preference setting is set to On, a calibration film is printed automatically. (For more information about the Auto Film Calibrate preference setting, refer to the *Horizon Imager Technical Manual*.)

If the Auto Film Calibrate setting is set to Off, on the front panel navigate to and select the Calibration Print menu option corresponding to the slot in which the cassette is inserted:

Utilities...

Film Calibration...

Cassette n...

Calibration Print

The calibration film includes 16 grayscale blocks with a range of optical densities. The calibration film also includes the slot number to identify the cassette to which it corresponds.

2. Measure the 16 blocks and identify the two blocks that bracket the target density of 1.30 OD.
3. Calculate the “adjusted block” value that would be required to achieve 1.30 OD by applying linear interpolation between the two bracket blocks’ assigned numbers. For example:

Block 10: OD = 1.29

Block 11: OD = 1.36

Block value to achieve 1.30 OD = 10.1 or 10.2

On the front panel, navigate to the Calibration Value menu corresponding to the cassette slot:

Utilities...

Film Calibration...

Cassette *n*...

Calibration Value...

1. Use the increment and decrement keys on the front panel to enter the adjusted block value from step 3.
2. To save the entry, press the Enter key.

NOTE: Once saved, this calibration value will apply only to this cassette. Also, this calibration value will be used regardless of what slot this cassette is inserted into.

Choosing Not to Calibrate a Media Cassette

You can choose not to calibrate a new media cassette.

If the Auto Film Calibrate setting is set to On, a calibration film will be printed from the cassette:

- To continue with the calibration, enter a calibration adjusted block value, as described in the procedure above.
- To skip the calibration, press the Pause button to take the printer back on line.

If the Auto Film Calibrate setting is set to Off, a calibration film will not be printed and calibration will not be performed unless you perform the procedure above.


If you choose not to calibrate a media cassette, the calibration value from the last calibrated cassette of that media type and size will be used, if one exists. Otherwise, the default calibration value will be used.

Replacing the Pick Tires


The pick tires in the latest versions of the imager can be replaced.

To replace a pick tire:

1. Power down the imager.
2. Open the top cover.
3. Locate the retaining clip that secures the pick tire to the spindle.
4. Lift up on the tab on the top of the clip (1) and slide the clip sideways from (that is, perpendicular to) the spindle (2), as shown in the following figure.

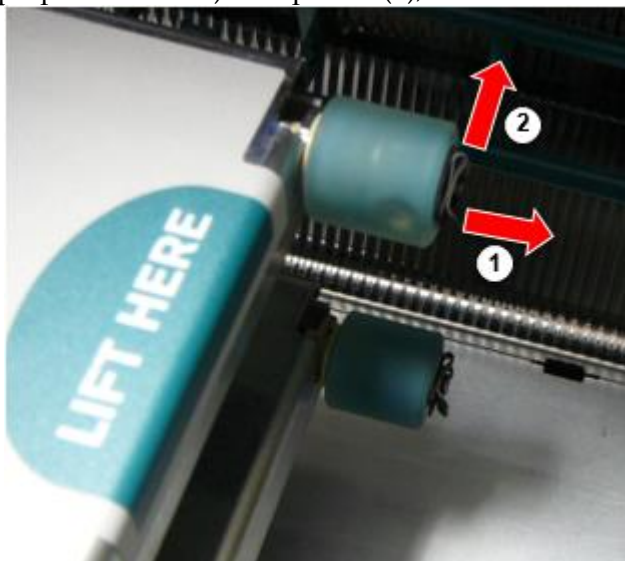

5. Slide the pick tire off of the spindle.
6. On the new pick tire, locate the two notches on one side of the pick tire, shown in the following figure. These notches fit over two small pins on either side of the spindle.

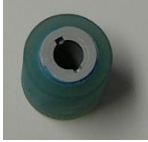

7. Orienting the pick tire with the notched side first, slide the pick tire all the way on to the spindle, making sure you align the notches with the spindle pins.
8. With the clip tab facing away from the pick tire, slide the retaining clip sideways back onto the spindle.
9. Use a cleaning wipe provided with the Platen and Print Head Cleaning kit or use the Horizon Cleaning Cassette to clean the pick tire of any oil from your fingers.

Clearing a Sheet Jam

With the latest versions of the imager, the sheet path through the imager has been simplified, since there is only one receive tray. Other than the simplified path, clearing a sheet jam is the same as with previous versions of the hardware.

Troubleshooting

For the latest versions of the imager, there is a new reason for a sheet jam: A sheet jam can occur if the print head is in the shipping position when attempting to print. To correct this problem, remove the jammed sheet and move the print head to the printing position (see “Changing the Print Head Position”).

Manufacturing Locations

Horizon Imagers are manufactured in both the USA and China. Refer to the product label at the rear of the imager to determine the origin of your imager.

Technical Support

If problems occur that are not covered by this Addendum, please contact Codonics Technical Support at any time.

Phone: +1.440.243.1198

Email: support@codonics.com

Website: www.codonics.com

Horizon® GS

Multi-media Immaġinatur

MT - Malti

Dokumentazzjoni u Avviż

Codonics Prodotti huma Klassi Jien prodotti maħsuba għal użu minn Kura tas-saħħa Professjonisti. Prodotti ippakkjar u tikkettar, inkluż Grafika Utent Interface (GUI) għal operazzjoni huma offered fi Ingliz u tiltaqa MDR, Anness Jien, Kapitolu III, 23.4, tieġu kont il taħriġ u il għarfien ta ' il potenzjali utent.

* Web informazzjoni, Ewlenin Speċifikazzjonijiet, Maħsub Uża, Utent manwali Appendiċi, Malajr Ibda Gwida & Setup IFU huma disponibbli fi sempliċi traduzzjoni Membru Stat Lingwi; primarja IFU huma disponibbli fi Ingliz.

Ħarsa generali

Il Horizon GS tgħaqqad dijanjostiku film u skala tal-griż karta stampar fi a versatili skala tal-griż immaġinatur. Orizzont multipli midja għażliet għajjnuna għal immedjatament maqtugħa tiegħek spejjeż, tibni jirreferu tabib lealtà u tattira ġdid negozju. Jidhru bi prezz baxx, kamra dawl viżibbli skala tal-griż karta u a kompatt, counter-top disinn, Horizon skaduti film biss immaġini. Għoli veloċità immaġni ipproċessar, netwerking u spooling huma kollha standard.

Speċifikazzjonijiet

Stampa Teknoloġija: Dirett termali (niexef, dawl tax-xemx bla periklu operazzjoni)

Ġeografika Riżoluzzjoni: 320 DPI (12.6 pixels / mm)

Fluss: Fuq għal 100 films kull siegħa

Ħin għal Ħaddem: 5 minuti (lest għal jistampa minn "Mitfi")

Skala tal-griż Kuntrast Riżoluzzjoni: 12 bits (4096)

Midja Inputs: Tlieta provvista slots għal 80-100 folja kassetts

Midja Outputs: Waħda jircievu trej, 50 folja kapacià

Midja Daqsijiet: 8 " x 10 " , 14 " x 17 " (blu u ċar), 11 " x 14 " (blu) DirectVista® Film A, A4, 14 " x 17 "

DirectVista Skala tal-griż Karta

Dmmannara: > 3.0 ma ' DirectVista Film

Arkivju: > 20 snin ma ' DirectVista Film, taħt ANSI fit-tul hażna kondizzjonijiet

Midja Provvista: Kollha midja huwa ippakkjat minn qabel u fabbrika issigillat

Interfaces: Standard: 10/100 / 1,000 Bazi-T Ethernet (RJ-45), Serjali Console

Netwerk Protokolli: Standard: 24 DICOM konnessjonijiet, FTP, LPR

Mhux obligatorju: Windows netwerk stampar

Immaġni Formati: Standard: DICOM, TIFF, GIF, PCX, BMP, PGM, PNG, PPM, XWD, JPEG, SGI (RGB), xemx Raster, Targa

Mhux obligatorju: PostScript™ kompatibilità

Immaġni Kwalità: Manwal kalibrizzjoni

Immaġni Kontroll: Gamma, Kuntrast, Polarità, Rotazzjoni, Skalar, Antialiasing

Folja Kontroll: Densità Aġġustament (Dmax), Hares il-fuq Tabelli (LUT), Immagni Twissijiet, Captions, Folja Kopertura, Fruntiera Imla, Hsad Ankra
Folja Ifformattjar: 1: 1 - 1:81; Varjabbli Multi-Ifformattjar (VMF™), Iffissat Multi-Ifformattjar (FMF™)
Kontroll Panel: Kbir, imdawwal LCD wiri, Status dwal jinkludu Online, Twissija, Tort, Attiv Qawwa u Menu navigazzjoni buttuni
Proċessur: Intel
Memorja: 2 GB
Iebes Diska: SSD, 32 GB (24 GB disponibbli għal spooling)
Li tista 'titnehha Hżna: USB għal softwer promozzjonijiet
Intelliġenti Karta: 72 KB għal hżna konfigurazzjoni dejta
Qawwa: Universali Input: 100-120 / 230V ~ 50/60 Hz, 400W stampar, 45W wieqaf
Saħħan Emissjoni: Massimu 400W, 1,366 BTUs / siegħa. stampar, 45W, 153 BTUs / siegħa. wieqaf
Piż: 66 lbs. (30 kg.)
Magna Dimensjonijiet: 14.5 " (37 cm) H, 20.5 " (52 cm) W, 24 " (61 cm) L
Ambjent: Joperaw Temperatura: 15-30C, Hżna: -22 - 50 C, Joperaw Umdità: 10-70% R.H. (mingħajr kondensazzjoni)
Regolatorju: Shiħ mediku apparat konformità inkluz Klassi 2 FDA u Klassi Jien MDR 2017/745 / UE (CE), GMP / QSR, ISO 13485: 2016 / NS-EN
ISO 13485: 2016, Elettriku Sigurtà IEC 60601-1 Ed. 3.1 u EMC / EMI:
FCC Klassi A u IEC 60601-1-2: Ed. 4 għal Professionali Kura tas-saħħa Facilitajiet

Konvenzjonijiet Użat fi il Utent Manwal


Bulleter Listi

Balal huma użat għal wiri a lista ta ' mhux proċedurali oġġetti. Għal eżempju:

Il kontroll panel fih:

- A wiri panel
- Ċwieviet
- Indikaturi

Numerat Passi

Il  ikona tindika il bidu ta ' a proċedura. Il passi fi a proċedura huma innumerati. Għal eżempju:

1. Aghfas il **MENU** cavetta.

Il Principali Menu wirjiet fuq il kontroll panel. Il selettur vlegġa (▶) awtomatikament punti għal il l-ewwel menu għażla.

2. Lil scroll permezz il menu għażliet, aghfas il sa u isfel ċwieviet.

Il selettur vlegġa (▶) jiċċaqlaq sa u isfel permezz il lista. Il qiegħ porzjon ta ' il kontroll panel wiri turi a messagg assocjat ma ' il bħalissa magħżula menu għażla.

Kontroll Panel Navigazzjoni

Menu mogħdijiet huma użat fi xi wħud proċeduri minflok ta ' dokumentazzjoni kull pass meħtieġa għal tinnaviga għal a speċifiku menu għażla. Għal eżempju:

Minn il Principali Menu, aghżel il wara għażliet:

Nuqqas Midja
Skala tal-griz
DV Film Blu

Kontroll Panel Ċwieviet

Kontroll panel ċwieviet huma murija fi zghir iswed ovali għal jixbhu il attwali ċwieviet, għal eżempju, "Aghfas il **DHUL** cavetta. "

Kontroll Panel Menu Għażliet

Kontroll panel menu għażliet huma murija fi grassa tip, għal eżempju, "Aghżel il **Gamma** menu għażla. "

Noti u Hjiel

Noti fihom addizzjonali informazzjoni relatati għal a suġġett jew proċedura. Għal eżempju:

NOTA: Jekk tiegħek netwerk huwa ġestiti minn a netwerk amministratur jew an informazzjoni teknologija (IT) dipartiment, dan kieku tkun meqjus a kumpless netwerk. Int għandu jkollhom il responsabbli persuna iwettaq kwalunkwe relatati man-netwerk amministrattiv kompiti.

Hjiel jipprovdu addizzjonali għarfien madwar a suġġett jew proċedura (bħal kif, għaliex int jista ' trid għal aghmel xi haġa jew a aktar malajr mod għal iwettaq an operazzjoni). Għal eżempju:

***TIP:** Speċifikazzjoni jistampa settings fi a multi-utent ambjent*

Jekk il Horizon immaginatur huwa aċċessata minn multipli utenti, dan huwa tipikament ahjar għal individwali utenti għal dahhal jistampa valuri permezz il DICOM applikazzjoni interface anzi minn bidla il default settings permezz il kontroll panel.

Prekawzjonijiet u Twissijiet

Prekawzjonijiet twissija int għal azzjonijiet jew sitwazzjonijiet dak setgħet kawża ħsara għal tagħmir jew dejta. Għal eżempju:

ATTENZJONI Kwalunkwe bidliet int jagħmlu għal il immaginatur default settings se also jaffettwaw stampi magħmula minn ohra utenti. Uża kawtela meta jinbidlu default settings. Twissijiet twissija int għal azzjonijiet jew sitwazzjonijiet dak setgħet riżultat fi personali korriment. Għal eżempju:

TWISSIJA Ma ' il immaginatur għata miftuħ, tmiss biss dawk intern komponenti dak huma ikkulurit ahdar.

Test Fajls u Murija Test

Monospazjat tip huwa użat għal il kontenut ta ' an ASCII fajl jew magna test murija fi a terminali kmand tieqa.

Utent Dejta

Bold monospazjat tip huwa użat għal indika speċifiku karattri jew kliem dak int daħħal fi a ospitanti stazzjon tax-xogħol meta jwettaq avvanzat immaġinatur operazzjonijiet. *Jekk il tip huwa ukoll korsiv*, dan tindika varjabbli test. Għal eżempju:

1.Minn tiegħek stazzjon tax-xogħol, miftuħa a UNIX jew MS-DOS kmand tieqa.

2.Daħħal il kmand **telnet hostname** jew **telnet IP Indirizz** (bl-użu jew il Horizon immaġinatur hostname jew IP Indirizz).

3.Fuq il Idhol fil-pront, daħħal il kmand **status**.

Importanti Informazzjoni u Ismijiet tal-fajls

Bold tip huwa użat għal enfasi, kmand ismijiet, u mogħdijiet jew ismijiet tal-fajls. Għal eżempju:

- Il Horizon immaġinatur default settings jista ' tkun mibdula it-tnejn fi il kontroll panel u bl-użu test fajls.
- Il hostname u IP Indirizz għandu tkun miżjud għal il /*ec̄c̄*/ **hosts** fajl.

Ġdid Termini

Korsiv tip huwa użat meta a terminu huwa introdotti u definiti. Għal eżempju:

- Il Horizon immaġinatur għandu a komplut sett ta ' *default settings* dak fihom ikkonfigurati minn qabel valuri għal kull aspett ta ' a stampati folja.

Għan u Ambitu

Irreferi għal dan utent manwali għal proċeduri fuq kif għal iwettaq il l-aktar komuni immaġinatur operazzjonijiet, inklużi:

- Twaqqif sa il immaġinatur
- Tagħbija midja
- Mittenti jistampa impjegi minn DICOM Stampa Servizz Klassikonformi applikazzjonijiet ġiri fuq immaġini apparat jew immaġni wiri stazzjon tax-xogħol
- Mittenti jistampa impjegi minn stazzjonijiet tax-xogħol permezz PostScript
- Mittenti jistampa impjegi bl-użu FTP u LPR
- Jinbidlu il tal-imager default immaġni u folja settings
- Aġġustament il dehra ta ' stampati immaġini għal utent preferenza
- Jwettaq preventiv manutenzjoni
- Jwettaq film kalibrizzjoni
- Issolvi l-problemi komuni problemi

NOTA: Xi wħud karatteristiċi u funzjonijiet deskritti hawn jista ' mhux japplikaw għal anzjani verżjonijiet ta ' il softwer.

Dan Tal-Utent Manwal huwa maħsuba għal tkun kif sempliċi u sempliċi kif possibbli għal il kuljum utent. Jekk int bżonn aktar dettaljat jew aktar tekniku informazzjoni fuq a karatteristika jew suġġett, jew xewqa għal iwettaq aktar avvanzat operazzjonijiet, irreferi għal il *Horizon Immaġinatur Tekniku Manwal* (Nru tal-Katalogu.HORIZONMNL). Il Tekniku Manwal iservi kif a hbieb dokument għal dan manwali

Prodott Informazzjoni

Għal tekniku għajnuna ma ' il Horizon, sejha Codonics Tekniku Appoġġ fi il wara numru:

Telefon:+1.440.243.1198

Pedaġġ Ħielsa: 800.444.1198 (L-ISTATI UNITI biss)

Tekniku Appoġġ huwa disponibbli għaċ. Tekniku Appoġġ huwa ukoll disponibbli online permezz email u il Codonics web sit:

Email: support@codonics.com

Web Sit: www.codonics.com

Ġenerali prodott informazzjoni jista ' ukoll tkun mitluba minn tibgħat email lil:


Email: info@codonics.com

Jekk jogħġbok jinkludu tiegħek postali posta indirizz u telefon numru fi il email messagġ. Bażiku prodott informazzjoni huwa lura permezz email sakemm inkella mitluba.

Twissijiet u Limitazzjonijiet ta ' Uża

Post ta ' Sigurtà u Konformità Tikketti

Il wara figura turi il postijiet ta ' il tal-imager sigurtà u konformità tikketti.

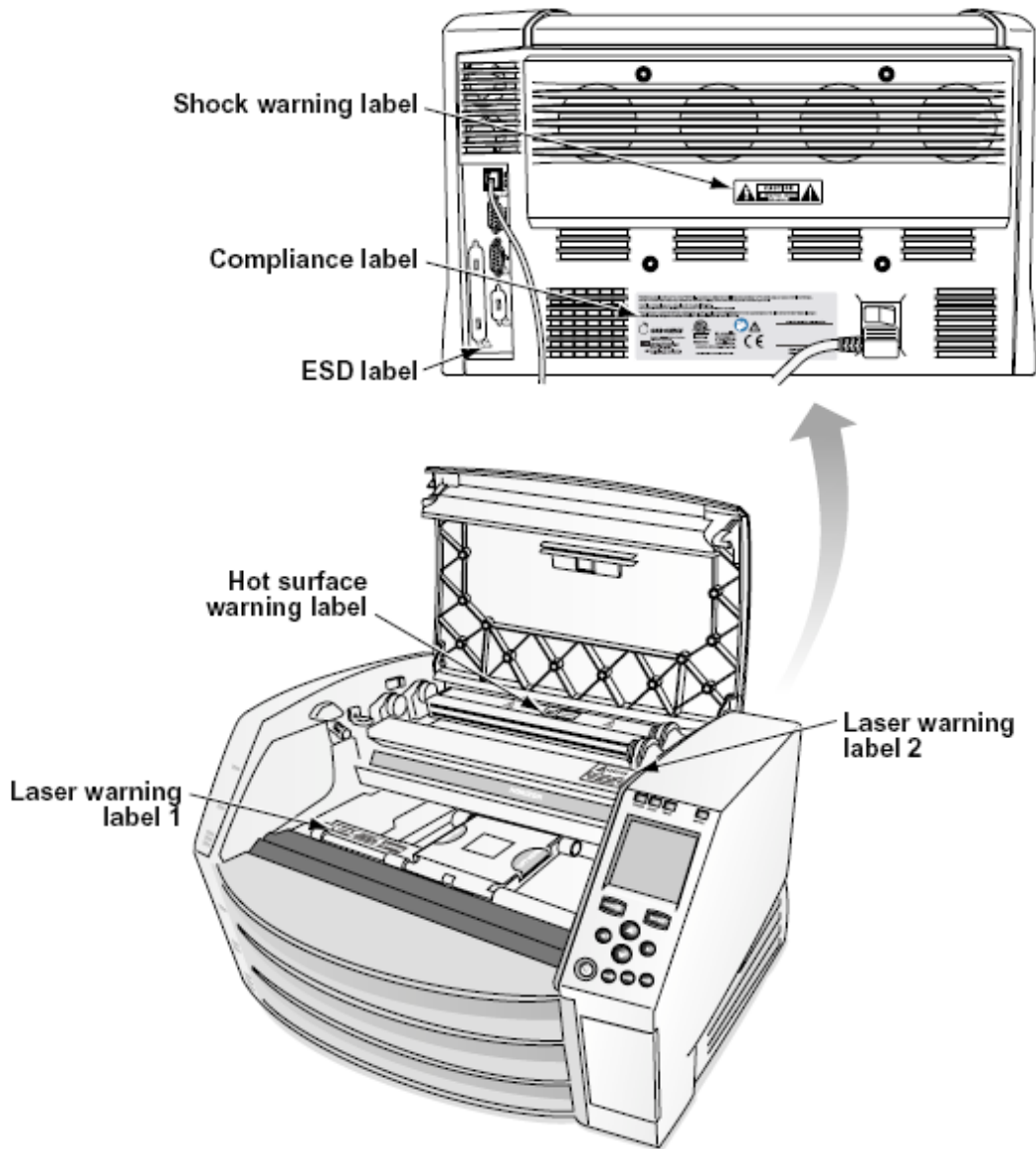

vultaġġ Twissija

Il exclamation punt ġewwa an ekwilaterali trijanglu u persuna qari a manwali simbolu huma maħsuba għal twissija il utent għal il preżenza ta ' importanti joperaw u manutenzjoni (manutenzjoni) istruzzjonijiet fi il letteratura akkumpanjament dan apparat.



LE SERVIZZABBLI MINN UŻU PARTIJET ĠEWWA. REFERENZA SERVIZZ LE KWALIFIKAT SERVIZZ PERSONAL. TNEĦĦIJA OF TIKKETTI, KOPERTURI, JEW KAXXA Qafliet VOIDS IL GARANZIJA.

DAN APPARAT GĦANDU BE ELETTRIKAMENT MALTA.

LE PREVENI NAR JEW XOKK PERIKLU, DO MHUX JESPONU DAN IMMAĠINATUR LE XITA JEW UMDITÀ.

TAGĦMIR MA JINTUŻAX BĦALA KOMPONENT TA 'SISTEMA TA' SOSTENN TAL-ĦAJJA.

Apparat jew sistemi ta 'appoġġ għall-ħajja huma apparat jew sistemi li jsostnu jew isostnu l-ħajja, u li n-nuqqas tagħhom li jwettaq jista' jkun raġonevolment mistenni li jirriżulta f'korriment sinifikanti jew mewt lil persuna. Komponent kritiku huwa kwalunkwe komponent ta 'apparat jew sistema ta' sostenn tal-ħajja li n-nuqqas li twettaq jista' jkun raġonevolment mistenni li jikkawża l-falliment tal-apparat jew tas-sistema ta' appoġġ tal-ħajja, jew li jaffettwa s-sikurezza jew l-effettività tagħha.

TWISSIJA L-ert affidabilità jista' tkun miksuba biss meta il Horizon huwa konnessi għal a reċipjent immarkat "Sptar Biss" (dak huwa, "Sptar Grad").

TWISSIJA Il qawwa korda konnessi għal il Horizon huwa il principali skonnettja għal il sistema.

TWISSIJA Lil skonnettja ġenerali qawwa għal il Horizon qabel għal manutenzjoni dan, qawwa ta' il sistema (irreferi għal "Thaddim Mitfi il Immaġinatur").

TWISSIJA Aġmel mhux immodifika dan equipment mingħajr awtorizzazzjoni ta' il manifattur

TWISSIJA Estern tagħmir maħsuba għal konnessjoni għal sinjal input, sinjal output, jew oħra konnetturi, għandu jikkonformaw ma' relevanti IEC standard (eż., IEC 60950 għal IT tagħmir u il IEC 60601 serje għal mediku tagħmir). Fi Barra minn hekk, kollha tali kombinazzjonijiet - sistemi - għandhom jikkonformaw mal-istandard IEC 60601-1 għal Sistemi ta' Tagħmir Mediku Elettriku.

Tagħmir li ma jikkonformax mal-IEC 60601 għandu jinżamm barra mill-ambjent tal-pazjent, kif definit fl-istandard. Kull persuna li tqabbd tagħmir estern ma' input tas-sinjal, output tas-sinjal, jew konnetturi oħra ffurmat sistema u għalhekk hija responsabbli biex is-sistema tikkonforma mar-rekwiżiti tal-IEC 60601-1-1. Jekk għandek xi dubju, ikkuntattja tekniku kwalifikat jew Codonics Tekniku Appoġġ għal approvat konfigurazzjonijiet.

TWISSIJA Aġmel mhux tmiss a pazjent waqt ukoll aċċess il intern komponenti dak huma taħt il quċċata għata jew jirċievu trejs.

Laser Twissija

Il Horizon immaġinatur użi a laser għal aqra barcode informazzjoni fuq il midja kassetts. Il laser modulu huwa a 650 - 670nm apparat ta' 1.26mW jew anqas. Kif tali dan għandu kien misjuba għal jikkonformaw ma' il 21 CFR 1040.10 u 1040.11 u IEC 60825 laser standards kif a baxx qawwa Klassi 1 apparat.


Għal sigurtà raġunijiet, il laser huwa daru fuq biss għal a qasir hin meta a cassette huwa mdaħħal. Għadu, waħda għandu użu kawtela u qatt ħares fi il laser beam, għandu evita espożizzjoni għal il laser, u għandu qatt override kwalunkwe ta' il interlocks u sigurtà mekkaniżmi. Dawn miżuri huma meħuda għal tiegħek protezzjoni.

TWISSIJA Uża ta' kontrolli jew aġġustamenti għal il prestazzjoni ta' proċeduri oħra minn dawk speċifikat fi dan manwali jista' riżultat fi perikoluż radjazzjoni espożizzjoni.

Il laser aperturi huma immarkat ma' a waħdieni tikketta, murija hawn taħt. Hemm huma tlieta aperturi dak jikkorrispondu għal il tlieta cassette postijiet, waħda għal kull wieħed, fuq il l-istess ġenb ta' il Horizon immaġinatur kif dan tikketta.



Sigurtà interlocks huma immarkat minn il wara tikketta. Huma huma jinsabu fuq il l-istess genb ta' il Horizon immaġinatur kif dan tikketta.

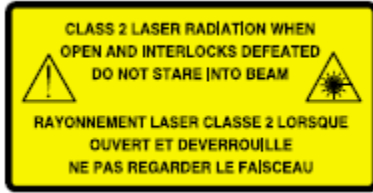

Temperatura Twissija


Minħabba il Horizon imager huwa apparat tal-istampar termali, il-wiċċ tas-sink tas-shana tar-ras tal-istampar termali jiġi. Evita li tmiss direttament kwalunkwe komponent li mhux ikkulurit aħdar meta taċċessa l-intern tal-imager jekk l-imager kien qed jistampa. (Matul xi ħidmiet ta' manutenzjoni preventiva, tkun qed tmiss komponenti interni bi pads tat-tindif jew tampuni.)

Il temperatura twissija tikketta huwa murija hawn taħt.

Konformità

Kodonika huwa fi konformità ma' varji regolamenti.

Il Konformità tikketta, liema huwa imwahaħhal fi il lura ta' il immaġni, huwa murija hawn taħt.

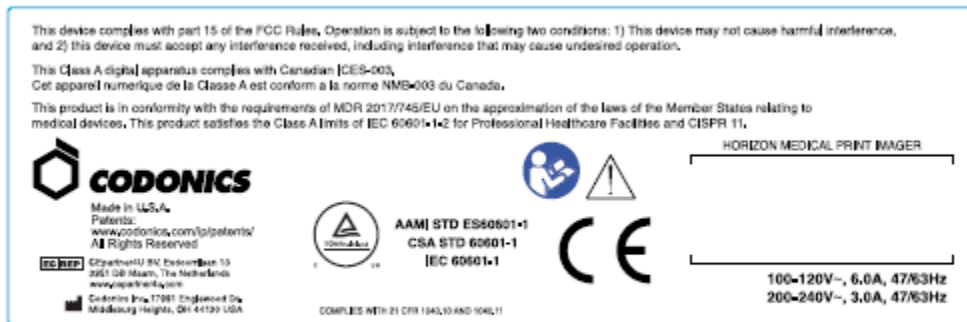


Compliance label

Serjali Numru, Konfigurazzjoni, Data Kodiċi, u Modifika Kodiċijiet


Il Serjali numru tikketta huwa mqiegħda fuq il Konformità tikketta. Huwa tinkludi il wara informazzjoni.

- Il serjali numru (SN), liema unikament jidentifika il unità.
- Il Konfigurazzjoni numru (CNFG), liema dettalji il tibni konfigurazzjoni.
- Il modifiki kodiċi, liema huma għal il dritt ta' il CNFG numru u huma a serje ta' 20 numri. Meta kwalunkwe ta' dawn numri huma imblukkata barra, dak jidentifika a modifika dak kien magħmula għal il unità.
- Il data kodiċi fi SSSS-XX format hawn taħt il fabbrika data kodiċi simbolu.

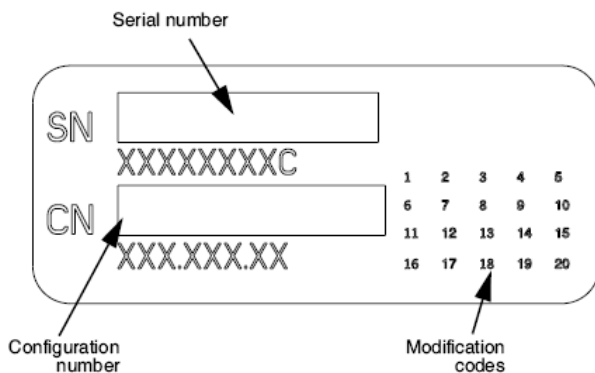

ESD Attenzjoni

Konnessjonijiet għal oħra biċċiet ta' tagħmir huma magħmula fi il fuq wara ta' il Horizon immaġinatur. Dawn konnetturi huma immarkat ma' a prekawzjonarju ESD twissija simbolu, kif murija hawn taht. Aghmel mhux tmiss kwalunkwe ta' il labar ta' dawn konnetturi. Meta jagħmlu konnessjonijiet għal il immaġni, dan huwa l-aħjar lest waqt il immaġinatur huwa imdaħħal fi iżda mhux imħaddem fuq. ESD jista' kawża erratiku imġieba ta' il immaġinatur meta imħaddem fuq. Jekk dan iseħh, qawwa għal il immaġinatur jista' jkollhom għal tkun ċiklata. Huwa huwa irrakkomandat dak kollha persunal involut fi jagħmlu konnessjonijiet għal il immaġinatur tkun konxji ta' dawn ESD prekawzjonijiet.

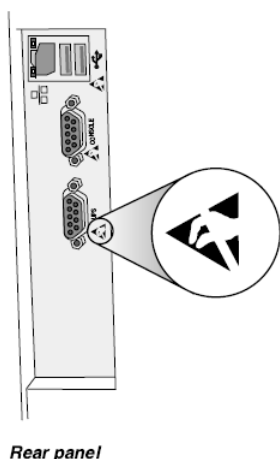

Potenzjal għal Radju Frekwenza Interferenza fuq Immaġinatur Operazzjoni

It-tnejn portabbli u mobbli RF komunikazzjonijiet tagħmir jista' jaffettwaw mediku elettriku tagħmir, inkluż il Horizon immaġinatur. Żomm tali RF komunikazzjonijiet tagħmir barra ta' il immedjat zona.

Potenzjal għal Radju u Televizjoni Interferenza

Il Horizon immaġinatur jiġġenera u użi radju frekwenza energija, u jekk mhux installat u użat kif suppost, dak huwa, fi stretta konformità ma' il manifattur istruzzjonijiet, jista' kawża interferenza għal radju u televizjoni akkoljenza. Huwa għandu kien tip ittestjat u misjub li jikkonforma mal-limiti tal-emissjonijiet tal-Klassi B għal apparat tal-kompjuter skont l-ispeċifikazzjonijiet fis-Subparti J tal-Parti 15 tar-Regoli tal-FCC, li huma mfassla biex jipprovdu protezzjoni raġonevoli kontra tali interferenza meta joperaw f'ambjent kummerċjali. It-tħaddim tat-tagħmir f'żona residenzjali x'aktarx jikkawża interferenza, f'liema każ l-utent, bi spejjeż tiegħu, ikun meħtieġ li jiehu kwalunkwe miżura li tista' tkun xierqa biex tikkoreġi l-interferenza. Jekk l-immaġinatur tiegħek

jikkawża interferenza fir-riċeviment tar-radju jew tat-televizjoni, inti m'hegġeġ tipprova tikkoreġi l-interferenza b'waħda jew aktar mill-miżuri li ġejjin:

- Orjentat mill-ġdid il jirċievi antenna
- Irriloka il immaginatur ma ' rispett għal il riċevitur

Jekk meħtieġ, int għandu ikkonsulta Codonics tekniku appoġġ jew an esperjenza radju / televiżjoni tekniku għal addizzjonali sugġerimenti. Int jista ' sib il wara ktejjeb ippreparat minn il Federali Komunikazzjonijiet Kummissjoni utli: *Kif għal Identifika u Issolvi Radju-TV Interferenza Problemi*. Dan ktejjeb huwa disponibbli minn il U.S. Gvern Stampar Uffiċċju, Washington, D.C. 20402, Stokk Le 004-000-00345-4.

Dan prodott huwa fi konformità ma ' il rekwiżiti ta ' KE Kunsill direttiva MDR 2017/745/UE (CE) fuq il approssimazzjoni ta ' il liġijiet ta ' il Membru Istatu Membri relatati għal mediku apparat. Dan prodott jissodisfa il Klassi A limiti ta ' IEC60601-1-2 u CISPR 11. A dikjarazzjoni ta ' konformità ma ' il rekwiżiti ta ' il Direttiva għandu kien iffirmat minn il Direttur ta ' Operazzjonijiet. Horizon huwa approvat għal esportazzjoni permezz FDA Ċertifikati għal Barranin Gvern u irreġistrat kif a mediku apparat għal importa. A kurrenti lista ta ' pajjiżi huwa disponibbli fuq talba.

Gwida Rigward Elettromanjetiku Emissjonijiet u Immunità

Adattat Ambjenti:

- Horizon huwa maħsuba għal użu fi professjonali kura tas-saħħa faċilità ambjenti, inkluż sptarijiet u mediku kliniċi.
- Horizon għandu mhux kien evalwati għal użu qrib HF kirurġiċi tagħmir. Jekk użu qrib HF kirurġiċi tagħmir huwa mixtieq, il utent huwa responsabbli għal verifika xieraq operazzjoni ta ' il Horizon. Jekk Horizon ma mhux iwettaq sewwa fi dan ambjent, imxi il Horizon iktar 'il bogħod minn il sors ta ' il elettromanjetika disturb.
- Horizon għandu mhux kien evalwati għal użu fi emergenza mediku vetturi.

Kif a appoġġ apparat, Horizon ma mhux jipprovdu essenzjali prestazzjoni.

TWISSIJA Uża ta ' dan tagħmir biswit għal jew f'munzelli ma ' oħra tagħmir għandu tkun evitat għaliex dan setgħet riżultat fi mhux xieraq operazzjoni. Jekk tali użu huwa meħtieġ, dan tagħmir u il oħra tagħmir għandu tkun osservati għal tivverifika dak huma huma joperaw normalment.

TWISSIJA Uża ta ' aċċessorji, transducers u kejbils oħra minn dawk speċifikat jew ipprovdut minn il manifattur ta ' dan tagħmir setgħet riżultat fi żdied elettromanjetika emissjonijiet jew naqas elettromanjetika immunità ta ' dan tagħmir u riżultat fi mhux xieraq operazzjoni.

TWISSIJA Portabbli RF komunikazzjonijiet tagħmir (inkluż periferali tali kif antenna kejbils u esterni antenni) għandu tkun użat le eqreb minn 30 cm (12 pulzieri) għal kwalunkwe parti ta ' il Horizon, tagħha kejbils, jew aċċessorji. Inkella, degradazzjoni ta ' il prestazzjoni ta ' dan tagħmir setgħet riżultat.

Electromagnetic Emissions Standards and Test Levels:

Test / Standard	Compliance Level
RF Emissions	Group 1, Class A
CISPR 11	
RF Emissions	Class A
FCC Part 15	
Conducted Emissions	Group 1, Class A
CISPR 11	
Harmonic Distortion	Class A
IEC 61000-3-2	
Voltage Fluctuations and Flicker	Complies
IEC 61000-3-3	

Electromagnetic Immunity Standards and Test Levels:

Test / Standard	Compliance Level
Electrostatic Discharge	±8kV contact
IEC 61000-4-2	±2kV, ±4kV, ±8kV, ±15kV air

Electromagnetic Immunity Standards and Test Levels: (Continued)

Test / Standard	Compliance Level
Radiated RF Immunity	3 V/m
IEC 61000-4-3	80 MHz - 2.7 GHz 80 % AM at 1 kHz
Proximity fields from RF wireless equipment	Complies
IEC 61000-4-3	
Electrical Fast Transient / Burst	AC Port: ± 2 kV, 100 kHz repetition frequency
IEC 61000-4-4	SIP/SOP Ports: ± 1 kV, 100 kHz repetition frequency
Surge	Line-to-Line: ± 0.5 kV, ± 1.0 kV
IEC 61000-4-5	Line-to-Ground: ± 0.5 kV, ± 1.0 kV, ± 2.0 kV
Conducted Immunity	AC Port and SIP/SOPs:
IEC 61000-4-6	3V, 0.15 MHz - 80 MHz 6V, in ISM bands between 0.15 MHz and 80 MHz 80 % AM at 1 kHz
Magnetic Field Immunity	30 A/m, 50 Hz or 60 Hz
IEC 61000-4-8	
Voltage Dips	0% U_T , 0.5 cycle at 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° and 315°
IEC 61000-4-11	0% U_T , 1 cycle AND 70% U_T , 25/30 cycles, Single phase: at 0°
Voltage Interruptions	0% U_T , 250/300 cycle
IEC 61000-4-11	

Sigurtà Prekawzjonijiet

- Qatt qabbad dan immaginatur għal kwalunkwe iżbokk jew qawwa provvista dak għandu a vultaġġ jew frekwenza differenti minn dak speċifikat fuq il fuq wara ta ' il immaginatur.

- Meta manutenzjoni il immaġni, dejjem qawwa dan mitfi bl-użu il (qawwa) çavetta fi il kontroll bord, imbagħad dawwar il rocker swiçç fi il lura għal il 0 (mitfi) pożizzjoni, imbagħad aqla ' il immaġinatur.
- Ħsara għal il qawwa korda jista ' kawża nar jew xokk periklu. Meta qtugħ il qawwa korda, zomm dan minn il tapp biss u neħhi il tapp b'attenzjoni.
- Jekk il qawwa korda b'żonnijiet għal tkun mibdul, ibdel dan biss ma ' ieħor Codonics qawwa korda manifatturati speçifikament għal tiegħek tal-imager qawwa konfigurazzjoni.
- Jekk il immaġinatur huwa tipjip jew jagħmlu mhux tas-soltu ħsejjes, qawwa mitfi u aqla ' il immaġinatur immedjatement.
- Aghmel mhux daħħal barrani oġġetti ta ' kwalunkwe tip ġo il immaġni; tagħmel hekk jista ' jikkostitwixxu a sigurtà periklu u kawża estensiva ħsara.
- Aghmel mhux post kwalunkwe likwidu kontenituri fuq il immaġinatur. Jekk, għal xi wħud raġuni, likwidu tnixxi ġo il immaġni, qawwa mitfi il immaġinatur u aqla ' il qawwa korda minn il sors iżbokk. Jekk użat mingħajr korrettiv miżuri, il immaġinatur jista ' tkun bil-ħsara.
- Aghmel mhux użu il immaġinatur qrib f'jammabbli gassijiet.
- Ma ' il immaġinatur quçcata għata miftuħa jew il jircievu trejs imneħħija, tmiss biss dawk intern komponenti dak huma ikkulurit aħdar (muri fi il wara figura). Neħhi çrieki, rabtiet, dehbijiet, u oħra oġġetti, u tie lura xagħar, hekk dak huma aghmel mhux jaqgħu ġo jew ġib maqbuda fi il immaġinatur.



Intern Komponenti Dak Huma Kulur Aħdar (imsejjaħ barra fi il illustrazzjoni) Huma Sikur għal Tmiss

Post Prekawzjonijiet

- Il tal-imager joperaw ambjentali temperatura firxa huwa 15–30°C (59–86°F), ma ' a qarib umdità ta ' 10% –80%.
- Jekk il immaġinatur huwa imçaqlaq malajr minn an estremament kiesaħ post għal a aktar šan waħda, kondensazzjoni huwa probabbli għal forma. Aghmel mhux użu il immaġinatur jekk kondensazzjoni għandu iffurmat. Stenna sakemm il kondensazzjoni għandu evaporat. Int jista ' velocità sa il evaporazzjoni ħin minn miexja il immaġinatur għal a nixxiefja lokazzjoni.

- Ventilazzjoni slots u toqob huma ipprovdut fuq il naħat u fuq wara ta ' il immaġinatur. Poġġi il immaġinatur fuq a iebes livell wiċċ u lokalizza dan fi l-inqas 10 ċm (4 pulzjeri) minn hitan għal tiżgura xieraq ventilazzjoni

ATTENZJONI Adegwat ventilazzjoni huwa meħtieġ għal xieraq operazzjoni ta ' il immaġinatur

ATTENZJONI Meta pożizzjonament il Horizon Immaġni, tiżgura hemm huwa adegwat spazju għal aċċess il fuq wara qawwa swiċċ.

- Aġħmel mhux post immaġinatur fi a għoli umdità jew għoli trab zona. Fl-ajru ħmieġ particeċli jista ' kawża immaġni kwalità problemi. Evita tqegħid il immaġinatur fi żoni fejn ventilazzjoni katusi, miftuħa bibien, jew frekwenti passers-by jista ' tesponi il immaġinatur u midja għal għoli livelli ta ' fdalijiet.
- Aġħmel mhux lokalizza il immaġinatur fi hot-molol żoni fejn idroġenu sulfid u aċidużi joni huma probabbli għal tkun iġġenerat.
- Aġħmel mhux lokalizza il immaġinatur fejn hemm huma żejtnija dħaħen u fwar.
- Aġħmel mhux lokalizza il immaġinatur fi dirett dawl tax-xemx.
- Aġħmel mhux lokalizza immaġinatur qrib sorsi ta ' għoli RF enerġija.
- Aġħmel mhux lokalizza il immaġinatur fejn dan jista ' tkun suġġett għal jarring jew vibrazzjonijiet, tali kif a mejda jew skrivanija fi a għolitraffiku zona. Jarring u vibrazzjonijiet jista ' jaffettwaw il jistampa kwalità ta ' immaġini.
- Horizon jissodisfa il elettriku sigurtà limiti ta ' IEC60601-1 u CISPR 11 u huwa adattat għal pazjent kura zona lokazzjoni. Iċċekkja ma ' lokali ordinanzi u installazzjoni linji gwida għal ikkonferma approvat lokazzjoni rekwiziti.

Tindif Prekawzjonijiet

- Ħafna komponenti tal-plastik jintużaw fil-kostruzzjoni tal-immaġinatur. Iċ-ċaqliq u d-deformazzjoni tal-kisja x'aktarx iseħħu jekk l-immaġinatur jintmesaħ b'biċċiet tat-tfarfir kimiċi, benzin, dilwenti, insettiċidi, jew solventi oħra. Materjali tal-gomma u tal-PVC li jithallew f'kuntatt ma ' l-imager għal ħinijiet estiżi jikkawżaw ħsara. Qatt tuża petroleumibbażat soluzzjonijiet jew joborxu tindif.
- Lil nadif il immaġinatur tkopri, l-ewwel qawwa mitfi il immaġinatur bl-użu il (qawwa) ċavetta fi il kontroll bord, imbagħad dawwar il rocker swiċċ fi il lura għal il 0 (mitfi) pożizzjoni, imbagħad aqla ' il immaġinatur. Nadif il għata ma ' a artab drapp kemmxejn niedja ma ' a ħafif sapun u ilma soluzzjoni. Ħalli il għata għal kompletament niexef qabel joperaw il immaġinatur mill-ġdid.

Midja

Għal **ChromaVista**® kulur stampi, il ikkunsmati žigarella fih faksimili ta ' kwalunkwe pazjent immaġini stampati għal **ChromaVista** kulur folji. Għalhekk, int għandu sewwa jiddisponi ta ' jew jeqred ikkunsmati žigarella għal tiżgura il kunfidenzjalità ta ' pazjent immaġini.

Il ottiċi densità ta ' jirriflettu u trasmessiv stampi jkollhom a nominali firxa ta ' : $D_{min} = 0.10$ OD (li jirrifletti), 0.11 OD (trasmessiv) għal $D_{max} = 2.10$ OD (li jirrifletti), 3.1 OD (trasmessiv). Attwali ottiċi densitajiet jista ' ivarjaw ibbażat fuq midja varjazzjonijiet u fuq il strument qed użat għal mizura densità. Għal eżempju, **DirectVista**® Ċara film jista ' jkollhom a inqas D_{min} u D_{max} minn **DirectVista** Blu film.

- Il Horizon imager jinkludi densitometru inkorporat. Id-densitometru inkorporat huwa ddisinjat biex jipproduċi stampi konsistenti billi jikkompensa għall-varjazzjoni minn cassette tal-film għal ieħor u imager għal ieħor. Għal applikazzjonijiet li jeħtieġu kontroll assolut tad-densità massima, ir-riżultati għandhom jiġu kkontrollati kontra densitometru kummerċjali fuq il-bank. Id-densitometru intern jista ' jiġi kkalibrat għal unità tad-deskto. Ara l-*Horizon Immaġinatur Tekniku Manual* għal aktar informazzjoni.
- **DirectVista** midja huwa ottimizzati għal skala tal-griż stampi, waqt **ChromaVista** huwa ottimizzati għal kulur stampi. Jekk **ChromaVista** huwa mhux tagħti int sodisfaċenti riżultati ma

' skala tal-griz stampi, int jista ' trid għal ikkunsidra bl-użu **DirectVista** midja għal daww applikazzjonijiet.

- Midja varjazzjonijiet bejn differenti produzzjoni lottijiet jista ' jipproduċu sottili differenzi fi immaġni kwalità u kulur. Dawn varjazzjonijiet l-aktar spiss isehhu fi kulur zigarelli u huma ikkaratterizzati kif a żgħira kulur lewn fi skala tal-griz immaġini.
- Codonics film midja huwa ddisinjat għal tkun meqjusa bl-użu a daww kaxxa adattat għal wiri mediku dijanjostiku immaġini.
- Codonics karta / bajda film midja huwa ddisinjat għal tkun meqjusa taht kessaħbjad, fluworexxenti daww. Spettrali differenzi u intensità varjazzjonijiet fi il wiri daww sorsi jista ' bidla il apparenti kulur ta ' immaġini stampati fuq karta / bajda film.
- Stampat immaġini dak huma sugġett għal fit-tul espożizzjoni għal daww tax-xemx, ultravjola ħafif, jew estrem saħħan jista ' jiddegradaw fi immaġni kwalità. (Għal eżempju, stampati folji għandu mhux tkun maħżuna fi an karozza fuq a xemxi jum.) Prekawzzjonijiet għandu tkun użat għal evita fit-tul dirett espożizzjoni.

Codonics Karta / Abjad Film Midja

Il termini "Abjad karta " u "Abjad film " huma sinonimu referenzi u użat minflok xulxin fi dan manwali.

Fajl Trasferiment permezz FTP u LPR

- Differenti utenti min jaqsmu a utent isem meta jittrasferixxi fajls għal il immaġinatur jista ' kawża imprevedibbli u żbaljat stampati produzzjoni. Il immaġinatur assoċjati informazzjoni ma ' il utent isem. Kull wieħed utent għandu jkollhom a uniku utent isem meta konnessjoni għal il immaġinatur permezz FTP u LPR.

Kulur Ġestjoni

- Immaġni settings-inkluz gamma, kuntrast, Dmax, saturazzjoni, u MCM TM (Mediku Kulur Matching TM) - huma maħsuba għal tikkumpensa għal differenzi dak jista ' isehhu bejn immaġni akkwist u immaġni stampar. Dawn filtri jippermettu int għal b'mod preċiż jagħmel il finali stampati immaġni. Int għandu użu kura meta applikazzjoni dawn filtri għal evita kumpens żejjed.
- Il Nuqqas Utent Settings sett fi il kontroll panel se potenzjalment jaffettwaw stampi magħmula minn kollha utenti. Uża kawtela meta jinbidlu il default settings.

Immaġni Skalar

- L-iskala ta ' immaġni tiffiltra d-dejta originali tal-immaġni u żżid jew tneħhi informazzjoni, li tista' taffettwa l-eżattezza tal-immaġni stampata finali. L-ammont ta ' informazzjoni miżjud jew imneħhi jvarja wkoll skond il-kobor tal-fattur ta' l-iskala applikat. Dan jista ' jaffettwa wkoll l-eżattezza tal-immaġni stampata finali. Għandek tkun konxju tal-proprietajiet u l-limitazzjonijiet ta ' kull algoritmu ta' skalar u tagħzel l-algoritmu xieraq għall-kompitu.

Hardwer Varjazzjonijiet

- Komponenti użati fl-immaġni jistgħu jvarjaw, u jikkawżaw differenzi fil-kwalità tal-immaġni. Il-proċess termali tal-produzzjoni tal-istampar juża bosta komponenti li huma kkalibrati biex jipprovdu konsistenza bejn l-immaġini. Hemm differenzi sottili bejn immaġini li jistgħu jikkawżaw varjazzjonijiet fl-istampar. Dawn id-differenzi normalment japplikaw għall-kalibrazzjoni tar-ras tal-istampar termali. Fatturi oħra bħall-età, l-użu, is-sħana, l-ilbies mekkaniku, u t-tbaħħir jistgħu jaffettwaw il-kulur u l-kwalità tal-immaġni.
- Il tip ta ' midja użat għal installa softwer aġġornamenti u għal backup immaġinatur konfigurazzjoni settings jiddependi fuq hardwer varjazzjonijiet. Jekk il immaġinatur għandu a inkorporat Zip issuq, installazzjonijiet u backups huma mwettqa bl-użu 100-MB Zip diski. Jekk il immaġinatur ma mhux jkollhom a inkorporat Zip issuq, USB flash drives huma użat ma ' il

USB portijiet fuq il fuq wara panel. Matul dan manwali, Zip diski u USB flash drives huma imsemmi għal kif *installazzjoni midja jew backup midja*, jiddependi fuq il operazzjoni qed mwettqa.

NOTA: Jekk il immaġinatur għandu it-tnejn a Zip issuq u a USB port, dejjem użu il Zip disk għal installa softwer u hliet konfigurazzjoni settings.

Rimi Rekwiziti

Rimi ta ' dan prodott u konsumabbli għandu tkun fi konformità ma ' kollha applikabbli ligijiet u regolamenti fi effett fi il lokalità fi il hin ta ' rimi.

Ewropew Rimi Rekwiziti

Codonics immaġini u elettroniku aċċessorju apparat huma mhux għal tkun mormi jew riċiklat; anzi huma huma għal tkun lura għal il manifattur. Kuntatt Codonics direttament jew minn il rabta ipprovdut għal il l-aktar tard informazzjoni dwar:

- Identifikazzjoni ta ' il speċifiku għall-pajjiż Importatur / Distributur / Produttur
- Prodott ritorn u trattament ta ' tagħna elettroniku prodotti

Manifattur: Codonics Inc.

17991 Englewood Issuq

Middleburg Għoli, OH 44130 L-Istati Uniti

Telefon: +1.440.243.1198

Fax: +1.440.243.1334

E-mail: WEEE@codonics.com

www.codonics.com

Kodonika elettroniku prodotti u aċċessorji li jkollhom il wara simbolu huma suġġett għal Ewropew Direttiva fuq Skart Elettriku u Elettronici Tagħmir (WEEE) 2002/96 / KE, emendat minn Direttiva 2003/108 / KE. Il MT 50419 simbolu tindika separat ġbir u ritorn meħtieġ.



MT 50419 simbolu

Indikazzjonijiet għal Uża

ATTENZJONI Approvat FDA Klassi 2 apparat - Federali ligi jirrestringi dan apparat għal tkun mibjugħa għal użu minn jew fuq il ordni ta ' a tabib.

Il maħsuba użu ta ' il Horizon Serje Imagers hija immaġini b'kopja iebsa b'rizoluzzjoni għolja ta 'materjal ta' sors ta 'immaġni diġitali u permezz tal-konverżjoni ta' sinjali elettronici minn varjetà wiesgħa ta 'outputs diretti / indiretti ta' modalità ta 'immaġni medika. L-output ta 'kopja stampata jinkludi, madankollu mhuwiex limitat għal, radjografija diġitali, medicina nukleari, ultrasound, CT, MRI, CR, u ppjanar ta' Terapija bir-Radjazzjoni. L-immaġini huma adattati għall-użu u r-riferiment tad-dijanjsi tal-immaġni medika. Is-sistema hija maħsuba għall-użu minn radjologisti mediċi, speċjalisti tal-modalità tal-immaġini, u komunikazzjonijiet lil tobba li jirreferu.

Il Horizon Serje Immaġini huma niexef, termali, skala tal-griż (G, GS, GSs, GS-Rad, G1, u G2 mudelli) u skala tal-griż / kulur (Ci, Ci-s, CiRAD, u SF mudelli) dirett termali printer / immaġni.

Il Horizon XL huwa a speċjali mudell żżid 14 x 36fi. u 14 x 51fi. vera daqs "Twil" midja dak permessi diġitali dirett ortopediku applikazzjoni kopja stampata, inkluż dijanjosi u analiżi ta' skoljozi, piż li jkollhom sinsla / ġenbejn / irkoppa, u twil għadam / ġenbejn prostetiku u ortopediku apparat xogħol u kirurġiċi ippjanar. Horizon XL huwa applikabbli għal daqs veru kopja stampata ta' shiħ ġisem CT, MRI, u Anġjografiku u Venuż fluss immaġini proċeduri.

Horizon Immaġini huma 510 (k) ikklerjat għal suq kif FDA Klassi 2 apparat, Regolament numru 892.2040, Klassifikazzjoni Prodott Kodiċi LMC: Horizon Serje Mediku Multimidja Nixxef Immaġini K021054 u Horizon XL Mediku Twila Film Immaġinatur Kopja stampata Multimidja K060440.

Utent Manwal Twissijiet u Prekawzjonijiet

ATTENZJONI Approvat FDA Klassi 2 apparat - Federali liġi jirrestringi dan apparat għal tkun mibjugħa għal użu minn jew fuq il ordni ta' a tabib.

ATTENZJONI Għamla żgur dak il mejda jista' appoġġ il piż ta' il immaġinatur [bejn wieħed u ieħor 66.7 kg (147lbs) ma' jirċievu trejs u tlieta mimli provvista kasetts installat].

TWISSIJA Il immaġinatur huwa tqil. Lil evita korriment, użu żewġ nies għal aqla' u pożizzjoni il immaġinatur.

ATTENZJONI Aghmel mhux grif jew laqam il folja metall. Grif u nicks fi il kantina se ħsara il stampati ġenb ta' ChromaVista folji.

ATTENZJONI Għamla żgur dak il immaġinatur huwa imħaddem mitfi qabel konnessjoni il Ethernet kejbil. Għal informazzjoni madwar thaddim il immaġinatur fuq u mitfi, irreferi għal "Qawwa il Immaġinatur Fuq u Mitfi".

ATTENZJONI Aghmel mhux tmiss kwalunkwe ta' il konnettur labar.

ATTENZJONI Jekk il termali jistampa ras huwa mhux ipparkjat, qawwa fuq il immaġni, imbagħad irrepeti passi 2 u 3 għal sewwa qawwa mitfi il immaġinatur hekk dak dan ma ipparkja.

ATTENZJONI Imbotta il zigarella garr isfel bil-mod. Forzar dan isfel ukoll malajr jista' ħsara il garr.

ATTENZJONI Jekk il immaġinatur huwa imħaddem mitfi bl-użu il QAWWA ċavetta, mhux stampat fil-kju impjiegi huma salvati u se temm stampar darba il immaġinatur huwa imħaddem fuq mill-ġdid (int jista' tnaddaf kollha impjiegi). Madankollu, jekk il immaġinatur huwa imħaddem mitfi bl-użu il rocker swiċċ fi il lura jew qawwa huwa interrott (għal eżempju, an mhux mistenni qawwa falliment), fil-kju impjiegi jista' tkun mitlufa.

TWISSIJA Meta manutenzjoni il immaġni, dejjem qawwa dan mitfi bl-użu il QAWWA ċavetta, dawwar il rocker swiċċ fi il lura għal il 0 (mitfi) pożizzjoni, imbagħad aqla' il immaġinatur.

ATTENZJONI Uża biss Codonics midja. Aghmel mhux użu sempliċi karta, ufficiċju trasparenzi, jew oħra mhux approvat midja kif ħsara, mhux xieraq operazzjoni, jew malfunzjoni jista' riżultat. Għal informazzjoni madwar il approvat Codonics midja tipi u daqsijiet, u kif għal ordni kasetts, irreferi għal "Ordni Midja".

ATTENZJONI Aghmel mhux imla mill-ġdid a cassette. Aghmel mhux tbaġħbis ma' jew neħhi il barcode tikketta. Il cassette's barcode informazzjoni huwa essenzjali għal tiżgura dijanjostiku immaġni kwalità. Jagħmlu kompromess il cassette fi kwalunkwe mod jipperikola il kwalità u affidabilità ta' il immaġinatur.

ATTENZJONI Aghmel mhux neħhi jew daħħal a cassette waqt a folja huwa qed stampat, jew int setgħet jaffettwaw il immaġni kwalità ta' il stampati folja jew kawża a gamm. Dejjem waqfa il immaġinatur l-ewwel.

ATTENZJONI Aghmel mhux nehhi il stampati cassette ghata; dan jipprotegi il midja minn trab u oħra kontaminanti. Dejjem zomm u mahzen il cassette ma ' il miftuħa ġenb sa għal jipprevjenu il folji minn jaqgħu barra.

TWISSIJA Ma ' il immaġinatur ghata miftuħ, tmiss biss dawk intern komponenti dak huma ikkulurit aħdar. Nehhi ċrieki, rabtiet, dehbijiet, u oħra oġġetti, u tie lura xagħar, hekk dak huma aghmel mhux jaqgħu ġo jew ġib maqbuda fi il immaġinatur.

ATTENZJONI Użat zigarella iżomm il negattiv ta ' il kulur immaġini dak kienu stampati bl-użu dak zigarella. Jekk int huma meħtieġ għal tiżgura pazjent kunfidenzjalità u privatezza, il zigarella għandu tkun meqruda.

ATTENZJONI Uża kawtela meta jinbidlu il immaġinatur default settings. Bidliet setgħet jaffettwaw stampi magħmula minn oħra utenti.

ATTENZJONI It-tibdil tas-settings default se jaffettwa stampi magħmula minn utenti oħra. Uża kawtela meta tbiddel is-settings default. Tipikament, huwa aħjar li tispeċifika l-issettjar tal-parametri tal-folja u l-immaġni mill-applikazzjoni DICOM jew l-issettjar tal-istampatur PostScript, jew tuża fajl tal-Impjegi tax-Xogħol li fih il-valuri li għandek bżonn. Għal informazzjoni dwar il-fajls tal-Impjegi tax-Xogħol, irreferi għall-*Horizon Immaġinatur Tekniku Manwal*.

ATTENZJONI Jekk il tal-imager settings kienu mibdula minn il fabbrica nuqqasijiet qabel għal qed mibgħuta (għal eżempju, għal takkomoda a speċjali OEM konfigurazzjoni), issettjar mill-ġdid għal il fabbrica nuqqasijiet se mhux jirrestawraw il "Kif mibgħut " settings. Minflok, huma se tkun irrisettja għal il standard fabbrica default valuri.

ATTENZJONI L-issettjar mill-ġdid tad-difetti tal-fabbrika jaffettwa l-istampi magħmula minn utenti oħra. Uża kawtela meta tbiddel is-settings default. Tipikament, huwa aħjar li tispeċifika l-issettjar tal-parametri tal-folja u l-immaġni mill-applikazzjoni DICOM jew l-issettjar tal-istampatur PostScript, jew tuża fajl tal-Impjegi tax-Xogħol li fih il-valuri li għandek bżonn. Għal informazzjoni dwar il-fajls tal-Impjegi tax-Xogħol, irreferi għall-*Horizon Immaġinatur Tekniku Manwal*.

ATTENZJONI Jinbidlu il tal-imager Nuqqas Midja u Nuqqas Utent Settings setgħet jaffettwaw sussegwenti stampi magħmula minn oħra utenti. Uża kawtela meta jinbidlu default settings.

ATTENZJONI Jinbidlu il tal-imager Nuqqas Midja u Nuqqas Utent Settings setgħet jaffettwaw sussegwenti stampi magħmula minn oħra utenti. Uża kawtela meta jinbidlu default settings.

TWISSIJA Ma ' il immaġinatur ghata miftuħ, tmiss biss dawk intern komponenti dak huma ikkulurit aħdar. Nehhi ċrieki, rabtiet, dehbijiet, u oħra oġġetti, u tie lura xagħar, hekk dak huma aghmel mhux jaqgħu ġo jew ġib maqbuda fi il immaġinatur.

TWISSIJA Il termali jistampa ras jista ' tkun jahraq.

TWISSIJA Meta tindif il jistampa ras, evita il estrem tispicċa ta ' il jistampa ras, liema huma qawwi.

ATTENZJONI Uża biss it-tindif tar-ras tal-istampar imsaħ meta tnaddaf ir-ras tal-istampar termali. Ukoll, tmissx il-wiċċ tal-ħġieg tar-ras tal-istampar termali b'subgħajk; jista ' jagħmel ħsara lir-ras tal-istampar. Biex tevita li tmiss il-wiċċ tal-ħġieg, tista ' tkun trid tilbes ingwanti meta tnaddaf ir-ras tal-istampar termali.

ATTENZJONI Il termali jistampa ras għandu tkun kompletament niexef qabel attentat għal użu il immaġinatur. Tippermetti il termali jistampa ras għal saħħan sa mill-ġdid waqt għadu imxarrab se ħsara il termali jistampa ras.

TWISSIJA Ma ' il immaġinatur ghata miftuħ, tmiss biss dawk intern komponenti dak huma ikkulurit aħdar. Nehhi ċrieki, rabtiet, dehbijiet, u oħra oġġetti, u tie lura xagħar, hekk dak huma aghmel mhux jaqgħu ġo jew ġib maqbuda fi il immaġinatur.

ATTENZJONI Uża biss il platen romblu tindif imsaħ meta tindif il platen. Il platen romblu setgħet tkun bil-ħsara jekk int użu il jistampa ras tindif imsaħ.

TWISSIJA Ma ' il jirċievu trejs imneħħija, tmiss biss dawk intern komponenti dak huma ikkulurit aħdar. Nehhi ċrieki, rabtiet, dehbijiet, u oħra oġġetti, u tie lura xagħar, hekk dak huma aghmel mhux jaqgħu ġo jew ġib maqbuda fi il immaġinatur.

ATTENZJONI Uża biss il platen romblu tindif imsaħ meta tindif il pick tajers. Il tajers setgħet tkun bil-ħsara jekk int użu il jistampa ras tindif imsaħ.

ATTENZJONI Aghmel mhux tmiss il pick tajers (liema jista ' tkun abjad jew aħdar); ġisem żjut minn tiegħek swaba huma iebes għal nehħi u setgħet eventwalment ħsara il tajers.

TWISSIJA Ma ' il jirċievu trejs imneħħija, tmiss biss dawk intern komponenti dak huma ikkulurit aħdar. Nehħi ċrieki, rabtiet, dehbijiet, u oħra oġġetti, u tie lura xagħar, hekk dak huma aghmel mhux jaqgħu ġo jew ġib maqbuda fi il immaginatur.

ATTENZJONI Uża biss tindif tampuni minn a Barcode Qarrej Tindif Kit.

ATTENZJONI Aghmel mhux grif jew laqam il folja metall. Grif u nicks fi il kantina se ħsara il stampati ġenb ta ' ChromaVista folji.

ATTENZJONI Federali liġi jirrestringi dan apparat għal tkun mibjugħa għal użu minn jew fuq il ordni ta ' a tabib.

TWISSIJA Ma ' il quċcata għata miftuħ, tmiss biss dawk intern komponenti dak huma ikkulurit aħdar. Nehħi ċrieki, rabtiet, dehbijiet, u oħra oġġetti, u tie lura xagħar, hekk dak huma aghmel mhux jaqgħu ġo jew ġib maqbuda fi il immaginatur.

ATTENZJONI Aghmel mhux tmiss il pick tajers (liema jista ' tkun abjad jew aħdar); ġisem żjut minn tiegħek swaba huma iebes għal nehħi u setgħet eventwalment ħsara il tajers.

ATTENZJONI Lil evita jagħmlu ħsara intern komponenti, użu kura meta tneħħija a folja minn il midja triq fi il ta 'fuq parti ta ' il immaginatur.

ATTENZJONI Qatt poġġi a folja lura fi il cassette. Trab jew żejt minn tiegħek subgħajk se jaffettwaw il immagni kwalità.

TWISSIJA Ma ' il quċcata għata miftuħ, tmiss biss dawk intern komponenti dak huma ikkulurit aħdar. Nehħi ċrieki, rabtiet, dehbijiet, u oħra oġġetti, u tie lura xagħar, hekk dak huma aghmel mhux jaqgħu ġo jew ġib maqbuda fi il immaginatur.

ATTENZJONI Kun attent mhux għal grif il illustrat folja metall jew ħsara il senser qrib il ta 'fuq gwida talja.

ATTENZJONI Għamla żgur int aghmel mhux fuq dawwar il midja gwida, kif murija hawn taht.

ATTENZJONI Federali liġi jirrestringi dan apparat għal tkun mibjugħa għal użu minn jew fuq il ordni ta ' a tabib.

ATTENZJONI Uża kura meta ġiri il Tnaddaf Stampa Impjiegi funzjoni. Dan funzjoni se tnaddaf oħra utenti jistampa impjiegi kif tajeb kif tiegħek.

ATTENZJONI Kollha fajls ttellgħet bl-użu anonimu FTP huma tinqara minn oħra FTP utenti. DO MHUX ittella ' sensitiv jew klassifikati informazzjoni.

Codonics Horizon Tal-Utent Manwal Addendum GS / G2 / G1 (150C)

Sommarju

Il l-aktar tard verżjonijiet ta ' Horizon® GS / G2 / G1 Immaginatur tutilizza hardwer u softwer dak huwa mhux kompatibbli ma ' precedenti verżjonijiet. Ġdid softwer Verżjoni 4.0.0 huwa mehtieg għal appoġġ dawk bidliet.

Il l-aktar tard verżjonijiet huma identifikati minn il immaginatur serjali numru prefiss **150C**. Jekk jogħġbok kuntatt tiegħek Codonics rappreżentant għal aktar informazzjoni.

NOTA: Horizon Immagini ma ' serjali numru prefiss 150C ma tistax tkun degradat għal kwalunkwe precedenti softwer verżjoni. Immagini ma ' a serjali numru prefiss oħra minn 150C ma tistax jkollhom tagħhom softwer aġġornati għal 4.0.0.

Il operatur istruzzjonijiet għal il Horizon Immaġinatur huma ipprovdut fi il *Horizon Immaġinatur Tal-Utent Manwal*. Dan addendum għata funzjonalità dak huwa uniku għal il l-aktar tard verżjonijiet ta ' il immaġinatur dak ġirja Verżjoni 4.0.0 softwer u jissostitwixxi daww sezzjonijiet fi il ezistenti manwali. Sakemm speċifikat fi dan addendum, għal joperaw il immaġinatur int jista ' segwi il istruzzjonijiet fi il *Horizon Immaġinatur Tal-Utent Manwal*.

Agġornament Sigurtà Tikkettar

Il l-aktar tard verżjonijiet ta ' il immaġinatur jkollhom il wara agġornat sigurtà tikkettar:

- A ġdid temperatura twissija tikketta, murija hawn taħt.



- Pinch-point tikketti flimkien il quċcata ta ' il termali jistampa ras assemblaġġ, murija hawn taħt.



- Minħabba il l-aktar tard verżjonijiet ta ' il immaġinatur le itwal jinkludu a barcode qarrej, laser sigurtà tikketti huma mhux meħtieġ.

Il wara figura turi il postijiet ta ' il sigurtà tikketti fi il l-aktar tard verżjonijiet ta ' il immaġinatur.

Pinch point
warning label

Temperature
warning label



TWISSIJA: Żomm idejn barra ta ' il jistampa ras lift mekkanizmu indikat minn il oqros punt twissija tikketti. Nuqqas għal aghmel hekk setgħet riżultat fi personali korriment.

Midja Appoġġat

Il l-aktar tard verżjonijiet ta ' il immaġinatur aghmel mhux appoġġ **ChromaVista** kulur midja. Biss **DirectVista** skala tal-griż midja huwa appoġġat.

Ftuħ il Fuq Għatti

Il l-aktar tard verżjonijiet ta ' il immaġinatur aghmel mhux awtomatikament miftuħa il quċcata għata meta bl-użu il **Miftuħa Fuq Għatti** menu għazla fuq il Principali Menu fi il quddiem panel. Huwa għandu tkun miftuħa manwalment. Madankollu, qabel manwalment ftuħ il quċcata tkopri, int għandu għadu aghzel il **Miftuħa Fuq Għatti** menu għazla għal tiżgura dak il jistampa ras huwa miġbuda lura. Imbagħad aghfas waħda ta ' il zewġ aħdar rilaxxi murija fi il wara figura għal miftuħa il quċcata għata.



Top cover releases

NOTA: Il quċcata għata huwa mgħobbi bil-molla. Poġġi tiegħek id ħafif fuq il quċcata għata qabel ippressar waħda ta ' il rilaxxi għal jipprevjenu dan minn ftuħ ukoll malajr.



TWISSIJA: Aġmel mhux attentat għal manwalment telfa il quċcata għata magħluq senser dak huwa fuq il dritt ġewwa ħajt ta ' il immaġni, murija fi il wara figura. Tagħmel hekk setgħet riżultat fi personali korriment.

Top cover closed sensor



Midja ID

- Il l-aktar tard verżjonijiet ta ' il immaġinatur appoġġ biss il Midja ID midja awtentikazzjoni sistema. Huma aġmel mhux appoġġ qari IDs minn barcode tikketti fuq il midja cassette għal jawtentika midja.
- B'differenza mill-immaġni preċedenti li kienu jeħtieġu apparat estern biex jitwaħħal mal-immaġinatur, il-Media ID reader huwa intern għall-immaġinatur. L-ID tal-Midja jinstab meta ddaħħal cassette tal-midja. Jekk il-media cassette hija awtentikata b'suċċess, jidher messagġ ta 'konferma fuq il-pannell ta' quddiem.

- Darba il Midja ID huwa aqra, il midja cassette jista ' biss tkun użat ma ' dak immaginatur. Int ma tistax użu il cassette ma ' ieħor immaginatur.

NOTA: Jekk il immaginatur ma mhux jirrikonoxxu il Midja ID fuq a cassette, kuntatt Codonics Tekniku Appogg. Fi il l-aktar tard verżjonijiet ta ' il immagni, midja cassette barcodes ma tistax tkun daħal manwalment fi il quddiem panel.

Ircievi Trej

Il l-aktar tard verżjonijiet ta ' il immaginatur jinkludu biss waħda jircievu trej. Midja miġbud minn kwalunkwe ta ' il provvista slots se tkun mqiegħda fi dan jircievu trej.

Lil neħhi il jircievu trej:

1. Miftuħa il quccata għata. Irreferi għal "Ftuħ il Fuq Qoxra. "
2. Lift il quddiem ta ' il jircievu trej sa.
3. Iġbed il jircievu trej barra bogħod minn il immaginatur.



Stampa Kap Pożizzjonijiet


Il l-aktar tard verżjonijiet ta ' il immaginatur jkollhom żewġ jistampa ras pożizzjonijiet:

- Pożizzjoni tal-garr, li fiha r-ras tal-istampar hija eqreb lejn in-naħa ta 'wara tal-immaginatur. Dan għandu jintuża qabel ma tintbagħat l-immagni biex tiġi evitata ħsara lir-ras tal-istampar jew lill-bearings tal-platen. Għandu jintuża wkoll meta tnaddaf ir-ras tal-istampar jew il-platen, billi l-pożizzjoni tipprowdi aktar spazju bejn dawn il-komponenti biex it-tindif ikun aktar faċli.
- Stampar pożizzjoni, fi liema il jistampa ras huwa pożizzjonat eqreb għal il platen, lest għal stampar.

Jinbidlu il Stampa Kap Pożizzjoni

Lil bidla il jistampa ras pożizzjoni:

1. Jekk immaginatur qawwa huwa fuq, aghzel il **Miftuħa Fuq Għatti** menu għażla għal tiżgura dak il jistampa ras huwa miġbuda lura u imxi fuq għal il li jmiss pass. Jekk immaginatur qawwa huwa mitfi, imxi fuq għal il li jmiss pass.
2. Miftuħa il quccata għata minn ippressar waħda ta ' żewġ aħdar rilaxxi kif murija taħt "Ftuħ il Fuq Qoxra ".
3. Iġbed sa fuq il żewġ rilaxx manki, murija fi il wara figura, u użu il manki għal imbotta il jistampa ras lura għal il trasport bil-baħar pożizzjoni jew quddiem għal il stampar pożizzjoni.

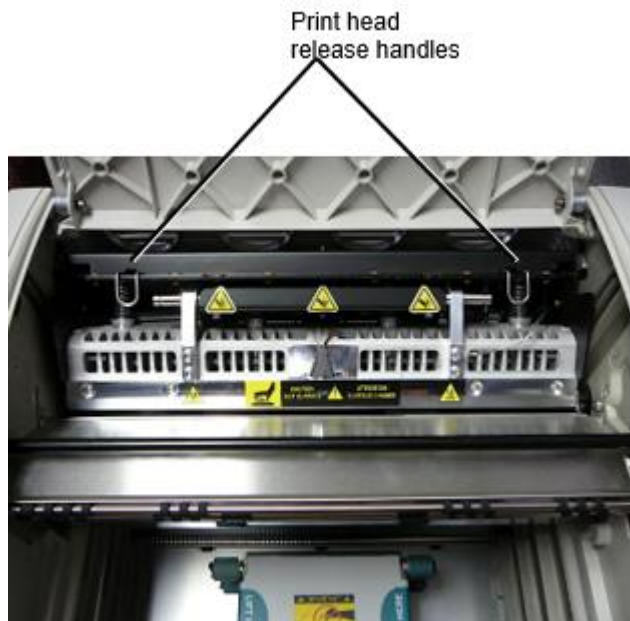

ATTENZIONE: Pożizzjoni il jistampa ras ma ' kura. Aghmel mhux qatra il jistampa ras go il stampar pożizzjoni. Tagħmel hekk setgħet kawża ħsara.

4. Isfel il rilaxx manki għal serratura il jistampa ras go il ġdid pożizzjoni.

Tindif il Stampa Kap

Qabel tindif il jistampa ras, int għandu manwalment imxi dan għal il trasport bil-baħar pożizzjoni. Irreferi għal il proċedura hawn fuq taħt "Jinbidlu il Stampa Kap Pożizzjoni. "

Inkella, int jista ' segwi il proċedura kif deskritt fi "Tindif il Stampa Kap u Nosepiece " fi il *Horizon Immaġinatur Tal-Utent Manwal*.

Il alkoħol koncentrazzjoni ta ' il Stampa Kap tindif kuxxinett huwa 99% IPA.

Tindif il Platen

Qabel tindif il platen, int għandu manwalment imxi il jistampa ras għal il trasport bil-baħar pożizzjoni. Irreferi għal il proċedura hawn fuq taħt "Jinbidlu il Stampa Kap Pożizzjoni. "

Ukoll, l-aħħar verżjonijiet tal-imager ma jappoġġjawx il-ġogging tal-platen mill-pannell ta 'quddiem. Meta tnaddaf il-platen, għandek tuża subgħajk biex manuvra l-platen manwalment sabiex tkun tista 'tnaddaf il-wiċċ kollu tagħha. Kun żgur li tnaddaf iż-żoni fejn tmiss il-platen biex tneħħi kwalunkwe żejt minn subgħajk.

Inkella, int jista ' segwi il proċedura kif deskritt fi "Tindif il Platen u Donatur Gwida Bar " fi il *Horizon Immaġinatur Tal-Utent Manwal*.

Il alkoħol koncentrazzjoni ta ' il Platen tindif kuxxinett huwa 70% IPA.

Kalibrazzjoni Film

Il l-aktar tard verżjonijiet ta ' il immaġinatur aghmel mhux appoġġ intern film kalibrazzjoni. Lil ikkalibra film, int jkollhom għal jistampa a kalibrazzjoni film, użu an esterni densitometru, u daħħal a kalibrazzjoni aġġustament valur.

Lil ikkalibra il film għal a midja cassette:

1. Daħhal il midja cassette.

Jekk il Auto Film Ikkalibra preferenza issettjar huwa sett għal Fuq, a kalibrazzjoni film huwa stampati awtomatikament. (Għal aktar informazzjoni madwar il Auto Film Ikkalibra preferenza issettjar, irreferi għal il *Horizon Immaġinatur Tekniku Manual*.)

Jekk il Auto Film Ikkalibra issettjar huwa sett għal Mitfi, fuq il quddiem panel tinnaviga għal u aghżel il Kalibrazzjoni Stampa menu għażla jikkorrispondi għal il slot fi liema il cassette huwa mdahhal:

Utilitajiet ...

Film Kalibrazzjoni ...

Cassette n...

Kalibrazzjoni Stampa

Il kalibrazzjoni film tinkludi 16 skala tal-griz blokki ma ' a firxa ta ' ottiċi densitajiet. Il kalibrazzjoni film ukoll tinkludi il slot numru għal identifika il cassette għal liema dan jikkorrispondi.

2. Mizura il 16 blokki u identifika il żewġ blokki dak parentesi il mira densità ta ' 1.30 OD.

3. Ikkalkula il "Aġġustat blokka " valur dak kieku tkun meħtieġ għal tikseb 1.30 OD minn applikazzjoni lineari interpolazzjoni bejn il żewġ parentesi blokki " assenjat numri. Għal eżempju:

Blokk 10: OD = 1.29

Blokk 11: OD = 1.36

Blokk valur għal tikseb 1.30 OD = 10.1 jew 10.2

Fuq il quddiem bord, tinnaviga għal il Kalibrazzjoni Valur menu jikkorrispondi għal il cassette slot:

Utilitajiet ...

Film Kalibrazzjoni ...

Cassette n...

Kalibrazzjoni Valur ...

1. Uża il inkrement u tnaqqis ċwieviet fuq il quddiem panel għal daħhal il aġġustat blokka valur minn pass 3.

2. Lil ħlief il dħul, aghfas il Daħhal ċavetta.

NOTA: Darba salvat, dan kalibrazzjoni valur se japplikaw biss għal dan cassette. Ukoll, dan kalibrazzjoni valur se tkun użat irrispettivament ta ' xiex slot dan cassette huwa mdahhal go.

Għażla Mhux għal Ikkalibra a Midja Cassette

Int jista ' aghżel mhux għal ikkalibra a ġdid midja cassette.

Jekk il Auto Film Ikkalibra issettjar huwa sett għal Fuq, a kalibrazzjoni film se tkun stampati minn il cassette:

- Lil kompli ma ' il kalibrazzjoni, daħhal a kalibrazzjoni aġġustat blokka valur, kif deskritt fi il procedura hawn fuq.
- Lil Aqbeż il kalibrazzjoni, aghfas il Nieqaf buttuna għal hu il stampatur lura fuq linja.

Jekk il Auto Film Ikkalibra issettjar huwa sett għal Mitfi, a kalibrazzjoni film se mhux tkun stampati u kalibrazzjoni se mhux tkun mwettqa sakemm int iwettaq il procedura hawn fuq.

Jekk int aghżel mhux għal ikkalibra a midja cassette, il kalibrazzjoni valur minn il l-aħhar ikkalibrat cassette ta ' dak midja tip u daqs se tkun użat, jekk waħda teżisti. Inkella, il default kalibrazzjoni valur


se tkun użat.

Sostituzzjoni il Aghżel Tajers


Il pick tajers fi il l-aktar tard verżjonijiet ta ' il immaginatur jista ' tkun mibdul.

Lil ibdel a pick tajer:

1. Qawwa isfel il immaginatur.
2. Miftuħa il quċcata għata.
3. Sib il żamma klipp dak tiżgura il pick tajer għal il magħżel.
4. Lift sa fuq il tab fuq il quċcata ta ' il klipp (1) u slide il klipp lejn il-ġenb minn (dak huwa, perpendikulari lil) il magħżel (2), kif murija fi il wara figura.

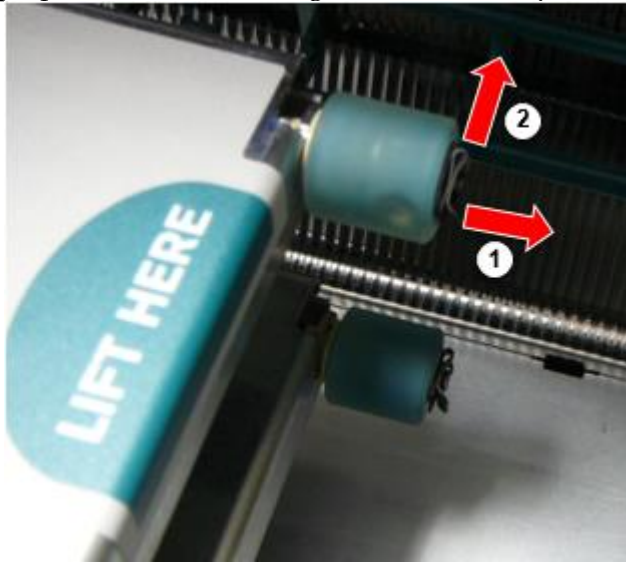

5. Żerżaq il pick tajer mitfi ta ' il magħżel.
6. Fuq il ġdid pick tajer, lokalizza il żewġ talji fuq waħda ġenb ta ' il pick tajer, murija fi il wara figura. Dawn talji tajbin fuq żewġ żgħir labar fuq jew ġenb ta ' il magħżel.

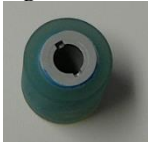

7. Orjentazzjoni il pick tajer ma ' il mdendla ġenb l-ewwel, slide il pick tajer kollha il mod fuq għal il magħżel, jagħmlu żgur int allinja il talji ma ' il magħżel labar.
8. Ma ' il klipp tab tiffaccja bogħod minn il pick tajer, slide il żamma klipp lejn il-ġenb lura fuq il magħżel.
9. Uża a tindif imsaħ ipprovdut ma ' il Platen u Stampa Kap Tindif kit jew uzu il Horizon Tindif Cassette għal nadif il pick tajer ta ' kwalunkwe żejt minn tiegħek swaba.

Clearing a Folja Ġamm

Ma ' il l-aktar tard verżjonijiet ta ' il immaginatur, il folja triq permezz il immaginatur għandu kien simplifikat, peress hemm huwa biss waħda jircievu trej. Oħrajn minn il simplifikat triq, ikklerjar a folja ġamm huwa il l-istess kif ma ' precedenti verżjonijiet ta ' il hardwer.

Issolvi l-problemi

Għall-aħħar verżjonijiet tal-imager, hemm raġuni ġdida għal ġamm tal-folja: Ġamm tal-folja jista ' jseħh jekk ir-ras tal-istampar tkun fil-pożizzjoni tat-tbaħħir meta tkun qed tipprova tipprintja. Biex tikkoreġi din il-problema, neħhi l-folja tiġġammja u mexxi r-ras tal-istampar għall-pożizzjoni tal-istampar (ara "Nibdlu l-Pożizzjoni tar-Ras tal-Istampar").

Manifattura Lokalitajiet

Horizon Immaġini huma manifatturati fi it-tnejn il L-Istati Uniti u Iċ-Ċina. Irreferi għal il prodott tikketta fi il fuq wara ta ' il immaġinatur għal jiddeterminaw il oriġini ta ' tiegħek immaġinatur.
Tekniku Appoġġ

Jekk problemi iseħħu dak huma mhux koperti minn dan Addendum, jekk jogħġbok kuntatt Kodonika Tekniku Appoġġ fi kwalunkwe ħin.

Telefon:+1.440.243.1198

Email:support@codonics.com

Websajt: www.codonics.com