

# Table of Contents

EN - English .....	21
Documentation and Notice.....	21
Overview .....	21
Specifications .....	21
Product Information .....	24
Warnings and Limitations of Use .....	25
Location of Safety and Compliance Labels .....	25
Voltage Warning .....	25
Laser Warning .....	26
Temperature Warning .....	27
Compliance .....	27
Serial Number, Configuration, Date Code, and Modification Codes .....	27
ESD Caution.....	28
Potential for Radio Frequency Interference on Imager Operation.....	28
Potential for Radio and Television Interference .....	28
Guidance Regarding Electromagnetic Emissions and Immunity .....	29
Safety Precautions .....	31
Location Precautions.....	32
Cleaning Precautions.....	33
Media .....	33
Codonics Paper/White Film Media .....	34
File Transfer via FTP and LPR .....	34
Color Management .....	34
Image Scaling .....	34
Hardware Variations .....	34
Disposal Requirements .....	34
European Disposal Requirements.....	34
Indications for Use .....	35
User Manual Warnings and Cautions .....	36

HR - hrvatski jezik.....	249
Dokumentacija i Obavijest .....	249
Pregled .....	249
Tehnički podaci .....	249
Proizvod Informacija .....	252
Upozorenja i Ograničenja od Koristiti .....	253
Mjesto od Sigurnost i Usklađenost Oznake .....	253
napon Upozorenje .....	254
Laser Upozorenje .....	254

Temperatura Upozorenje.....	255
Usklađenost .....	255
Serijski Broj, Konfiguracija, Datum Kodirati, i Izmjena Kodovi.....	255
ESD Oprez.....	256
Potencijal za Radio Frekvencija Smetnje na Imager Operacija .....	256
Potencijal za Radio i Televizija Smetnje .....	256
Smjernice Glede Elektromagnetski Emisije i Imunitet .....	257
Sigurnost Mjere opreza.....	259
Mjesto Mjere opreza.....	260
Čišćenje Mjere opreza.....	261
Mediji .....	261
Codonics Papir / bijela Film Mediji.....	262
Datoteka Prijenos preko FTP i LPR.....	262
Boja Upravljanje.....	262
Slika Skaliranje .....	262
Hardver Varijacije.....	262
Raspolaganje Zahtjevi .....	262
Europskim Raspolaganje Zahtjevi .....	262
Indikacije za Koristiti .....	263
Korisnik Priručnik Upozorenja i Upozorenja .....	264

# Horizon® XL

Multi-media Imager

EN - English

## Documentation and Notice

Codonics Products are Class I products intended for use by Healthcare Professionals.

Products packaging and labeling, including Graphic User Interface (GUI) for operation are offered in English and meet MDR, Annex I, Chapter III, 23.4, taking account the training and the knowledge of the potential user.

\*Web information, Key Specifications, Intended Use, User manual Appendix, Quick Start Guide & Setup IFU are available in simple translation Member State Languages; primary IFU are available in English.

## Overview

The Horizon XL combines diagnostic film, color paper and grayscale paper printing in a versatile medical imager. Horizon XL features exclusive 36" and 51" dry long film ideal for long bone and scoliosis studies. A total CR/DR print solution, Horizon XL will reduce your costs, save you space, and completely eliminate your wet film processing needs. High speed image processing, networking and spooling are all standard.

## Specifications

Print Technology: Dye-diffusion and direct thermal (dry, daylight safe operation)

Spatial Resolution: 320 DPI (12.6 pixels/mm)

Throughput: Up to 100 films per hour

Time To Operate: 5 minutes (ready to print from "off")

Grayscale Contrast Resolution: 12 bits (4096)

Color Resolution: 16.7 million colors

256 levels each of cyan, magenta, and yellow

Media Inputs: Three supply cassettes, 25-100 sheets each, one color ribbon

Media Outputs: Three receive trays, 50-sheet capacity each

Media Sizes: 8" x 10", 14" x 17" (blue and clear) DirectVista® Film

14" x 36", 14" x 51" (blue only) DirectVista® Film

A, A4, 14" x 17" DirectVista Grayscale Paper

A, A4 ChromaVista® Color Paper

Dmax: >3.0 with DirectVista Film

Archival: >20 years with DirectVista Film, under ANSI extended-term storage conditions

Media Supply: All media is pre-packaged and factory sealed

Interfaces: Standard: 10/100 Base-T Ethernet (RJ-45), Serial Diagnostic Port, Serial Console

Network Protocols: Standard: FTP, LPR

Optional: DICOM (up to 24 simultaneous connections), Windows network printing

Image Formats: Standard: TIFF, GIF, PCX, BMP, PGM, PNG, PPM, XWD, JPEG, SGI (RGB), Sun Raster, Targa

Optional: DICOM, PostScript™ compatibility

Image Quality: Automatic calibration using built-in densitometer

Image Control: Gamma, Contrast, Saturation, Medical Color Matching (MCM™), Polarity,

Rotation, Scaling, Antialiasing

Sheet Control: Density Adjustment (Dmax), Look-Up Tables (LUT), Image Warnings, Captions, Sheet Coverage, Border Color, Border Fill, Crop Anchor

Sheet Formatting: 1:1 - 1:81; Variable Multi-Formatting (VMF™), Fixed Multi-Formatting (FMF™)

Control Panel: Large, backlit LCD display, Status lights include Online, Alert, Fault, Active Power and Menu navigation buttons

Processor: Intel

Memory: 512MB RAM

Hard Disk: 80GB (60GB available for spooling)

Removable Disk: 100MB ZIP™ Disk for software upgrades

Smart Card: 72 KB for storing configuration data

Power: Universal Input: 100-120/230V~ 50/60 Hz, 600W printing, 150W idle

Heat Emission: Maximum 600W, 2,050 BTUs/hr. printing, 150W, 512 BTUs/hr. idle

Weight: 66 lbs. (30 kg.)

Engine Dimensions: 14.5" (37 cm) H, 20.5" (52 cm) W, 24" (61 cm) L

Environment: Operating Temperature: 15-30°C, Storage: -22.2 - 50.6°C, Operating Humidity: 10-70% R.H. (non-condensing)

Regulatory: Full medical device compliance including Class 2 FDA and Class I

MDR 2017/745/EU (CE), GMP/QSR, ISO 13485:2016/NS-EN

ISO 13485:2016, Electrical Safety IEC 60601-1 Ed. 3.1 and EMC/EMI:

FCC Class A and IEC 60601-1-2: Ed. 4 for Professional Healthcare Facilities

## Conventions Used in the User Manual


### Bulleted Lists

Bullets are used to display a list of nonprocedural items. For example:

The control panel contains:

- A display panel
- Keys
- Indicators

### Numbered Steps

The  icon indicates the beginning of a procedure. The steps in a procedure are numbered. For example:

1. Press the MENU key.

The Main Menu displays on the control panel. The selector arrow (▶) automatically points to the first menu option.

2. To scroll through the menu options, press the up and down keys.

The selector arrow (▶) moves up and down through the list. The bottom portion of the control panel display shows a message associated with the currently selected menu option.

## Control Panel Navigation

*Menu paths* are used in some procedures instead of documenting every step needed to navigate to a specific menu option. For example:

From the Main Menu, select the following options:

**Default Media**  
**Grayscale**  
**DV Film Blue**

## **Control Panel Keys**

Control panel keys are shown in small black ovals to resemble the actual keys, for example, "Press the **ENTER** key."

## **Control Panel Menu Options**

Control panel menu options are shown in bold type, for example, "Select the **Gamma** menu option."

## **Notes and Tips**

Notes contain additional information related to a topic or procedure. For example:

**NOTE:** If your network is managed by a network administrator or an information technology (IT) department, it would be considered a complex network. You should have the responsible person perform any network-related administrative tasks.

Tips provide additional insights about a topic or procedure (such as, why you may want to do something or a faster way to perform an operation). For example:

***TIP:** Specifying print settings in a multi-user environment*

*If the Horizon imager is accessed by multiple users, it is typically better for individual users to enter print values through the DICOM application interface rather than change the default settings through the control panel.*

## **Cautions and Warnings**

Cautions alert you to actions or situations that could cause harm to equipment or data. For example:

**CAUTION** Any changes you make to the imager default settings will also affect prints made by other users. Use caution when changing default settings.

Warnings alert you to actions or situations that could result in personal injury. For example:

**WARNING** With the imager cover open, touch only those internal components that are colored green.

## **Text Files and Displayed Text**

Monospaced type is used for the contents of an ASCII file or machine text displayed in a terminal command window.

## **User Data**

**Bold monospaced type** is used to indicate specific characters or words that you enter at a host workstation when performing advanced imager operations. *If the type is also italicized*, it indicates variable text. For example:

1. From your workstation, open a UNIX or MS-DOS command window.
2. Enter the command **telnet *hostname*** or **telnet *IP Address*** (using either the Horizon imager hostname or IP Address).
3. At the login prompt, enter the command status.

## Important Information and Filenames

**Bold type** is used for emphasis, command names, and paths or filenames. For example:

- The Horizon imager default settings can be changed both at the control panel and using text files.
- The hostname and IP Address must be added to the ***/etc/hosts*** file.

## New Terms

*Italic type* is used when a term is introduced and defined. For example:

- The Horizon imager has a complete set of *default settings* that contain preconfigured values for every aspect of a printed sheet.

## Purpose and Scope

Refer to this user manual for procedures on how to perform the most common imager operations, including:

- Setting up the imager
- Loading media
- Sending print jobs from DICOM Print Service Classcompliant applications running on imaging devices or image viewing workstation
- Sending print jobs from workstations via PostScript
- Sending print jobs using FTP and LPR
- Changing the imager's default image and sheet settings
- Adjusting the appearance of printed images for user preference
- Performing preventive maintenance
- Performing film calibration
- Troubleshooting common problems

**NOTE:** Some features and functions described here may not apply to older versions of the software.

This User's Manual is intended to be as simple and straightforward as possible for the everyday user. If you need more detailed or more technical information on a feature or topic, or wish to perform more advanced operations, refer to the *Horizon Imager Technical Manual* (Catalog no. HORIZON MNL). The Technical Manual serves as a companion document to this manual

## Product Information

For technical assistance with the Horizon, call Codonics Technical Support at the following number:

**Phone: +1.440.243.1198**

**Toll Free: 800.444.1198 (USA only)**

Technical Support is available anytime. Technical Support is also available online via email and the Codonics web site:

Email: [support@codonics.com](mailto:support@codonics.com)  
Web Site: [www.codonics.com](http://www.codonics.com)

General product information can also be requested by sending email to:


Email: [info@codonics.com](mailto:info@codonics.com)

Please include your postal mailing address and telephone number in the email message. Basic product information is returned via email unless otherwise requested.

## Warnings and Limitations of Use

### Location of Safety and Compliance Labels

The following figure shows the locations of the imager's safety and compliance labels.

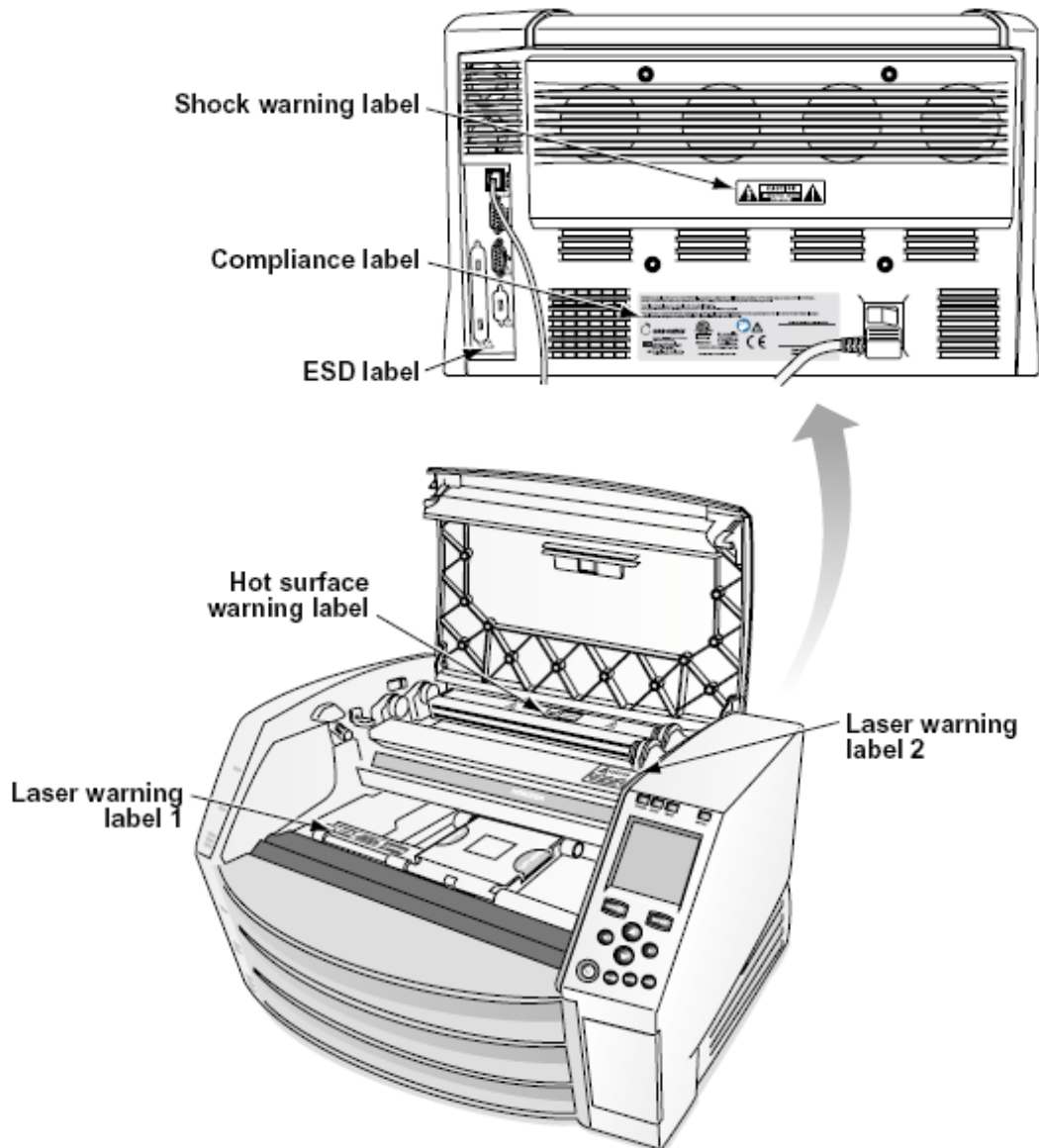

### Voltage Warning



The exclamation point within an equilateral triangle and person reading a manual symbol are intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying this device.



NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL. REMOVAL OF LABELS, COVERS, OR ENCASUREMENT FASTENERS VOIDS THE WARRANTY.

THIS APPARATUS MUST BE ELECTRICALLY GROUNDED.

TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS IMAGER TO RAIN OR MOISTURE.

EQUIPMENT IS NOT TO BE USED AS A COMPONENT OF A LIFE SUPPORT SYSTEM. Life support devices or systems are devices or systems that support or sustain life, and whose failure to perform can be reasonably expected to result in a significant injury or death to a person. A critical component is any component of a life support device or system whose failure to perform can be reasonably expected to cause the failure of the life support device or system, or to affect its safety or effectiveness.

**WARNING** Grounding reliability can be achieved only when the Horizon is connected to a receptacle marked "Hospital Only" (that is, "Hospital Grade").

**WARNING** The power cord connected to the Horizon is the main disconnect for the system.

**WARNING** To disconnect overall power to the Horizon prior to servicing it, power of the system.

**WARNING** Do not modify this equipment without authorization of the manufacturer

**WARNING** External equipment intended for connection to signal input, signal output, or other connectors, shall comply with relevant IEC standard (e.g., IEC 60950 for IT equipment and the IEC 60601 series for medical equipment). In addition, all such combinations - systems - shall comply with the IEC 60601-1 standard for Medical Electrical Equipment Systems. Equipment not complying to IEC 60601 shall be kept outside the patient environment, as defined in the standard. Any person who connects external equipment to signal input, signal output, or other connectors has formed a system and is therefore responsible for the system to comply with the requirements of IEC 60601-1-1. If in doubt, contact a qualified technician or Codonics Technical Support for approved configurations.

**WARNING** Do not touch a patient while also accessing the internal components that are under the top cover or receive trays.

#### Laser Warning

The Horizon imager uses a laser to read barcode information on the media cassettes. The laser module is a 650 – 670nm device of 1.26 mW or less. As such it has been found to comply with the 21 CFR 1040.10 and 1040.11 and IEC 60825 laser standards as a low power Class 1 device.


For safety reasons, the laser is turned on only for a short time when a cassette is inserted. Still, one should use caution and never stare at the laser beam, should avoid exposure to the laser, and should never override any of the interlocks and safety mechanisms. These measures are taken for your protection.

**WARNING** Use of controls or adjustments to the performance of procedures other than those specified in this manual may result in hazardous radiation exposure.

The laser apertures are marked with a single label, shown below. There are three apertures that correspond to the three cassette locations, one for each, on the same side of the Horizon imager as this label.



Safety interlocks are marked by the following label. They are located on the same side of the Horizon imager as this label.

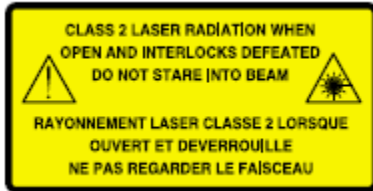

### Temperature Warning


Because the Horizon imager is a thermal print device, the surface of the thermal print head heat sink gets hot. Avoid directly touching any components not colored green when accessing the interior of the imager if the imager has been printing. (During some preventative maintenance tasks, you will be touching internal components with cleaning pads or swabs.)

The temperature warning label is shown below.

### Compliance

Codonics is in compliance with various regulations.

The Compliance label, which is affixed at the back of the imager, is shown below.

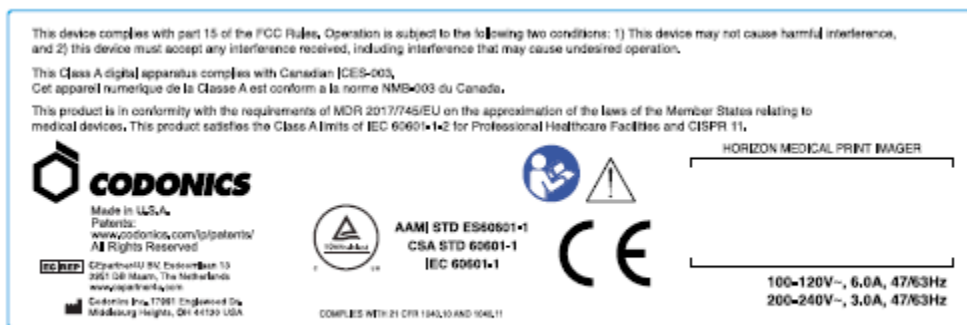

### Compliance label


### Serial Number, Configuration, Date Code, and Modification Codes

The Serial number label is placed onto the Compliance label. It includes the following information.

The serial number (SN), which uniquely identifies the unit.


The Configuration number (CNFG), which details the build configuration.

The modifications codes, which are to the right of the CNFG number and are a series of 20 numbers. When any of these numbers are blocked out, that identifies a modification that was made to the unit. The date code in YYYY-MM format below the factory date code symbol.

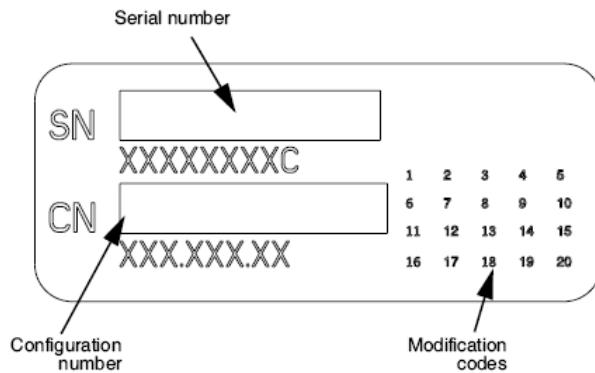

### ESD Caution

Connections to other pieces of equipment are made at the rear of the Horizon imager. These connectors are marked with a precautionary ESD warning symbol, as shown below. Do not touch any of the pins of these connectors. When making connections to the imager, it is best done while the imager is plugged in but not powered on. ESD may cause erratic behavior of the imager when powered on. Should this occur, power to the imager may have to be cycled. It is recommended that all staff involved in making connections to the imager be aware of these ESD precautions.

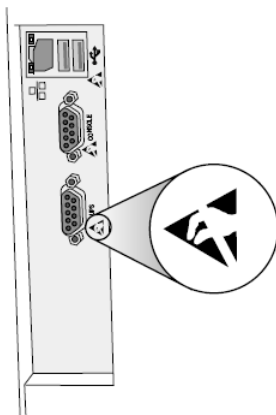

Rear panel

### Potential for Radio Frequency Interference on Imager Operation

Both portable and mobile RF communications equipment can affect medical electrical equipment, including the Horizon imager. Keep such RF communications equipment out of the immediate area.

### Potential for Radio and Television Interference

The Horizon imager generates and uses radio frequency energy, and if not installed and used properly, that is, in strict accordance with the manufacturer's instructions, may cause interference to radio and television reception. It has been type tested and found to comply with Class B emission limits for a computing device in accordance with the specifications in Subpart J of Part 15 of FCC Rules, which are designed to provide reasonable protection against such interference when operating in a commercial environment. Operation of the equipment in a residential area is likely to cause interference, in which case the user, at his own expense, will be required to take whatever

measures may be appropriate to correct the interference. If your imager does cause interference to radio or television reception, you are encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna
- Relocate the imager with respect to the receiver

If necessary, you should consult Codonics technical support or an experienced radio/television technician for additional suggestions. You may find the following booklet prepared by the Federal Communications Commission helpful: *How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems*. This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 20402, Stock No. 004-000-00345-4.

This product is in conformity with the requirements of EC Council directive MDR 2017/745/EU (CE) on the approximation of the laws of the Member States relating to medical devices. This product satisfies the Class A limits of IEC60601-1-2 and CISPR 11. A declaration of conformity with the requirements of the Directive has been signed by the Director of Operations. Horizon is approved for export via FDA Certificates to Foreign Government and registered as a medical device for import. A current list of countries is available on request.

#### Guidance Regarding Electromagnetic Emissions and Immunity

##### Suitable Environments:

- Horizon is intended for use in professional healthcare facility environments, including hospitals and medical clinics.
- Horizon has not been evaluated for use near HF surgical equipment. If use near HF surgical equipment is desired, the user is responsible for verifying proper operation of the Horizon. If Horizon does not perform correctly in this environment, move the Horizon farther from the source of the electromagnetic disturbance.
- Horizon has not been evaluated for use in emergency medical vehicles.

As a support device, Horizon does not provide essential performance.

**WARNING** Use of this equipment adjacent to or stacked with other equipment should be avoided because it could result in improper operation. If such use is necessary, this equipment and the other equipment should be observed to verify that they are operating normally.

**WARNING** Use of accessories, transducers and cables other than those specified or provided by the manufacturer of this equipment could result in increased electromagnetic emissions or decreased electromagnetic immunity of this equipment and result in improper operation.

**WARNING** Portable RF communications equipment (including peripherals such as antenna cables and external antennas) should be used no closer than 30 cm (12 inches) to any part of the Horizon, its cables, or accessories. Otherwise, degradation of the performance of this equipment could result.

### Electromagnetic Emissions Standards and Test Levels:

<b>Test / Standard</b>	<b>Compliance Level</b>
<b>RF Emissions</b> CISPR 11	Group 1, Class A
<b>RF Emissions</b> FCC Part 15	Class A
<b>Conducted Emissions</b> CISPR 11	Group 1, Class A
<b>Harmonic Distortion</b> IEC 61000-3-2	Class A
<b>Voltage Fluctuations and Flicker</b> IEC 61000-3-3	Complies

### Electromagnetic Immunity Standards and Test Levels:

<b>Test / Standard</b>	<b>Compliance Level</b>
<b>Electrostatic Discharge</b> IEC 61000-4-2	±8kV contact ±2kV, ±4kV, ±8kV, ±15kV air

## Electromagnetic Immunity Standards and Test Levels: (Continued)

Test / Standard	Compliance Level
<b>Radiated RF Immunity</b>	3 V/m
IEC 61000-4-3	80 MHz - 2.7 GHz 80 % AM at 1 kHz
<b>Proximity fields from RF wireless equipment</b>	Complies
IEC 61000-4-3	
<b>Electrical Fast Transient / Burst</b>	AC Port: $\pm 2$ kV, 100 kHz repetition frequency
IEC 61000-4-4	SIP/SOP Ports: $\pm 1$ kV, 100 kHz repetition frequency
<b>Surge</b>	Line-to-Line: $\pm 0.5$ kV, $\pm 1.0$ kV
IEC 61000-4-5	Line-to-Ground: $\pm 0.5$ kV, $\pm 1.0$ kV, $\pm 2.0$ kV
<b>Conducted Immunity</b>	AC Port and SIP/SOPs:
IEC 61000-4-6	3V, 0.15 MHz - 80 MHz 6V, in ISM bands between 0.15 MHz and 80 MHz 80 % AM at 1 kHz
<b>Magnetic Field Immunity</b>	30 A/m, 50 Hz or 60 Hz
IEC 61000-4-8	
<b>Voltage Dips</b>	0% $U_T$ , 0.5 cycle at 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° and 315°
IEC 61000-4-11	0% $U_T$ , 1 cycle AND 70% $U_T$ , 25/30 cycles, Single phase: at 0°
<b>Voltage Interruptions</b>	0% $U_T$ , 250/300 cycle
IEC 61000-4-11	

### Safety Precautions

- Never connect this imager to any outlet or power supply that has a voltage or frequency different than that specified on the rear of the imager.
- When servicing the imager, always power it off using the (power) key at the control panel, then turn the rocker switch in the back to the 0 (off) position, then unplug the imager.

- Damage to the power cord may cause fire or shock hazard. When unplugging the power cord, hold it by the plug only and remove the plug carefully.
- If the power cord needs to be replaced, replace it only with another Codonics power cord manufactured specifically for your imager's power configuration.
- If the imager is smoking or making unusual sounds, power off and unplug the imager immediately.
- Do not insert foreign objects of any kind into the imager; doing so can constitute a safety hazard and cause extensive damage.
- Do not place any liquid containers on the imager. If, for some reason, liquid seeps into the imager, power off the imager and unplug the power cord from the source outlet. If used without corrective measures, the imager may be damaged.
- Do not use the imager near flammable gases.
- With the imager top cover open or the receive trays removed, touch only those internal components that are colored green (shown in the following figure). Remove rings, ties, jewelry, and other items, and tie back hair, so that they do not fall into or get caught in the imager.



***Internal Components That Are Colored Green (called out in the illustration) Are Safe to Touch***

#### Location Precautions

- The imager's operating ambient temperature range is 15–30°C (59–86°F), with a relative humidity of 10%–80%.
- If the imager is moved quickly from an extremely cold place to a warmer one, condensation is likely to form. Do not use the imager if condensation has formed. Wait until the condensation has evaporated. You can speed up the evaporation time by moving the imager to a dryer location.
- Ventilation slots and holes are provided on the sides and rear of the imager. Place the imager on a hard level surface and locate it at least 10 cm (4 in.) from walls to ensure proper ventilation

**CAUTION** Adequate ventilation is required for proper operation of the imager

**CAUTION** When positioning the Horizon Imager, ensure there is adequate space to access the rear power switch.

- Do not place imager in a high humidity or high dust area. Airborne dirt particles can cause image quality problems. Avoid placing the imager in areas where ventilation ducts, open doors, or frequent passers-by might expose the imager and media to high levels of debris.
- Do not locate the imager in hot-springs areas where hydrogen sulfide and acidic ions are likely to be generated.
- Do not locate the imager where there are oily fumes and vapors.
- Do not locate the imager in direct sunlight.
- Do not locate imager near sources of high RF energy.
- Do not locate the imager where it might be subject to jarring or vibrations, such as a table or desk in a high-traffic area. Jarring and vibrations can affect the print quality of images.
- Horizon satisfies the electrical safety limits of IEC60601-1 and CISPR 11 and is suitable for patient care area location. Check with local ordinances and installation guidelines to confirm approved location requirements.

#### Cleaning Precautions

- Many plastic components are used in the imager's construction. Coat flecking and deformation is likely to occur if the imager is wiped with chemical dusters, benzene, thinners, insecticides, or other solvents. Rubber and PVC materials left in contact with the imager for extended times will cause damage. Never use petroleum-based solutions or abrasive cleaners.
- To clean the imager cover, first power off the imager using the (power) key at the control panel, then turn the rocker switch in the back to the 0 (off) position, then unplug the imager. Clean the cover with a soft cloth slightly moistened with a mild soap and water solution. Allow the cover to completely dry before operating the imager again.

#### Media

For **ChromaVista**<sup>®</sup> color prints, the consumed ribbon contains facsimiles of any patient images printed to **ChromaVista** color sheets. Therefore, you must properly dispose of or destroy consumed ribbon to ensure the confidentiality of patient images.

The optical density of reflective and transmissive prints have a nominal range of: D<sub>min</sub> = 0.10 OD (reflective), 0.11 OD (transmissive) to D<sub>max</sub> = 2.10 OD (reflective), 3.1 OD (transmissive). Actual optical densities may vary based on media variations and on the instrument being used to measure density. For example, **DirectVista**<sup>®</sup> Clear film may have a lower D<sub>min</sub> and D<sub>max</sub> than **DirectVista** Blue film.

- The Horizon imager includes a built-in densitometer. The built-in densitometer is designed to produce consistent prints by compensating for variation from one film cassette to another and one imager to another. For applications that require absolute control of the maximum density, the results should be checked against a bench-top commercial densitometer. The internal densitometer can be calibrated to a desktop unit. See the *Horizon Imager Technical Manual* for more information.
- **DirectVista** media is optimized for grayscale prints, while **ChromaVista** is optimized for color prints. If **ChromaVista** is not giving you satisfactory results with grayscale images, you may want to consider using **DirectVista** media for those applications.
- Media variations between different production lots may produce subtle differences in image quality and color. These variations most often occur in color ribbons and are characterized as a slight color hue in grayscale images.
- Codonics film media is designed to be viewed using a light box suitable for viewing medical diagnostic images.
- Codonics paper/white film media is designed to be viewed under coolwhite, fluorescent light. Spectral differences and intensity variations in the viewing light sources can change the apparent color of images printed on paper/white film.



- Printed images that are subject to prolonged exposure to sunlight, ultraviolet light, or extreme heat may degrade in image quality. (For example, printed sheets should not be stored in an automobile on a sunny day.) Precautions should be used to avoid prolonged direct exposure.

#### Codronics Paper/White Film Media

The terms “white paper” and “white film” are synonymous references and used interchangeably in this manual.

#### File Transfer via FTP and LPR

- Different users who share a user name when transferring files to the imager may cause unpredictable and erroneous printed output. The imager associates information with the user name. Each user should have a unique user name when connecting to the imager via FTP and LPR.

#### Color Management

- Image settings—including gamma, contrast, Dmax, saturation, and MCM™ (Medical Color Matching™)—are intended to compensate for differences that may occur between image acquisition and image printing. These filters allow you to accurately render the final printed image. You should use care when applying these filters to avoid over compensation.
- The Default User Settings set at the control panel will potentially affect prints made by all users. Use caution when changing the default settings.

#### Image Scaling

- Scaling an image will filter the original image data and add or remove information, which may affect the accuracy of the final printed image. The amount of information added or removed will also vary with the magnitude of the scale factor applied. This can also affect the accuracy of the final printed image. You should be aware of the properties and limitations of each scaling algorithm and select the appropriate algorithm for the task.

#### Hardware Variations

- Components used in the imager may vary, causing differences in image quality. The thermal process of producing a print utilizes many components that are calibrated to provide consistency between imagers. There are subtle differences between imagers that can cause print variations. These differences usually apply to thermal print head calibration. Other factors such as age, usage, heat, mechanical wear, and shipping can affect image color and quality.
- The type of media used to install software updates and to backup imager configuration settings depends on hardware variations. If the imager has a built-in Zip drive, installations and backups are performed using 100-MB Zip disks. If the imager does not have a built-in Zip drive, USB flash drives are used with the USB ports on the rear panel. Throughout this manual, Zip disks and USB flash drives are referred to as *installation media* or *backup media*, depending on the operation being performed.

**NOTE:** If the imager has both a Zip drive and a USB port, always use the Zip disk to install software and save configuration settings.

#### Disposal Requirements

Disposal of this product and consumables shall be in accordance with all applicable laws and regulations in effect at the locality at the time of disposal.

#### European Disposal Requirements

Codonics imagers and electronic accessory devices are not to be discarded or recycled; rather they are to be returned to the manufacturer. Contact Codonics directly or by the link provided for the latest information concerning:

- Identification of the country-specific Importer/Distributor/Producer
- Product return and treatment of our electronic products

Manufacturer: Codonics Inc.

17991 Englewood Drive

Middleburg Heights, OH 44130 USA

Phone: +1.440.243.1198

Fax: +1.440.243.1334

E-mail: [WEEE@codonics.com](mailto:WEEE@codonics.com)

[www.codonics.com](http://www.codonics.com)

Codonics electronic products and accessories bearing the following symbol are subject to European Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) 2002/96/EC, amended by Directive 2003/108/EC. The EN 50419 symbol indicates separate collection and return required.



*EN 50419 symbol*

#### Indications for Use

**CAUTION** Approved FDA Class 2 device - Federal law restricts this device to be sold for use by or on the order of a physician.

The intended use of the Horizon Series Imagers is high-resolution hardcopy imaging of digital image source material and through the conversion of electronic signals from a wide variety of direct/indirect medical imaging modality outputs. The hardcopy output includes, however is not limited to, digital radiography, nuclear medicine, ultrasound, CT, MRI, CR, and Radiation Therapy planning. Images are suitable for medical image diagnosis use and referral. The system is intended for use by medical radiologists, imaging modality specialists, and communications to referring physicians.

The Horizon Series Imagers are dry, thermal, grayscale (G, GS,GSs,GS-Rad, G1, and G2 models) and grayscale/color (Ci, Ci-s, CiRAD, and SF models) direct thermal printer/imagers.

The Horizon XL is a special model adding 14 x 36in. and 14 x 51in. true size "long" media that permits digital direct orthopedic application hardcopy, including diagnosis and analysis of scoliosis, weight bearing spine/hip/knee, and long bone/hip prosthetic and orthopedic appliances work-up and surgical planning. Horizon XL is applicable to true-size hardcopy of whole body CT, MRI, and Angiographic and Venous flow imaging procedures.

Horizon Imagers are 510(k) cleared to market as FDA Class 2 devices, Regulation number 892.2040, Classification Product Code LMC: Horizon Series Medical Multimedia Dry Imagers K021054 and Horizon XL Medical Long Film Imager Hardcopy Multimedia K060440.

**CAUTION** Approved FDA Class 2 device - Federal law restricts this device to be sold for use by or on the order of a physician.

**CAUTION** Make sure that the table can support the weight of the imager [approximately 66.7 kg (147 lbs) with receive trays and three full supply cassettes installed].

**WARNING** The imager is heavy. To avoid injury, use two people to unpack and position the imager.

**CAUTION** Do not scratch or nick the sheet metal. Scratches and nicks in the basement will damage the printed side of ChromaVista sheets.

**CAUTION** Make sure that the imager is powered off before connecting the Ethernet cable. For information about powering the imager on and off, refer to "Powering the Imager On and Off".

**CAUTION** Do not touch any of the connector pins.

**CAUTION** If the thermal print head is not parked, power on the imager, then repeat steps 2 and 3 to properly power off the imager so that it does park.

**CAUTION** Push the ribbon carriage down slowly. Forcing it down too quickly may damage the carriage.

**CAUTION** If the imager is powered off using the POWER key, unprinted queued jobs are saved and will finish printing once the imager is powered on again (you can purge all jobs). However, if the imager is powered off using the rocker switch in the back or power is interrupted (for example, an unexpected power failure), queued jobs may be lost.

**WARNING** When servicing the imager, always power it off using the POWER key, turn the rocker switch in the back to the 0 (off) position, then unplug the imager.

**CAUTION** Use only Codonics media. Do not use plain paper, office transparencies, or other unapproved media as damage, improper operation, or malfunction may result. For information about the approved Codonics media types and sizes, and how to order cassettes, refer to "Ordering Media".

**CAUTION** Do not refill a cassette. Do not tamper with or remove the barcode label. The cassette's barcode information is essential for ensuring diagnostic image quality. Compromising the cassette in any way jeopardizes the quality and reliability of the imager.

**CAUTION** Do not remove or insert a cassette while a sheet is being printed, or you could affect the image quality of the printed sheet or cause a jam. Always pause the imager first.

**CAUTION** Do not remove the printed cassette cover; it protects the media from dust and other contaminants. Always hold and store the cassette with the open side up to prevent the sheets from falling out.

**WARNING** With the imager cover open, touch only those internal components that are colored green. Remove rings, ties, jewelry, and other items, and tie back hair, so that they do not fall into or get caught in the imager.

**CAUTION** Used ribbon retains the negative of the color images that were printed using that ribbon. If you are required to ensure patient confidentiality and privacy, the ribbon should be destroyed.

**CAUTION** Use caution when changing the imager default settings. Changes could affect prints made by other users.

**CAUTION** Changing the default settings will affect prints made by other users. Use caution when changing default settings. Typically, it is better to specify sheet and image parameter settings from the DICOM application or a PostScript printer's settings, or use a Job Settings file that contains the values you need. For information about Job Settings files, refer to the *Horizon Imager Technical Manual*.

**CAUTION** If the imager's settings were changed from the factory defaults prior to being shipped (for example, to accommodate a special OEM configuration), resetting to the factory defaults will not restore the "as shipped" settings. Instead, they will be reset to the standard factory default values.

**CAUTION** Resetting to the factory defaults will affect prints made by other users. Use caution when changing default settings. Typically, it is better to specify sheet and image parameter settings from the

DICOM application or a PostScript printer's settings, or use a Job Settings file that contains the values you need. For information about Job Settings files, refer to the *Horizon Imager Technical Manual*.

**CAUTION** Changing the imager's Default Media and Default User Settings could affect subsequent prints made by other users. Use caution when changing default settings.

**CAUTION** Changing the imager's Default Media and Default User Settings could affect subsequent prints made by other users. Use caution when changing default settings.

**WARNING** With the imager cover open, touch only those internal components that are colored green. Remove rings, ties, jewelry, and other items, and tie back hair, so that they do not fall into or get caught in the imager.

**WARNING** The thermal print head may be hot.

**WARNING** When cleaning the print head, avoid the extreme ends of the print head, which are sharp.

**CAUTION** Use only the print head cleaning wipe when cleaning the thermal print head. Also, do not touch the glass surface of the thermal print head with your fingers; it could damage the print head. To avoid touching the glass surface, you may want to wear gloves when cleaning the thermal print head.

**CAUTION** The thermal print head must be completely dry before attempting to use the imager.

Allowing the thermal print head to heat up again while still wet will damage the thermal print head.

**WARNING** With the imager cover open, touch only those internal components that are colored green. Remove rings, ties, jewelry, and other items, and tie back hair, so that they do not fall into or get caught in the imager.

**CAUTION** Use only the platen roller cleaning wipe when cleaning the platen. The platen roller could be damaged if you use the print head cleaning wipe.

**WARNING** With the receive trays removed, touch only those internal components that are colored green. Remove rings, ties, jewelry, and other items, and tie back hair, so that they do not fall into or get caught in the imager.

**CAUTION** Use only the platen roller cleaning wipe when cleaning the pick tires. The tires could be damaged if you use the print head cleaning wipe.

**CAUTION** Do not touch the pick tires (which may be white or green); body oils from your fingers are hard to remove and could eventually damage the tires.

**WARNING** With the receive trays removed, touch only those internal components that are colored green. Remove rings, ties, jewelry, and other items, and tie back hair, so that they do not fall into or get caught in the imager.

**CAUTION** Use only cleaning swabs from a Barcode Reader Cleaning Kit.

**CAUTION** Do not scratch or nick the sheet metal. Scratches and nicks in the basement will damage the printed side of ChromaVista sheets.

**CAUTION** Federal law restricts this device to be sold for use by or on the order of a physician.

**WARNING** With the top cover open, touch only those internal components that are colored green. Remove rings, ties, jewelry, and other items, and tie back hair, so that they do not fall into or get caught in the imager.

**CAUTION** Do not touch the pick tires (which may be white or green); body oils from your fingers are hard to remove and could eventually damage the tires.

**CAUTION** To avoid damaging internal components, use care when removing a sheet from the media path in the upper part of the imager.

**CAUTION** Never put a sheet back in the cassette. Dust or oil from your finger will affect the image quality.

**WARNING** With the top cover open, touch only those internal components that are colored green.

Remove rings, ties, jewelry, and other items, and tie back hair, so that they do not fall into or get caught in the imager.

**CAUTION** Be careful not to scratch the polished sheet metal or damage the sensor near the upper guide notch.

**CAUTION** Make sure you do not overrotate the media guide, as shown below.

**CAUTION** Federal law restricts this device to be sold for use by or on the order of a physician.

**CAUTION** Use care when running the Purge Print Jobs function. This function will purge other users' print jobs as well as yours.

**CAUTION** All files uploaded using anonymous FTP are readable by other FTP users. DO NOT upload sensitive or classified information.

# Horizon® XL

Multimedija Imager

HR - hrvatski jezik

## Dokumentacija i Obavijest

Codronics Proizvodi jesu Razred Ja proizvoda namijenjen za koristiti po Zdravstvo Profesionalci. Proizvodi ambalaža i označavanje, uključujući Grafički Korisnik Sučelje (GUI) za operacija jesu offered u Engleski i upoznati MDR, Dodatak Ja, Poglavlje III, 23,4, uzimanje račun trening i znanje od potencijal korisnik.

\*Mreža informacija, Ključ Tehnički podaci, Namijenjeno Koristiti, Korisnik priručnik Dodatak, Brz Početak Vodič & Postaviti AKO TI jesu dostupno u jednostavan prijevod Član država Jezici; primarni AKO TI jesu dostupno u Engleski.

## Pregled

The Horizon XL kombinira dijagnostički film, boja papir i sive boje papir tiskanje u a svestran medicinski imager. Horizon XL značajke ekskluzivan 36 " i 51 " suho dugo film idealan za dugo kost i skolioza studije. A ukupno CR / DR ispis riješenje, Horizon XL htjeti smanjiti tvoj troškovi, uštedjeti vas prostor, i potpuno eliminirati tvoj mokra film obrada potrebe. Visoko ubrzati slika obrada, umrežavanje i namotavanje jesu svi standard.

## Tehnički podaci

Ispis Tehnologija: Difuzija boje i direktno toplinska (suho, danje svjetlo sef operacija)

Prostorna Rješenje: 320 DPI (12.6 piksela / mm)

Propusnost: Gore do 100 filmova po sat

Vrijeme Do Upravljanje: 5 minuta (spreman do ispis iz "Isključeno")

Sive nijanse Kontrast Rješenje: 12 komadići (4096)

Boja Rješenje: 16.7 milijuna boje

256 razinama svaki od cijan, magenta, i žuta boja

Mediji Ulazi: Tri Opskrba kasete, 25-100 (prikaz, stručni) plahte svaki, jedan boja vrpca

Mediji Izlazi: Tri primiti pladnjevi, 50 listova kapacitet svaki

Mediji Veličine: 8 " x 10 ", 14 " x 17 " (plava i čisto) DirectVista® Film

14 " x 36 ", 14 " x 51 " (plava samo) DirectVista® Film

A, A4, 14 " x 17 " DirectVista Sive nijanse Papir

A, A4 ChromaVista® Boja Papir

Dmax: > 3.0 s DirectVista Film

Arhivsko: > 20 godine s DirectVista Film, pod, ispod ANSI produženi rok skladište Uvjeti

Mediji Opskrba: svi mediji je predpakirano i tvornica zapečaćena

Sučelja: Standard: 10/100 Baza-T Ethernet (RJ-45), Serijski Dijagnostički Luka, Serijski Konzola

Mreža Protokoli: Standard: FTP, LPR

Neobvezno: DICOM (gore do 24 istodobna veze), Windows mreža tiskanje

Slika Formati: Standard: TIFF, GIF, PCX, BMP, PGM, PNG, PPM, XWD, JPEG, SGI (RGB), Sunce Raster, Targa

Neobvezno: DICOM, PostScript™ kompatibilnost

Slika Kvaliteta: Automatski kalibriranje koristeći ugrađeni denzitometar  
Slika Kontrolirati: Gama, Kontrast, Zasićenje, Medicinski Boja Podudaranje (MCM™), Polaritet, Rotacija, Skaliranje, Antialiasing  
List Kontrolirati: Gustoća Podešavanje (Dmax), Pogledaj Stolovi (LUT), Slika Upozorenja, Natpisi, List Pokrivenost, Granica Boja, Granica Ispunite, Usjev Sidro  
List Oblikovanje: 1: 1 - 1:81; Promjenjiva Višestruko formatiranje (VMF™), Fiksno Višestruko formatiranje (FMF™)  
Kontrolirati Ploča: Veliki, s pozadinskim osvjetljenjem LCD prikaz, Status svjetla uključuju Na liniji, Upozorenje, Kvar, Aktivan Vlast i izbornik navigacija gumbi  
Procesor: Intel  
Memorija: 512 MB radna memorija  
Teško Disk: 80 GB (60 GB dostupno za namotavanje)  
Odvojiva Disk: 100 MB ZIP™ Disk za softver nadogradnje  
Pametna Kartica: 72 KB za spremanje konfiguracija podaci  
Vlast: Univerzalni Ulazni: 100-120 / 230V ~ 50/60 Hz, 600W tisk, 150W besposlen  
Toplina Emisija: Maksimum 600 W, 2.050 BTU / hr. tisk, 150 W, 512 BTU / hr. besposlen  
Težina: 66 kg. (30 kg.)  
Motor Dimenzije: 14,5 " (37 cm) H, 20,5 " (52 cm) W, 24 " (61 cm) L  
Okoliš: Operativni Temperatura: 15-30°C, Pohrana: -22,2 - 50,6 ° C, Operativni Vlažnost: 10-70% R.H. (bez kondenzacije)  
Regulatorni: Puna medicinski uređaj usklađenost uključujući Razred 2 FDA i Razred Ja MDR 2017/745 / EU (CE), GMP / QSR, ISO 13485: 2016 / NS-EN  
ISO 13485: 2016, Električna Sigurnost IEC 60601-1 Ed. 3.1 i EMC / EMI:  
FCC Razred A i IEC 60601-1-2: Ed. 4 za Profesionalno Zdravstvo Sadržaji

## Konvencije Korišteno u Korisnik Priručnik


### Nabrajanje Popisi

Meci jesu koristi do prikaz a popis od neproceduralni predmeta. Za primjer:

The kontrolirati ploča sadrži:

- A prikaz ploča
- Ključevi
- Pokazatelji

### Numerirani Koraci

The  ikona ukazuje početak od a postupak. The stepenice u a postupak jesu numerirani. Za primjer:

1.Pritisnite IZBORNİK ključ.

The Glavni izbornik prikazuje na kontrolirati ploča. The selektor strijela (▶) automatski bodova do prvi izbornik opcija.

2.Do svitak kroz izbornik mogućnosti, pritisnite gore i dolje tipke.

The selektor strijela (▶) kreće se gore i dolje kroz popis. The dno dio od kontrolirati ploča prikaz pokazuje a poruka udruženi s trenutno odabran izbornik opcija.

## Kontrolirati Ploča Navigacija

*izbornik staze* jesu koristi u neki postupci umjesto toga od dokumentiranje svaki korak potrebno do ploviti do a specifično izbornik opcija. Za primjer:

Iz Glavni Izbornik, Izaberi slijedeći mogućnosti:

Zadano Mediji  
Sive nijanse  
DV Film Plava

## Kontrolirati Ploča Ključevi

Kontrolirati ploča tipke jesu prikazan u mali crno ovala do nalikovati stvarni tipke, za primjer, "Pritisnite UNESI ključ."

## Kontrolirati Ploča izbornik Opcije

Kontrolirati ploča izbornik mogućnosti jesu prikazan u podebljano tip, za primjer, "Izaberi Gama izbornik opcija."

## Bilješke i Savjeti

Bilješke sadrže dodatni informacija povezane do a tema ili postupak. Za primjer:

**BILJEŠKA:** Ako tvoj mreža je uspio po a mreža administrator ili an informacija tehnologija (TO) odjel, to bi biti smatra a kompleks mreža. Vas treba imati odgovoran osoba izvoditi bilo koji povezano s mrežom upravni zadaci.

Savjeti pružiti dodatni uvida oko a tema ili postupak (takav kao, zašto vas svibanj želite do čini nešto ili a brže put do izvoditi an operacija). Za primjer:

**SAVJET:** *Određivanje ispis postavke u a višekorisnički okoliš*

*Ako Horizon imager je pristupljeno po višestruko korisnici, to je tipično bolje za pojedinac korisnika do Unesi ispis vrijednosti kroz DICOM primjena sučelje dapače od promijeniti zadano postavke kroz kontrolirati ploča.*

## Upozorenja i Upozorenja

Upozorenja uzbuna vas do radnje ili situacijama da mogli uzrok naštetiti do oprema ili podaci. Za primjer:

**OPREZ** Bilo koji promjene vas napraviti do imager zadano postavke htjeti a Također utjecati otisci napravljeno po drugo korisnika. Koristiti Oprez kada mijenjajući se zadano postavke.

Upozorenja uzbuna vas do radnje ili situacijama da mogli proizlaziti u osobni ozljeda. Za primjer:

**UPOZORENJE S** imager pokrivi otvoren, dodir samo oni unutarnja komponente da jesu obojene zeleno.

## Tekst Datoteke i Prikazano Tekst

Monospaced tip je koristi za sadržaj od an ASCII datoteka ili mašina tekst prikazan u a terminal naredba prozor.

## Korisnik Podaci



**Podebljano jednosmjerni tip** je koristi do naznačiti specifično likova ili riječi da vas Unesi na a domaćin radna stanica kada izvodeći Napredna imager operacijama. *Ako tip je također ukošen*, to ukazuje varijabilna tekst. Za primjer:

1. Iz tvoj radna stanica, otvoren a UNIX ili MS-DOS naredba prozor.
2. Unesi naredba **telnet ime domaćina** ili **telnet IP Adresa** (koristeći ili Horizon imager ime domaćina ili IP Adresa).
3. Na prijavit se potaknuti, Unesi naredba status.

## Važno Informacija i Imena datoteka

**Podebljano tip** je koristi za naglasak, naredba imena, i staze ili imena datoteka. Za primjer:

- The Horizon imager zadano postavke limenka biti promijenio oba na kontrolirati ploča i koristeći tekst datoteke.
- The ime domaćina i IP Adresa mora biti dodao je do **/itd/ domaćini** datoteka.

## Novi Pojmovi

*Kurziv tip* je koristi kada a termin je uveo i definirano. Za primjer:

- The Horizon imager ima a dovršen postaviti od *zadano postavke* da sadrže unaprijed konfiguriran vrijednosti za svaki aspekt od a tiskani list.

## Svrha i Opseg

Uputiti do ovaj korisnik priručnik za postupci na kako do izvoditi najviše uobičajen imager operacije, uključujući:

- Postavljanje gore imager
- Učitavam mediji
- Slanje ispis poslovi iz DICOM Ispis Servis Razredsukladan aplikacije trčanje na slikanje uređaji ili slika gledanje radna stanica
- Slanje ispis poslovi iz radne stanice preko PostScript
- Slanje ispis poslovi koristeći FTP i LPR
- Mijenjanje imager's zadano slika i list postavke
- Podešavanje izgled od tiskani slike za korisnik prednost
- Izvođenje preventivni održavanje
- Izvođenje film kalibriranje
- Rješavanje problema uobičajen problema

**BILJEŠKA:** Neki značajke i funkcije opisano ovdje svibanj ne primijeniti do starije verzije od softver.

Ovaj Korisnikov Priručnik je namijenjen do biti kao jednostavan i izravno kao moguće za svaki dan korisnik. Ako vas potreba više detaljan ili više tehničke informacija na a značajka ili tema, ili želja do izvoditi više Napredna operacije, uputiti do *Horizon Imager Tehnički Priručnik* (Kataloški br.HORIZONMNL). The Tehnički Priručnik služi kao a suputnik dokument do ovaj priručnik

## Proizvod Informacija

Za tehničke pomoć s Horizon, poziv Codonics Tehnički Podrška na slijedeći broj:

**Telefon: +1.440.243.1198**

**Cestarina Besplatno: 800.444.1198 (SAD samo)**

Tehnički Podrška je dostupno bilo kada. Tehnički Podrška je također dostupno na liniji preko e-mail i Codonics mreža web mjesto:

**E-mail:** [support@codonics.com](mailto:support@codonics.com)

**mreža Stranica:** [www.codonics.com](http://www.codonics.com)

Općenito proizvod informacija limenka također biti zatražio po slanje e-mail do:


**E-mail:** [info@codonics.com](mailto:info@codonics.com)

Molim uključuju tvoj poštanski slanje pošte adresa i telefon broj u e-mail poruka. Osnovni, temeljni proizvod informacija je vratio preko e-mail osim ako inače zatražio.

## Upozorenja i Ograničenja od Koristiti

### Mjesto od Sigurnost i Usklađenost Oznake

The slijedeći lik pokazuje lokacijama od imager's sigurnost i usklađenost oznake.

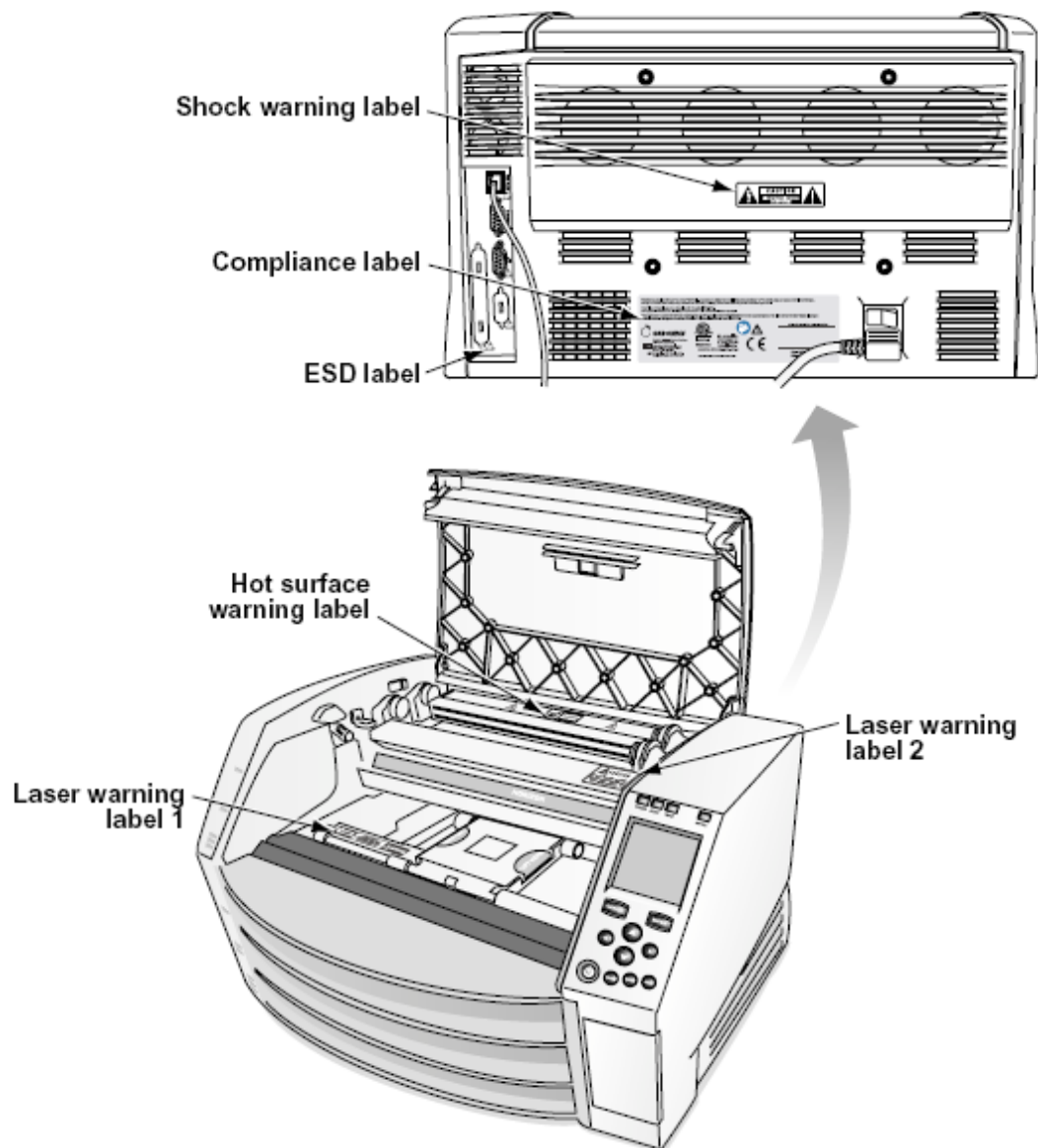

## napon Upozorenje

The uzvik točka unutar an jednakostraničan trokut i osoba čitanje a priručnik simbol jesu namijenjen do uzbuna korisnik do prisutnost od važno operativni i održavanje (servisiranje) upute u književnost prateći ovaj uređaj.



NE KORISNIK KORISNI DIJELOVI IZNUTRA. UPUTITI SERVISIRANJE DO KVALIFICIRANO SERVIS OSOBLJE. UKLANJANJE OD OZNAKE, KORICE, ILI OBUKA PRIKLJUČCI POTPUNO THE JAMSTVO.

OVAJ APARAT MORA BITI ELEKTRIČNO OSNOVANO.

DO SPRIJEČITI VATRA ILI ŠOK OPASNOST, ČINI NE IZLOŽITI OVAJ SLIKA DO KIŠA ILI VLAGA.

OPREMA SE NE KORISTI KAO KOMPONENTA SUSTAVA ZA ŽIVOTNU PODRŠKU. Uređaji ili sustavi za održavanje života su uređaji ili sustavi koji podržavaju ili održavaju život i čiji se neuspjeh može opravdano očekivati da rezultira značajnom ozljedom ili smrću osobe. Kritična komponenta je bilo koja komponenta uređaja ili sustava za održavanje života za čiji se neuspjeh može opravdano očekivati da uzrokuje kvar uređaja ili sustava za održavanje života ili da utječe na njegovu sigurnost ili učinkovitost.

**UPOZORENJE** Uzemljenje pouzdanost limenka biti postignuto samo kada Horizon je povezani do a posuda obilježen "Bolnica Samo" (da je, "Bolnica Razred").

**UPOZORENJE** The vlast kabel povezani do Horizon je glavni odspojiti za sustav.

**UPOZORENJE** Do odspojiti sveukupno vlast do Horizon prior do servisiranje to, vlast od sustav.

**UPOZORENJE** Čini ne preinačiti ovaj opremint bez autorizacija od proizvođač

**UPOZORENJE** Vanjski oprema namijenjen za povezanost do signal ulazni, signal izlaz, ili drugo konektori, mora poštivati s relevantne IEC standard (npr. IEC 60950 za TO oprema i IEC 60601 niz za medicinski oprema). U dodatak, svi takav Kombinacije - sustavi - moraju biti u skladu s IEC 60601-1 standardom za sustave medicinske električne opreme. Oprema koja nije u skladu s IEC 60601 mora se čuvati izvan okoline pacijenta, kako je definirano u standardu. Svaka osoba koja spoji vanjsku opremu na ulazni signal, izlazni signal ili druge konektore stvorila je sustav i stoga je odgovorna da sustav udovoljava zahtjevima IEC 60601-1-1. Ako sumnjate, obratite se kvalificiranom tehničaru ili Codonics Tehnički Podrška za odobren konfiguracije.

**UPOZORENJE** Čini ne dodir a pacijent dok također pristupanje unutarnja komponente da jesu pod, ispod vrh pokriti ili primiti pladnjevi.

## Laser Upozorenje

The Horizon imager koristi a laser do čitati barkod informacija na mediji kasete. The laser modul je a 650 - 670nm uređaj od 1.26mW ili manje. Kao takav to ima bio pronađeno do poštivati s 21 CFR 1040.10 i 1040.11 i IEC 60825 laser standardima kao a niska vlast Razred 1 uređaj.


Za sigurnost razlozi, laser je okrenuo na samo za a kratak vrijeme kada a kasete je umetnuta. Još, jedan treba koristiti Oprez i nikada buljiti na laser beam, treba izbjegavajte izlaganje do laser, i treba nikada nadjačati bilo koji od interlocks i sigurnost mehanizmi. Ovi mjere jesu poduzete za tvoj zaštita.

**UPOZORENJE** Koristiti od kontrole ili prilagodbe do izvođenje od postupci drugo od oni specificirano u ovaj priručnik svibanj proizlaziti u opasan radijacija izlaganje.

The laser otvora jesu obilježeni s a singl označiti, prikazan ispod. Tamo jesu tri otvora da dopisivati se do tri kasete lokacije, jedan za svaki, na isti strana od Horizon imager kao ovaj označiti.



Sigurnost interlocks jesu obilježeni po slijedeći označiti. Oni jesu nalazi na isti strana od Horizon imager kao ovaj označiti.

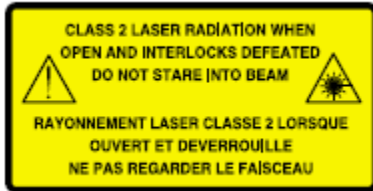

### Temperatura Upozorenje


Jer Horizon Imager je uređaj za termički ispis, površina hladnjaka hladnjaka za termalnu glavu se zagrijava. Izbjegavajte izravno dodirivanje komponenata koje nisu obojene zelenom bojom pri pristupu unutrašnjosti slike ako slika ispisuje. (Tijekom nekih zadataka preventivnog održavanja dodirivat ćete unutarnje dijelove jastučićima za čišćenje ili tamponima.)

The temperatura upozorenje označiti je prikazan ispod.

### Usklađenost

Codonics je u usklađenost s raznim propisi.

The Usklađenost označiti, koji je pričvršćen na leđa od imager, je prikazan ispod.

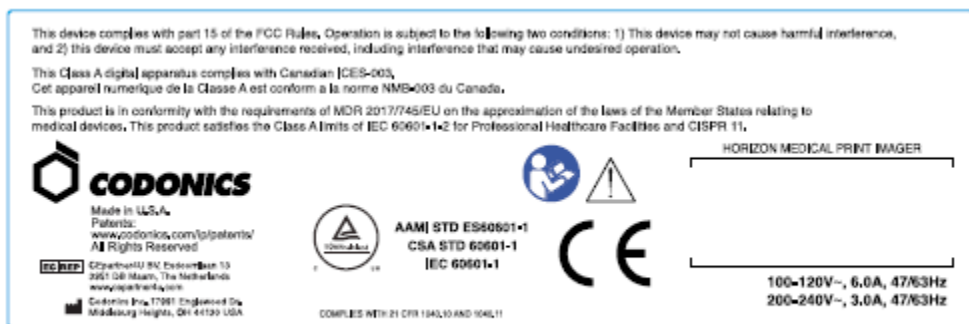

### Compliance label

Serijski Broj, Konfiguracija, Datum Kodirati, i Izmjena Kodovi


The Serijski broj označiti je postavljeni na Usklađenost označiti. To uključuje slijedeći informacija.

The serijski broj (S N), koji jedinstveno identificira jedinica.

The Konfiguracija broj (CNFG), koji pojednosti izgraditi konfiguracija.


The preinake kodovi, koji jesu do pravo od CNFG broj i jesu a niz od 20 brojevi. Kada bilo koji od ove brojevi jesu blokiran van, da identificira a preinaka da bila napravljeno do jedinica.

The datum kodirati u GGGG-MM format ispod tvornica datum kodirati simbol.

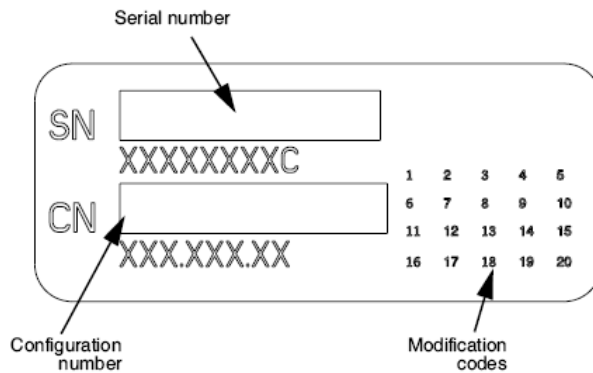

### ESD Oprez

Veze do drugo komadima od oprema jesu napravljeno na straga od Horizon imager. Ovi konektori jesu obilježeni s a predostrožnosti ESD upozorenje simbol, kao prikazan ispod. Čini ne dodir bilo koji od igle od ove konektori. Kada izrada veze do imager, to je najbolje gotovo dok imager je priključen u ali ne s pogonom na. ESD svibanj uzrok nestalna ponašanje od imager kada s pogonom na. Trebao bi ovaj dogoditi se, vlast do imager svibanj imati do biti biciklirao. To je preporučeno da svi osoblje uključeni u izrada veze do imager biti svjestan od ove ESD Mjere opreza.

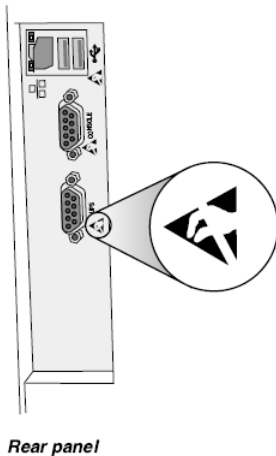

### Potencijal za Radio Frekvencija Smetnje na Imager Operacija

Oba prijenosni i mobilni RF komunikacije oprema limenka utjecati medicinski električni oprema, uključujući Horizon imager. Zadržati takav RF komunikacije oprema van od neposredna područje.

### Potencijal za Radio i Televizija Smetnje

The Horizon imager generira i koristi radio frekvencija energija, i ako ne instaliran i koristi pravilno, da je, u strog suglasnost s proizvođača upute, svibanj uzrok smetnje do radio i televizija recepcija. To ima bio tip testirano i utvrđeno je da udovoljava ograničenjima emisije klase B za računalni uređaj u skladu sa specifikacijama iz Pododjeljka J dijela 15 FCC pravila, koja su stvorena da pruže razumnu zaštitu od takvih smetnji pri radu u komercijalnom okruženju. Rad opreme u stambenom području vjerojatno će prouzročiti smetnje, u kojem će slučaju korisnik, o svom trošku, morati poduzeti sve

mjere koje mogu biti prikladne za ispravljanje smetnji. Ako vaša kamera stvara smetnje radijskom ili televizijskom prijemu, preporučujemo vam da pokušate ispraviti smetnje jednom ili više sljedećih mjera:

- Preusmjeriti primanje antena
- Premjestiti imager s poštovanjem do prijammnik

Ako potrebno, vas treba savjetovati Codonics tehničke podrška ili an iskusan radio / televizija tehničar za dodatni prijedlozi. Vas svibanj pronaći slijedeći knjižica pripremljeni po Savezni Komunikacije Provizija koristan: *Kako do Identificirati i Odlučnost Radio-TV Smetnje Problemi*. Ovaj knjižica je dostupno iz NAS. Vlada Ispis Ured, Washington, D.C. 20402, Zaliha Ne. 004-000-00345-4.

Ovaj proizvod je u skladnost s zahtjevima od EZ Vijeće direktiva doktor medicine R 2017. godine/745/EU (CE) na aproksimacija od zakoni od Član Države koji se odnosi do medicinski uređaji. Ovaj proizvod zadovoljava Razred A ograničenja od IEC60601-1-2 i CISPR 11. A deklaracija od skladnost s zahtjevima od Direktiva ima bio potpisao po Direktor od Operacije. Horizon je odobren za izvoz preko FDA Potvrde do Strani Vlada i registriran kao a medicinski uređaj za uvoz. A Trenutno popis od zemljama je dostupno na zahtjev.

#### Smjernice Glede Elektromagnetski Emisije i Imunitet

Prikladan Okruženja:

- Horizon je namijenjen za koristiti u profesionalni zdravstvo objekt okruženja, uključujući bolnice i medicinski klinike.
- Horizon ima ne bio ocjenjivao za koristiti blizu VF kirurški oprema. Ako koristiti blizu VF kirurški oprema je željeni, korisnik je odgovoran za provjeravanje ispravan operacija od Horizon. Ako Horizon čini ne izvoditi ispravno u ovaj okoliš, potez Horizon dalje iz izvor od elektromagnetski poremećaj.
- Horizon ima ne bio ocjenjivao za koristiti u hitan slučaj medicinski vozila.

Kao a podrška uređaj, Horizon čini ne pružiti bitno izvođenje.

**UPOZORENJE** Koristiti od ovaj oprema susjedni do ili složeni s drugo oprema treba biti izbjegnuto jer to mogli proizlaziti u nepropisno operacija. Ako takav koristiti je potrebno, ovaj oprema i drugo oprema treba biti promatranom do provjeriti da oni jesu operativni normalno, redovno.

**UPOZORENJE** Koristiti od pribor, pretvarači i kablovi drugo od oni specificirano ili pod uvjetom po proizvođač od ovaj oprema mogli rezult u povećao elektromagnetski emisije ili smanjila elektromagnetski imunitet od ovaj oprema i proizlaziti u nepropisno operacija.

**UPOZORENJE** Prijenosni RF komunikacije oprema (uključujući periferne jedinice takav kao antena kablovi i vanjski antene) treba biti koristi Ne bliže od 30 cm (12 inča) do bilo koji dio od Horizon, svoje kabeli, ili pribor. Inače, degradacija od izvođenje od ovaj oprema mogli proizlaziti.

### Electromagnetic Emissions Standards and Test Levels:

<b>Test / Standard</b>	<b>Compliance Level</b>
<b>RF Emissions</b>	Group 1, Class A
CISPR 11	
<b>RF Emissions</b>	Class A
FCC Part 15	
<b>Conducted Emissions</b>	Group 1, Class A
CISPR 11	
<b>Harmonic Distortion</b>	Class A
IEC 61000-3-2	
<b>Voltage Fluctuations and Flicker</b>	Complies
IEC 61000-3-3	

### Electromagnetic Immunity Standards and Test Levels:

<b>Test / Standard</b>	<b>Compliance Level</b>
<b>Electrostatic Discharge</b>	±8kV contact
IEC 61000-4-2	±2kV, ±4kV, ±8kV, ±15kV air

## Electromagnetic Immunity Standards and Test Levels: (Continued)

Test / Standard	Compliance Level
<b>Radiated RF Immunity</b>	3 V/m
IEC 61000-4-3	80 MHz - 2.7 GHz 80 % AM at 1 kHz
<b>Proximity fields from RF wireless equipment</b>	Complies
IEC 61000-4-3	
<b>Electrical Fast Transient / Burst</b>	AC Port: $\pm 2$ kV, 100 kHz repetition frequency
IEC 61000-4-4	SIP/SOP Ports: $\pm 1$ kV, 100 kHz repetition frequency
<b>Surge</b>	Line-to-Line: $\pm 0.5$ kV, $\pm 1.0$ kV
IEC 61000-4-5	Line-to-Ground: $\pm 0.5$ kV, $\pm 1.0$ kV, $\pm 2.0$ kV
<b>Conducted Immunity</b>	AC Port and SIP/SOPs:
IEC 61000-4-6	3V, 0.15 MHz - 80 MHz 6V, in ISM bands between 0.15 MHz and 80 MHz 80 % AM at 1 kHz
<b>Magnetic Field Immunity</b>	30 A/m, 50 Hz or 60 Hz
IEC 61000-4-8	
<b>Voltage Dips</b>	0% $U_T$ , 0.5 cycle at 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° and 315°
IEC 61000-4-11	0% $U_T$ , 1 cycle AND 70% $U_T$ , 25/30 cycles, Single phase: at 0°
<b>Voltage Interruptions</b>	0% $U_T$ , 250/300 cycle
IEC 61000-4-11	

### Sigurnost Mjere opreza

- Nikada Spojiti ovaj imager do bilo koji utičnica ili vlast Opskrba da ima a napon ili frekvencija drugačiji od da specificirano na straga od imager.
- Kada servisiranje imager, stalno vlast to isključiti koristeći (vlast) ključ na kontrolirati ploča, zatim skretanje klackalica sklopka u leđa do 0 (isključeno) položaj, zatim odspojite imager.



- Šteta do vlast kabel svibanj uzrok vatra ili šok opasnost. Kada odčepujući vlast kabel, držite to po utikač samo i ukloniti utikač pažljivo.
- Ako vlast kabel potrebe do biti zamijenjen, zamijeniti to samo s još Codonics vlast kabel proizveden posebno za tvoj imager's vlast konfiguracija.
- Ako imager je pušenje ili izrada neobično zvukovi, vlast isključiti i odspojite imager odmah.
- Čini ne umetnuti strani predmeta od bilo koji ljubazan u imager; radi tako limenka konstituirati a sigurnost opasnost i uzrok opsežne šteta.
- Čini ne mjesto bilo koji tekućina kontejneri na imager. Ako, za neki razlog, tekućina proviruje u imager, vlast isključiti imager i odspojite vlast kabel iz izvor utičnica. Ako koristi bez korektivni mjere, imager svibanj biti oštećen.
- Čini ne koristiti imager blizu zapaljiv plinovi.
- S imager vrh pokriti otvoren ili primiti pladnjevi uklonjeno, dodir samo oni unutarnja komponente da jesu obojene zeleno (prikazano u slijedeći lik). Ukloniti prstenovi, kravate, nakit, i drugo predmeti, i kravata leđa dlaka, tako da oni čini ne pad u ili dobiti zatečen u imager.



***Interno Komponente Da Jesu Obojene Zelena (nazvano van u ilustracija) Jesu Sef do Dodir***

#### Mjesto Mjere opreza

- The imager's operativni ambijentalni temperatura domet je 15–30°C (59–86°F), s a srodnik vlažnost od 10% –80%.
- Ako imager je pomaknuto brzo iz an krajnje hladno mjesto do a grijač jedan, kondenzacija je Vjerojatno do oblik. Čini ne koristiti imager ako kondenzacija ima formirana. Čekati do kondenzacija ima isparila. Vas limenka ubrzati gore isparavanje vrijeme po krećući se imager do a sušilica mjesto.
- Ventilacija utora i rupe jesu pod uvjetom na strane i straga od imager. Mjesto imager na a teško nivo površinski i pronaći to na najmanje 10 cm (4 inča) iz zidovi do osigurati ispravan ventilacija

**OPREZ** Adekvatan ventilacija je potreban za ispravan operacija od imager

**OPREZ** Kada pozicioniranje Horizon Imager, osigurati tamo je adekvatan prostor do pristup straga vlast sklopka.

- Čini ne mjesto imager u a visoko vlažnost ili visoko prah područje. U zraku prljavština čestice limenka uzrok slika kvalitetu problema. Izbjegavajte postavljanje imager u područja gdje

ventilacija kanali, otvoreni vrata, ili često prolaznici moć izložiti imager i mediji do visoko razinama od krhotine.

- Čini ne pronaći imager u izvori vruće vode područja gdje vodik sulfid i kisela ioni jesu Vjerojatno do biti generirano.
- Čini ne pronaći imager gdje tamo jesu masna isparenja i isparenja.
- Čini ne pronaći imager u direktno sunčevu svjetlost.
- Čini ne pronaći imager blizu izvori od visoko RF energije.
- Čini ne pronaći imager gdje to moć biti predmet do neskladna ili vibracije, takav kao a stol ili radni stol u a visokopromet područje. Neskladna i vibracije limenka utjecati ispis kvalitetu od slike.
- Horizon zadovoljava električni sigurnost ograničenja od IEC60601-1 i CISPR 11 i je prikladan za pacijent briga područje mjesto. Ček s lokalno pravilnike i montaža smjernice do potvrdi odobren mjesto zahtjevima.

#### Čišćenje Mjere opreza

- Mnoge plastične komponente koriste se u konstrukciji slike. Pucanje i deformacija dlake vjerojatno će se dogoditi ako se kamera obriše kemijskim prahom, benzolom, razrjeđivačima, insekticidima ili drugim otapalima. Gumeni i PVC materijali koji dulje vrijeme ostanu u dodiru sa slikovnom kamerom prouzročit će štetu. Nikada nemojte koristiti naftuzasnovan rješenja ili abrazivno čistačice.
- Do čist imager pokriti, prvi vlast isključiti imager koristeći (vlast) ključ na kontrolirati ploča, zatim skretanje klackalica sklopka u leđa do 0 (isključeno) položaj, zatim odspojite imager. Čist pokriti s a mekan tkanina malo navlaženo s a blago sapun i voda rješenje. Dopustite pokriti do potpuno suho prije operativni imager opet.

#### Mediji

Za **ChromaVista**<sup>®</sup> boja otisci, konzumira vrpca sadrži faksimili od bilo koji pacijent slike tiskani do **ChromaVista** boja plahte. Stoga, vas mora pravilno raspolagati od ili uništiti konzumira vrpca do osigurati povjerljivost od pacijent slike.

The optički gustoća od reflektirajuća i transmisivan otisci imati a nominalni domet od:  $D_{min} = 0.10$  OD (reflektirajuća),  $0,11$  OD (transmisivno) do  $D_{max} = 2.10$  OD (reflektirajuća),  $3.1$  OD (transmisivno). Stvarno optički gustoće svibanj varirati zasnovan na mediji varijacije i na instrument biće koristi do mjera gustoća. Za primjer, **DirectVista**<sup>®</sup> Čisto film svibanj imati a niži  $D_{min}$  i  $D_{max}$  od **DirectVista** Plava film.

- The Horizon Imager uključuje ugrađeni denzitometar. Ugrađeni denzitometar dizajniran je za izradu dosljednih otisaka kompenzacijom varijacija s jedne filmske kasete na drugu, a s jedne na drugu. Za primjene koje zahtijevaju apsolutnu kontrolu maksimalne gustoće, rezultate treba provjeriti u odnosu na komercijalni denzitometar. Unutarnji denzitometar može se kalibrirati na stolnu jedinicu. Pogledajte *Horizon Imager Tehnički Priručnik* za više informacija.
- **DirectVista** mediji je optimiziran za sive boje otisci, dok **ChromaVista** je optimiziran za boja otisci. Ako **ChromaVista** je ne davanje vas zadovoljavajući rezultatima s sive boje slike, vas svibanj želite do smatrati koristeći **DirectVista** mediji za oni aplikacije.
- Mediji varijacije između drugačiji proizvodnja puno svibanj proizvesti suptilna Razlike u slika kvalitetu i boja. Ovi varijacije najviše često nastaju u boja vrpce i jesu okarakteriziran kao a neznatan boja nijansa u sive boje slike.
- Codonics film mediji je dizajniran do biti gledano koristeći a svjetlo kutija prikladan za gledanje medicinski dijagnostički slike.
- Codonics papir / bijela film mediji je dizajniran do biti gledano pod, ispod coolbijela, fluorescentna svjetlo. Spektralni Razlike i intenzitet varijacije u gledanje svjetlo izvori limenka promijeniti prividno boja od slike tiskani na papir / bijela film.

- Tiskano slike da jesu predmet do produženo izlaganje do sunčeva svjetlost, ultraljubičasto svjetlo, ili ekstremno toplina svibanj degradirati u slika kvalitetu. (Za primjer, tiskani plahte treba ne biti pohranjeni u an automobil na a sunčano dan.) Mjere opreza treba biti koristi do Izbjegavajte produženo direktno izlaganje.

Codonics Papir / bijela Film Mediji

The Pojmovi "Bijela papir" i "Bijela film" jesu sinonim reference i koristi naizmjenično u ovaj priručnik.

Datoteka Prijenos preko FTP i LPR

- Drugačiji korisnika Who udio a korisnik Ime kada prenoseći datoteke do imager svibanj uzrok nepredvidljiv i pogrešno tiskani izlaz. The imager suradnici informacija s korisnik Ime. Svaki korisnik treba imati a jedinstven korisnik Ime kada povezivanje do imager preko FTP i LPR.

Boja Upravljanje

- Slika postavke - uključujući gama, kontrast, Dmax, zasićenje, i MCM™ (Medicinski Boja Matching™) - jesu namijenjen do nadoknaditi za Razlike da svibanj nastaju između slika stjecanje i slika tiskanje. Ovi filtri dopustiti vas do točno prikazati konačni tiskani slika. Vas treba koristiti briga kada prijavljivanje ove filtri do Izbjegavajte nad naknada.
- The Zadano Korisnik Postavke postaviti na kontrolirati ploča htjeti potencijalno utjecati otisci napravljeno po svi korisnika. Koristiti Oprez kada mijenjajući se zadano postavke.

Slika Skaliranje

- Skaliranjem slike filtrirat će se izvorni podaci slike i dodati ili ukloniti podaci, što može utjecati na točnost konačne ispisane slike. Količina dodanih ili uklonjenih podataka također će varirati s veličinom primijenjenog faktora razmjera. To također može utjecati na točnost konačne ispisane slike. Trebali biste biti svjesni svojstava i ograničenja svakog algoritma skaliranja i odabrati odgovarajući algoritam za zadatak.

Hardver Varijacije

- Komponente korištene u slikovnom uređaju mogu se razlikovati, što uzrokuje razlike u kvaliteti slike. Termički postupak izrade otiska koristi mnoge komponente koje su kalibrirane kako bi se osigurala dosljednost između slika. Postoje suptilne razlike između slika koje mogu uzrokovati varijacije ispisa. Te se razlike obično odnose na kalibraciju termičke glave za ispis. Ostali čimbenici kao što su dob, upotreba, vrućina, mehaničko trošenje i isporuka mogu utjecati na boju i kvalitetu slike.
- The tip od mediji koristi do instalirati softver nadopune i do sigurnosna kopija imager konfiguracija postavke ovisi na hardver varijacije. Ako imager ima a ugrađeni Zip voziti, instalacije i sigurnosne kopije jesu izvedena koristeći 100 MB Zip diskovi. Ako imager čini ne imati a ugrađeni Zip voziti, USB bljesak pogoni jesu koristi s USB luke na straga ploča. Širom ovaj priručnik, Zip diskovi i USB bljesak pogoni jesu uputiti do kao *montaža mediji* ili *sigurnosna kopija mediji*, ovisno na operacija biće izvedena.

**BILJEŠKA:** Ako imager ima oba a Zip voziti i a USB luka, stalno koristiti Zip disk do instalirati softver i uštedjeti konfiguracija postavke.

Raspolaganje Zahtjevi

Raspolaganje od ovaj proizvod i potrošni materijal mora biti u suglasnost s svi primjenjiv zakoni i propisi u utjecaj na mjesto na vrijeme od raspolaganje.

Europskim Raspolaganje Zahtjevi

Codonics imageri i elektronička oprema uređaji jesu ne do biti odbačen ili reciklirano; dapače oni jesu do biti vratio do proizvođač. Kontakt Codonics direktno ili po veza pod uvjetom za najnoviji informacija o:

- Identifikacija od specifično za zemlju Uvoznik / distributer / proizvođač
- Proizvod povratak i liječenje od naše elektronička proizvoda

Proizvođač: Kodonics Inc.

17991 Englewood Voziti

Middleburg Visine, OH 44130 SAD

Telefon: +1.440.243.1198

Faks: +1.440.243.1334

E-mail: WEEE@codonics.com

www.codonics.com

Codonics elektronička proizvoda i pribor ležaj slijedeći simbol jesu predmet do Europskim Direktiva na Gubljenje Električna i Elektronička Oprema (WEEE) 2002/96 / EZ, izmijenjen po Direktiva 2003/108 / EZ. The HR 50419 simbol ukazuje odvojiti kolekcija i povratak potreban.



*HR 50419 simbol*

#### Indikacije za Koristiti

**OPREZ** Odobreno FDA Razred 2 uređaj - Savezni zakon ograničava ovaj uređaj do biti prodao za koristiti po ili na narudžba od a liječnik.

The namijenjen koristiti od Horizon Serija Imagers slika u visokoj je rezoluciji na digitalnom izvornom slikovnom materijalu i pretvaranjem elektroničkih signala iz širokog spektra izravnih / neizravnih izlaza medicinskih slika. Izlaz u tiskanom obliku uključuje, međutim, nije ograničen na, digitalnu radiografiju, nuklearnu medicinu, ultrazvuk, CT, MRI, CR i planiranje zračenja. Slike su prikladne za medicinsku upotrebu dijagnoze slika i preporuke. Sustav je namijenjen medicinskim radiolozima, stručnjacima za modalitete snimanja i komunikaciji s upućenim liječnicima.

The Horizon Niz Imageri jesu suho, termalna, sive boje (G, GS, GSs, GS-Rad, G1, i G2 modeli) i sive boje / boja (Ci, Ci-s, CiRAD, i SF modeli) direktno toplinska printer / imagers.

The Horizon XL je a posebna model dodavanje 14 x 36u. i 14 x 51u. pravi veličina "Dugo" mediji da dozvole digitalni direktno ortopedski primjena tiskana kopija, uključujući dijagnoza i analiza od skolioza, težina ležaj kralježnica / kuk / koljeno, i dugo kost / kuk protetski i ortopedski uređaji dogurati do i kirurški planiranje. Horizont XL je primjenjiv do istinske veličine tiskani primjerak od cijela tijelo CT, MRI, i Angiografski i Venski teći slikanje postupci.

Horizont Imageri jesu 510 (k) očišćen do tržište kao FDA Razred 2 uređaji, Uredba broj 892.2040, Klasifikacija Proizvod Kodirati LMC: Horizont Niz Medicinski Multimedija Suho Imageri K021054 i Horizont XL Medicinski Dugo Film Imager Tiskani primjerak Multimedija K060440.

**OPREZ** Odobreno FDA Razred 2 uređaj - Savezni zakon ograničava ovaj uređaj do biti prodao za koristiti po ili na narudžba od a liječnik.

**OPREZ** Napraviti Naravno da stol limenka podrška težina od imager [približno 66,7 kg (147kg) s primiti pladnjevi i tri pun Opskrba kasete instaliran].

**UPOZORENJE** The imager je teška. Do Izbjegavajte ozljeda, koristiti dva narod do raspakirati i položaj imager.

**OPREZ** Čini ne ogrepsti ili nadimak list metal. Ogrebotine i nick u podrum htjeti šteta tiskani strana od ChromaVista plahte.

**OPREZ** Napraviti Naravno da imager je s pogonom isključiti prije povezivanje Ethernet kabel. Za informacija oko napajanje imager na i isključeno, uputiti do "Snaga Imager Na i Isključeno".

**OPREZ** Čini ne dodir bilo koji od konektor igle.

**OPREZ** Ako toplinska ispis glava je ne parkirano, vlast na imager, zatim ponoviti stepenice 2 i 3 do pravilno vlast isključiti imager tako da to čini park.

**OPREZ** Gurnuti vrpca kočija dolje polako. Prisiljavajući to dolje isto brzo svibanj šteta kočija.

**OPREZ** Ako imager je s pogonom isključiti koristeći VLAST ključ, neispisano u redu čekanja poslovi jesu spasio i htjeti Završi tiskanje jednom imager je s pogonom na opet (vas limenka pročišćavanje svi radna mjesta). Međutim, ako imager je s pogonom isključiti koristeći klackalica sklopka u leđa ili vlast je prekinuo (za primjer, an neočekivano vlast neuspjeh), u redu čekanja poslovi svibanj biti izgubljeno.

**UPOZORENJE** Kada servisiranje imager, stalno vlast to isključiti koristeći VLAST ključ, skretanje klackalica sklopka u leđa do 0 (isključeno) položaj, zatim odspojite imager.

**OPREZ** Koristiti samo Codonics mediji. Čini ne koristiti običan papir, ured prozirne folije, ili drugo neodobren mediji kao šteta, nepropisno operacija, ili kvar svibanj proizlaziti. Za informacija oko odobren Codonics mediji vrste i veličine, i kako do narudžba kasete, uputiti do "Naručivanje Mediji".

**OPREZ** Čini ne ponovno punjenje a kasete. Čini ne nagovarati s ili ukloniti barkod označiti. The kasete barkod informacija je bitno za osiguravanje dijagnostički slika kvalitetu. Kompromisno kasete u bilo koji put ugrožava kvalitetu i pouzdanost od imager.

**OPREZ** Čini ne ukloniti ili umetnuti a kasete dok a list je biće tiskano, ili vas mogli utjecati slika kvalitetu od tiskani list ili uzrok a džem. Stalno pauza imager prvi.

**OPREZ** Čini ne ukloniti tiskani kasete pokriti; to štiti mediji iz prah i drugo onečišćenja. Stalno držite i pohraniti kasete s otvoren strana gore do spriječiti plahte iz padajući van

**UPOZORENJE** S imager pokriti otvoren, dodir samo oni unutarnja komponente da jesu obojene zeleno. Ukloniti prstenovi, kravate, nakit, i drugo predmeti, i kravata leđa dlaka, tako da oni čini ne pad u ili dobiti zatečen u imager.

**OPREZ** Korišteno vrpca zadržava negativan od boja slike da bili tiskani koristeći da vrpca. Ako vas jesu potreban do osigurati pacijent povjerljivost i privatnost, vrpca treba biti uništeno.

**OPREZ** Koristiti Oprez kada mijenjajući se imager zadano postavke. Promjene mogli utjecati otisci napravljeno po drugo korisnika.

**OPREZ** Promjena zadanih postavki utjecat će na ispise drugih korisnika. Budite oprezni prilikom promjene zadanih postavki. Tipično je bolje odrediti postavke parametara lista i slike iz aplikacije DICOM ili postavki pisača PostScript ili koristiti datoteku Job Settings koja sadrži vrijednosti koje su vam potrebne. Za informacije o datotekama postavki posla pogledajte *Horizon Imager Tehnički Priručnik*.

**OPREZ** Ako imager's postavke bili promijenio iz tvornica zadane vrijednosti prior do biće otpremljen (za primjer, do smjestiti a posebna OEM konfiguracija), resetovanje do tvornica zadane vrijednosti htjeti ne vratiti "kao isporučeno" postavke. Umjesto toga, oni htjeti biti resetirani do standard tvornica zadano vrijednosti.

**OPREZ** Vraćanje na tvorničke postavke utjecat će na ispise ostalih korisnika. Budite oprezni prilikom promjene zadanih postavki. Tipično je bolje odrediti postavke parametara lista i slike iz aplikacije

DICOM ili postavki pisača PostScript ili koristiti datoteku Job Settings koja sadrži vrijednosti koje su vam potrebne. Za informacije o datotekama postavki posla pogledajte *Horizon Imager Tehnički Priručnik*.

**OPREZ** Mijenjanje imager's Zadano Mediji i Zadano Korisnik Postavke mogli utjecati naknadno otisci napravljeno po drugo korisnika. Koristiti Oprez kada mijenjajući se zadano postavke.

**OPREZ** Mijenjanje imager's Zadano Mediji i Zadano Korisnik Postavke mogli utjecati naknadno otisci napravljeno po drugo korisnika. Koristiti Oprez kada mijenjajući se zadano postavke.

**UPOZORENJE S** imager pokriti otvoren, dodir samo oni unutarnja komponente da jesu obojene zeleno. Ukloniti prstenovi, kravate, nakit, i drugo predmeti, i kravata leđa dlaka, tako da oni čini ne pad u ili dobiti zatečen u imager.

**UPOZORENJE** The toplinska ispis glava svibanj biti vruće.

**UPOZORENJE** Kada čišćenje ispis glava, Izbjegavajte ekstremno završava od ispis glava, koji jesu oštar.

**OPREZ** Za čišćenje termalne glave za ispis koristite samo maramicu za čišćenje glave za ispis. Također, ne dodirujte staklenu površinu termo glave za ispis prstima; može oštetiti glavu za ispis. Da biste izbjegli dodirivanje staklene površine, možda ćete htjeti nositi rukavice prilikom čišćenja termo glave za ispis.

**OPREZ** The toplinska ispis glava mora biti potpuno suho prije pokušavajući do koristiti imager.

Dopuštajući toplinska ispis glava do toplina gore opet dok još mokra htjeti šteta toplinska ispis glava.

**UPOZORENJE S** imager pokriti otvoren, dodir samo oni unutarnja komponente da jesu obojene zeleno. Ukloniti prstenovi, kravate, nakit, i drugo predmeti, i kravata leđa dlaka, tako da oni čini ne pad u ili dobiti zatečen u imager.

**OPREZ** Koristiti samo valjak valjak čišćenje brisanje kada čišćenje valjak. The valjak valjak mogli biti oštećen ako vas koristiti ispis glava čišćenje brisanje.

**UPOZORENJE S** primiti pladnjevi uklonjeno, dodir samo oni unutarnja komponente da jesu obojene zeleno. Ukloniti prstenovi, kravate, nakit, i drugo predmeti, i kravata leđa dlaka, tako da oni čini ne pad u ili dobiti zatečen u imager.

**OPREZ** Koristiti samo valjak valjak čišćenje brisanje kada čišćenje odabрати gume. The gume mogli biti oštećen ako vas koristiti ispis glava čišćenje brisanje.

**OPREZ** Čini ne dodir odabрати gume (koji svibanj biti bijela ili zelena); tijelo ulja iz tvoj prstima jesu teško do ukloniti i mogli eventualno šteta gume.

**UPOZORENJE S** primiti pladnjevi uklonjeno, dodir samo oni unutarnja komponente da jesu obojene zeleno. Ukloniti prstenovi, kravate, nakit, i drugo predmeti, i kravata leđa dlaka, tako da oni čini ne pad u ili dobiti zatečen u imager.

**OPREZ** Koristiti samo čišćenje brisevi iz a Barkod Čitač Čišćenje Kit.

**OPREZ** Čini ne ogrepsti ili nadimak list metal. Ogrobotine i nick u podrum htjeti šteta tiskani strana od ChromaVista plahte.

**OPREZ** Savezni zakon ograničava ovaj uređaj do biti prodao za koristiti po ili na narudžba od a liječnik.

**UPOZORENJE S** vrh pokriti otvoren, dodir samo oni unutarnja komponente da jesu obojene zeleno. Ukloniti prstenovi, kravate, nakit, i drugo predmeti, i kravata leđa dlaka, tako da oni čini ne pad u ili dobiti zatečen u imager.

**OPREZ** Čini ne dodir odabрати gume (koji svibanj biti bijela ili zelena); tijelo ulja iz tvoj prstima jesu teško do ukloniti i mogli eventualno šteta gume.

**OPREZ** Do Izbjegavajte oštećujući unutarnja komponente, koristiti briga kada uklanjanje a list iz mediji staza u Gornji dio od imager.

**OPREZ** Nikada staviti a list leđa u kaseta. Prah ili ulje iz tvoj prst htjeti utjecati slika kvalitetu.

**UPOZORENJE S** vrh pokriti otvoren, dodir samo oni unutarnja komponente da jesu obojene zeleno. Ukloniti prstenovi, kravate, nakit, i drugo predmeti, i kravata leđa dlaka, tako da oni čini ne pad u ili dobiti zatečen u imager.

**OPREZ** Biti oprezno ne do ogrepsti uglađen list metal ili šteta senzor blizu Gornji vodič usjek.

**OPREZ** Napraviti Naravno vas čini ne nadrotirati mediji vodič, kao prikazan ispod.

**OPREZ** Savezni zakon ograničava ovaj uređaj do biti prodao za koristiti po ili na narudžba od a liječnik.

**OPREZ** Koristiti briga kada trčanje Pročišćavanje Ispis Poslovi funkcija. Ovaj funkcija htjeti pročišćavanje drugo korisnika ispis poslovi kao dobro kao tvoja.

**OPREZ** svi datoteke prenijeli koristeći anonimni FTP jesu čitljiv po drugo FTP korisnika. ČINI NE Učitaj osjetljiv ili razvrstan informacija.