

Codonics Renkli Kağıt


Renk uygulamaları kullanarak bugünün tıbbi sistemlerinin daha fazla, Codonics bizim ChromaVista® Renkli Kağıt ile sektöründe yol açar

"Jilet gibi keskin renk çalışmalarımızın kağıt üzerinde nasıl çalıştığını gördüklerinde heyecanveren bir nöroloji grubuyla çalışıyoruz.

hasta çizelgelerine uygun bir şekilde kaymış olabilir. Bu kelimenin tam anlamıyla onların uygulama değişti."

John C. Litchney, MBA, RT, ClevelandKlinik Yöneticisi, Bölgesel Radyoloji Bölümü

- Codonics özel Tıbbi Renk Eşleştirme (MCM™) baskıların yumuşak kopya monitörlerle eşleşmesini sağlar
- Başvuran hekimler ve hasta evleri için idealdir
- Özellikle tıbbi uygulamalar için tasarlanmış, Codonics renkli kağıt FDA onaylı ve tamamen arşivlenebilir
- Görüntü kalitesi lazer ve ofis yazıcılarından çok daha üstündür 16,7 milyon renk
- Sektörde gerçekten rakip olan tek renk çıktısı geleneksel renkli fotoğraf filmi

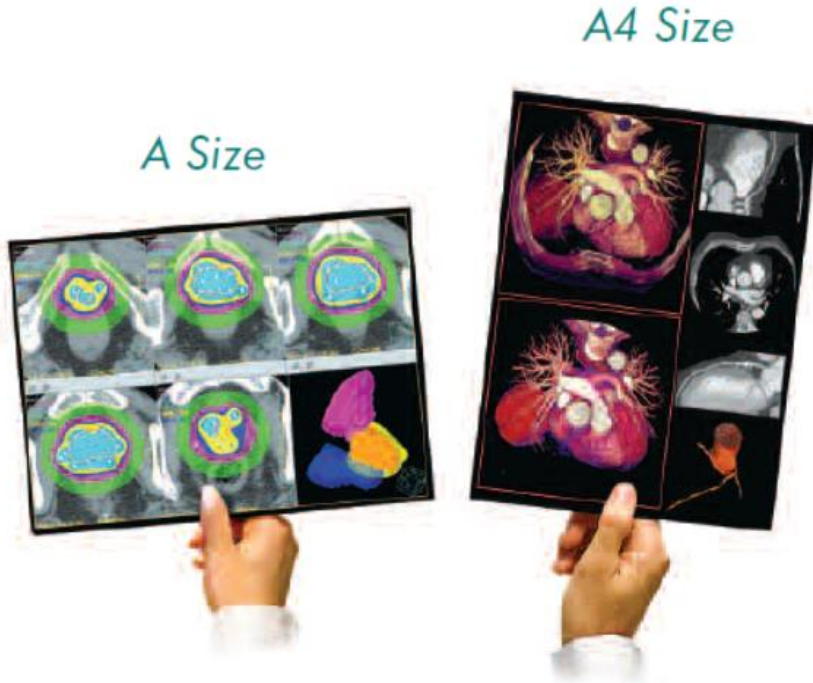


Codonics ChromaVista®

Renkli Kağıt

Codonics dünyanın ilk DICOM rengini tanıttı görüntüleyici ve multi-medya öncü olmuştur on yılı aşkın bir süredir görüntüleyiciler. Biz endüstriyiz 25.000'den fazla renkli görüntüleyicide lider dünya çapında kurulumları.

Horizon Multi-media Imager'ımız çarpıcı özelliklere sahiptir uça renkli baskı, görüntülemeyi en üst düzeye çıkarma boyutu ve atık azaltılması. Codonics özel Tıbbi Renk Eşleştirme (MCM™) gelişmiş bir yazdırılan ları ayarlayan görüntü işleme özelliği yumuşak kopya monitörleri doğru bir şekilde eşleştirmek için çıktı renkleri. Bu işlem ton, doygunluk, ve yazıcı ve yumuşak kopya arasındaki yoğunluk inceleme istasyonları. Kullanıcının kolayca belirleyebilirsiniz otomatik kullanarak kendi ekranı için en iyi maç Her yerleşik MCM braket özelliği Codonics görüntüleyici.

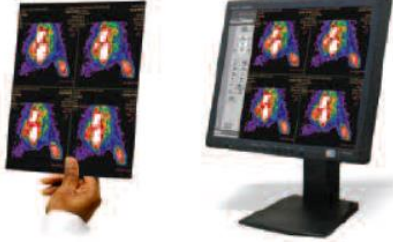

Renk baskıları her zaman softcopy monitörler bizim özel ile maç Tıbbi Renk Eşleştirme (MCM™) özelliği. Tutarlılık, netlik ve Codonics renk boyası-difüzyon teknolojisi ile doygunluk çok aşılıyor balmumu veya mürekkep püskürtmeli yazıcılar.

ChromaVista Renkli Kağıt ağır, suya ve yırtılmalara karşı dirençli fotoğraf ağırlıklı baz malzeme. Mürekkep veya toner olmadığından, görüntüler asla ellere veya diğer baskılara bulaşmaz veya aktarılmaz.

Özellikler:

- Horizon ile uyumlu ve ve NP/ EP multimedya görüntüleyicileri
- Sürekli ton renk işleme
- Dmin < 0.10 OD, Dmax > 2.500 OD (yansıtıcı)
- Kalınlık ~ 0.2mm

Kullanılabilir Boyutlar:

Horizon

A (8,5" x 11")
A4 (210mm x 297mm)
17991 Englewood Drive
Middleburg Heights, OH 44130 USA
(440) 243-1198
(440) 243-1334 Faks
e-posta info@codonics.com
www.codonics.com

**Daha fazla bilgi için Codonics ile iletişime geçin
800-444-1198 veya 440-243-1198 ve isteyin
Medya Satış Departmanımız.**

* ChromaVista Renk Kağıdı en Codonics görüntüleyicileri kullanmak için kullanılabilir, bazı model ve boyut kısıtlamaları geçerlidir. Teknik özellikler bildirimde bulunmayan bir şekilde değiştirilebilir. En son bilgiler için Codonics temsilcinize başvurun. Telif Hakkı © 2005 Codonics, Inc. 900- 311-001 Rev A