

*Codonics DirectVista® Film ger överlägsen kvalitet  
bilder i en kostnadsbesparande mängd storlekar*

# Codonics Film

*" Kvaliteten är överlägsen de traditionella filmbildare  
vi tidigare använde."*

**A. Joseph Borelli, M.D., MRI på Belfair -Bluffton, SC**

- Helt digital, vår unika direkttermiska teknik uppnår bildkvalitet bättre eller lika med "laserkvalitet"
- Bekväm torrutskrift eliminerar behovet av VVS, särskilda ventilations- och sittkrav
- 14" x 36" och 14" x 51" lång film för digitalt sydd true-size bilder på en kontinuerlig film
- Flera filmstorlekar gör att du kan sänka filmkostnaderna genom att skriva ut på den mest ekonomiska storleken för din ansökan

**8"x10"**

20 x 25 cm

**14"x17"**

35 x 43 cm

**14" x 51"**

35 x 130 cm

**14"x36"**

35 x 92 cm

**11"x14"**

28 x 35 cm





## Codonics DirectVista® Diagnostik Blå och tydlig film

*Codonics patenterade bildteknik utgångar överlägsen  
diagnostisk torr film med oöverträffad bildkvalitet.  
Vår film är den idealiska lösningen för de mest krävande  
medicinska papperskopior. Helt eliminera  
mellanrader genom att föra filmen framåt i en smidig  
är diagnostikutdata exakt och konsekvent.  
Vår film finns i 14 "x 17", 11"x14" och 8 "x 10",*

ge användaren möjlighet att skala bilden till lämplig filmstorlek, vilket ger ett alternativ till tryck på en lägre kostnad. Plus, vår exklusiva 14 "x 36" och 14 " x 51" lång film ger specialiserade ortopedi med "digitalt sydda" true size-bilder för långa ben och skoliosstudier på en kontinuerlig film. Beroende av Codonics att leverera tillförlitliga, konsekventa bilder med högsta möjliga kvalitet.

I tusentals jämförelser sida vid sida, certifierad radiologer kunde inte se skillnaden mellan bilder som skrivs ut på Codonics bildare från de tryckta på dyrare laser avbildare. Codonics patenterade bildteknik utgångar diagnostisk film uppnå oöverträffad mångsidighet och bildkvalitet.

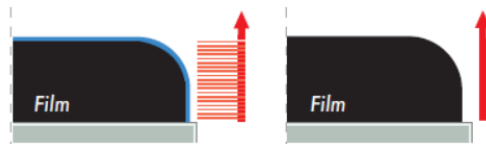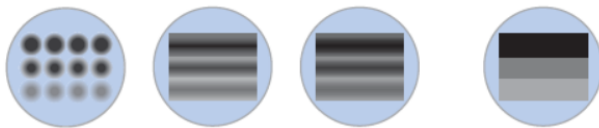

Traditionell termisk låg kostnad Laser

hög kostnad Laser Codonics "Ingen pixel"

Luckor =Artefakter Luckor = Artefakter inga

luckor inga luckor Dynamic Media Transport System (DMTS)

Enllows Codonics bildare att skriva ut medan media avancerar i en smidig rörelse som eliminerar utrymme mellan linjerna.

#### Specifikationer:

- Kompatibel med Horizon och NP / EP multi-media bildare
- Kontinuerlig tongräskalerendering
- Dmin < 0,10 OD, Dmax > 3,00 OD (transmissiv)
- Tjocklek ~ 0,2 mm

#### Tillgängliga storlekar:

##### Horizon-bilder

14"x 51" ( 35 X 130 cm)

14"x 36" ( 35 x 92 cm)

14"x17" ( 35 X 43 cm)

11"x14" ( 28 X 35 cm)

8"x10" ( 20 X 25 cm)

##### NP/EP-bilder

8"x10" ( 20 X 25 cm)

11"x14"

8"x10"

17991 Englewood Drev  
Middleburg höjder, OH 44130 USA  
(440) 243-1198  
(440) 243-1334 Fax  
E-post info@codonics.com  
www.codonics.com  
900-309-001 Rev C

**För mer information kontakta Codonics på 800-444-1198 eller 440-243-1198 och be om vår mediaförsäljningsavdelning.**

Kontakta din Codonics representant för modellkonfigurationer och medietillgänglighet. DirectVista Film är tillgänglig för användning i de flesta Codonics bildare, vissa modell och storlek begränsningar gäller. Specifikationerna kan komma att ändras utan föregående meddelande. Kontakta din Codonics representant för den senaste informationen. Upphovsrätt © 2005-2006 Codonics, Inc.